




NEU

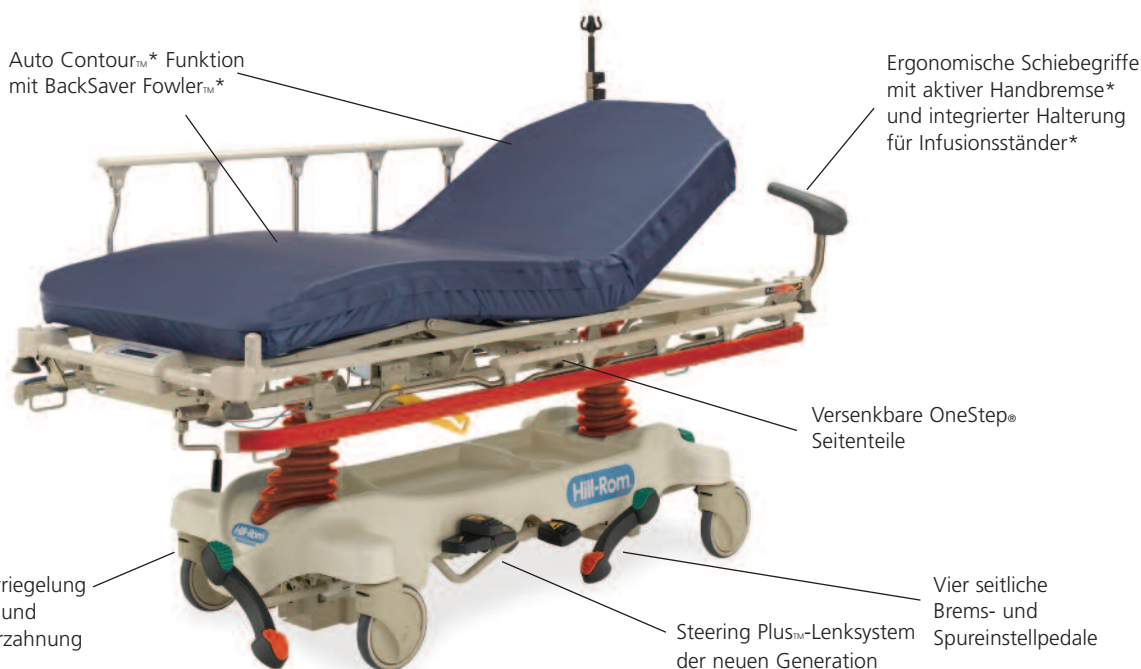

* Option

Auf einen Blick

Hauptmerkmale der neuen Hill-Rom Transportliege:

- **Tragfähigkeit 317,5 kg**
- **Neue, niedrigste Position der Liegefläche** (52,6 cm) für mehr Sicherheit und Komfort
- **BackSaver Fowler™-Funktion** für müheloses Einstellen der Rückenlehne
- **Auto Contour™-Funktion** verhindert das Rutschen der Patienten beim Anheben der Rückenlehne
- **Aktive Handbremse** – die weltweit erste Handbremse für Transportliegen hilft beim Befahren abschüssiger Rampen und dem Umfahren enger Kurven, ohne dass Sie Ihr Körpergewicht zum sicheren und einfachen Anhalten einsetzen
- **Integrierte Halterung für fahrbaren Infusionsständer** erleichtert das gleichzeitige Schieben von Liege und fahrbarem Infusionsständer
- **Steering Plus™-Lenksystem der neuen Generation** für eine bessere Steuerung in Kurven
- **Bremsen mit Doppelverriegelung an allen vier Laufrollen** für einen sicheren und stabilen Halt
- **Hochdruckreinigung möglich**

Die neuen Transport- und Behandlungsliegen von Hill-Rom

Die robuste Transportliege (P8000) von Hill-Rom ist die ideale Wahl für Notaufnahmen, Operationssäle, Aufwachraum oder ambulante Behandlung. Diese Liege bietet überragende Mobilität, Komfort und Qualität.

Mobilität. Vermeiden Sie großen Krafteinsatz beim Lenken und Bremsen. Eine optionale aktive Handbremse vereinfacht das Hinabfahren von Rampen und plötzliches Anhalten. Die integrierte Halterung für einen fahrbaren Infusionsständer erleichtert das gleichzeitige Schieben von Liege und fahrbarem Infusionsständer. Das Steering Plus™-Lenksystem der neuen Generation ermöglicht eine bessere Steuerung in Kurven.

Komfort. Optimieren Sie Ergonomie und Komfort. Die BackSaver Fowler™-Funktion erlaubt ein müheloses Einstellen der Rückenlehne. Zusammen mit der Auto Contour™-Funktion werden so der Kraftaufwand und die Notwendigkeit des Repositionierens von Patienten minimiert.

Qualität. Die langlebigen, verstärkten Rahmen sind aus dickwandigem Automobilstahl gefertigt und verfügen über eine Tragfähigkeit von bis zu 317,5 kg zum Transport auch schwergewichtiger Patienten. Vernickelte Schiebegriffe, Infusionsständer, Seitenteile und weitere Bauteile bieten eine hohe Rostbeständigkeit.

Hill-Rom®

Transport- und Behandlungsliege



Merkmale	Basis-ausstattung	Optionen
Tragfähigkeit 317,5 kg	•	
BackSaver Fowler™ (inklusive manuellem Knieknick)		•
Auto Contour™-Funktion (inklusive „BackSaver Fowler“)		•
Aktive Handbremse		•
Integrierte Halterung für fahrbaren Infusionsständer		•
Brems-/Spureinstellpedale – Kopf und Fuß	•	
Brems-/Spureinstellpedale – an vier Seiten		•
Steering Plus™ Lenksystem der neuen Generation	•	
Ergonomische Schiebegriffe		•
Permanenter Infusionsständer – 3 Stufen		•
Breite 66 cm	•	
Breite 76 cm		•
Manueller Knieknick		•
Hydraulische Fußpedale zum Heben/Senken		•
Seitenteilsystem unter der Liegefläche versenkbar	•	
Röntgendurchlässige Liegefläche		•
7,6 cm dicke Schaumstoffmatratze mit Feuerschutzbezug	•	
10,2 cm dicke Schaumstoffmatratze mit Feuerschutzbezug		•
12,7 cm dicke Comfortline®		
Mehrfach-Schaumstoffmatratze mit Feuerschutzbezug		•
Farben für Wandabweiserschiene und Hubsäulenmanschetten – Auswahl zwischen Neutral, Blau, Rot, Aquamarin oder Violett	Nach Wahl	



Auto Contour™-Funktion mit BackSaver Fowler™



Aktive Handbremse



Integrierte Halterung für fahrbaren Infusionsständer

Zubehör
• Kopfkissen • Patiententablett • Ablagetablett • Zusätzlicher Infusionsständer • Montierbarer Adapter zur Aufnahme von fahrbaren Infusionsständern • Transportgurte • Fixiergurte • Armstütze • Seitenteilabdeckungen • Seitliche Röntgenkassettenhalterung • Sauerstoffflaschenhalter • Halter für Flüssigsauerstofftank • Halterung für Patientenakten • Abnehmbares Fußhaupt • Multifunktions - Fußhaupt (auch als Monitorträger und Verlängerung nutzbar) • Matratzenpolster für Verlängerung • Papierrollensponder • Trittbügel

Technische Daten
Max. Arbeitslast:317,5 kg
Niedrigste Position – vom Boden bis zur Oberkante der Liegefläche:52,6 cm
Höchste Position – vom Boden bis zur Oberkante der Liegefläche:87 cm
Gesamtlänge:210,8 cm
Gesamtbreite (Seitenteile aufgestellt):81,3 cm
.....oder 91,4 cm
Gesamtbreite (Seitenteile abgesenkt):67,3 cm oder 76,8 cm
Länge Seitenteil:119,4 cm
Höhe Seitenteil über Matratze/Auflage:35,6 cm
Matratzengröße:66 cm x 190,5 cm
.....oder 76 cm x 190,5 cm
Maximaler Rückenlehnen-Neigungswinkel:90°
Maximaler Trendelenburg/Anti-Trendelenburg-Winkel:18°
Bodenfreiheit:8,9 cm
Rollengröße:20,3 cm

Hill-Rom behält sich das Recht vor, die Konstruktion, die technischen Daten und die Modellausführungen ohne Vorankündigung zu ändern. Die einzige Produktgarantie, die von Hill-Rom gewährt wird, besteht in der ausdrücklichen, schriftlich verfassten Garantie, die dem Kaufvertrag des Erstkäufers beiliegt. © 2007 Hill-Rom Services, Inc. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

8/15/07

France+33 (0)2 97 50 92 12
 United Kingdom+44 (0)1530 411000
 Deutschland+49 (0)211/16450-0
 Nederland+31 (0)347 32 35 32
 Italia+39 02-950541
 Suisse/Schweiz+41 (0)21/706 21 30
 (deutschsprachig)021/706 21 38

Österreich+43 (0)2243 / 28550
 Ireland+353 (0)1 413 6005
 Iberia+34 (0)93 6856000
 Nordic Countries+46 (0)8 564 353 60
 Exportcontact your local Hill-Rom distributor or contact your Area manager
via website or call +1 812 934 8173

Hill-Rom®