

SÄULENLIEGEN
FÜR UNTERSUCHUNG,
BEHANDLUNG UND THERAPIE




DEWERT

Präzisions-
Stahlrohrmöbel

SERIE 6000E

2026.1

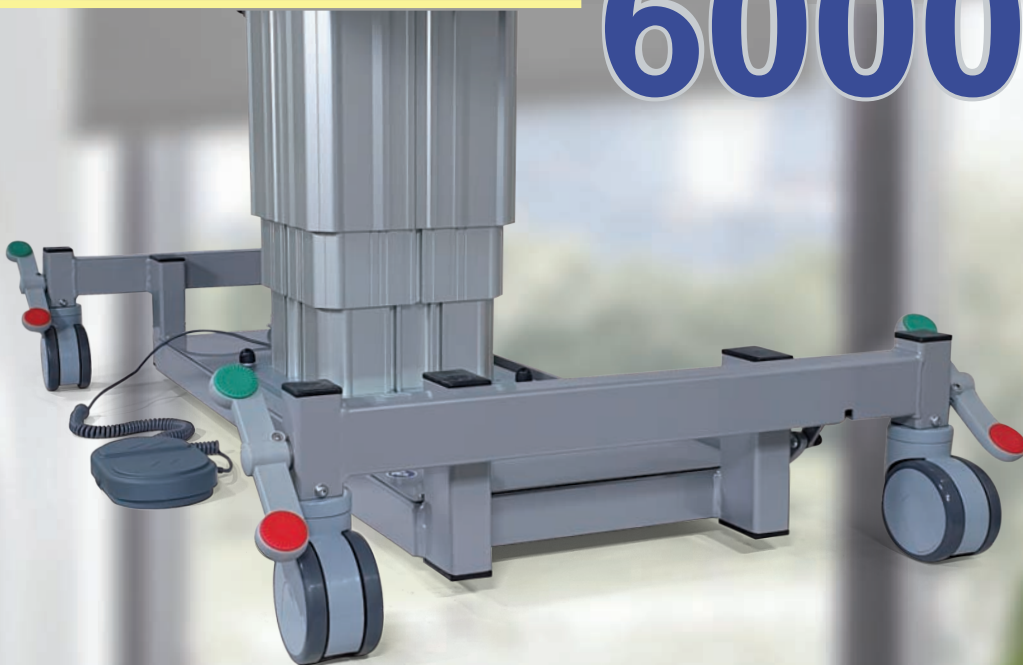

MIT
2-TEILIGER
LIEGEFLÄCHE



MIT
5-TEILIGER
LIEGEFLÄCHE



C-BOGEN-
GEEIGNET



MIT
NEIGUNGS-
VERSTELLUNG



LIEGEN FÜR PRAXIS UND KRANKENHAUS



Serie 6000E - Säulenliegen



Inhalt

Gute Gründe für eine Säulenliege der Serie 6000E 3
Säulenliegen für Untersuchung, Behandlung

2-teilige Säulenliegen:

- Modell 6000E 6
- Modell 6050E
mit Trendelenburg-Einstellung 8

5-teilige Säulenliegen:

- Modell 6070E 10
- Modell 6075E
mit Trendelenburg-Einstellung 12
- Modell 6080E 14
- Modell 6085E
mit Trendelenburg-Einstellung 16

2-teilige Säulenliegen C-Bogen-geeignet:

- Modell 6100E 18




Langlebig ✓



Robust ✓



Pflegeleicht ✓

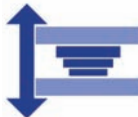

**Sanfte Höhenverstellung
durch Hubsäule** ✓



**Freiraum unter der
Liegefläche** ✓



**Universeller
Einsatz** ✓



Bei Modell 6100E
zusätzlich:

C-Bogen geeignet ✓

**RD
DEWERT**

Präzisions-
Stahlrohrmöbel



**Bewährte
Dewert-Qualität**



Polsteraufbau:

- Polsterteilstärke: 60 mm
- Trägerplatte bestehend aus massivem 18 mm-Schichtholz
→ keine brechende Spanplatte bei Randbelastung
- 2-lagiger homogener Polyurethan-Schaumstoff mit RG 46 und RG 75,
Ökotex-zertifiziert
→ kein aus Abfallschaum und chemischen Klebstoffen hergestellter
Verbundschaum, der sich im schnellen Alterungsprozess aufreißt
- Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:
 - Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatte Oberfläche
 - Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Reinigungsset für Skai-Produkte

(Art.-Nr. 050-1000)


Inhalt:

- Zerstäuberflasche mit 200 ml
Spezial-Skai-Reinigungsmittel
- 1 Mikrofaser-Pflegetuch
40 x 40 cm


Serie 6000E - Säulenliegen

Gute Gründe für eine Säulenliege der Serie 6000E

Elektromotorische Höhenverstellung durch Hubsäule

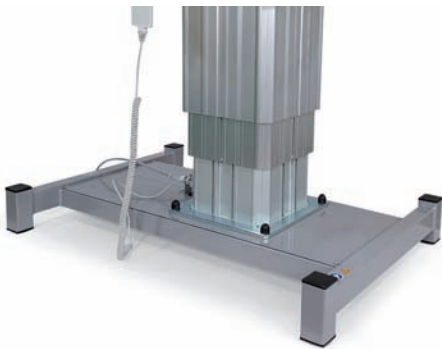

- Sanfte, ruckelfreie Höhenverstellung durch integrierten, leistungsstarken AC-Elektromotor mit 3.000 N Druckkraft
- Konstante Verstellgeschwindigkeit auch bei Volllast
- EPR-Sicherheitsnetzkabel mit Zugsicherung, 4 m Länge
- Integriertes Sicherheitskonzept (nach neuester BfArM-Empfehlung)
- Hohe Belastbarkeit

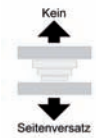

Dewert-Liegen - mit Sicherheit!

Integriertes Sicherheitskonzept entsprechend der aktuellen BfArM-Empfehlung


Sicherheit muss gerade bei elektromotorisch höhenverstellbaren Liegen an oberster Stelle stehen.

Entsprechend der aktuellen BfArM-Empfehlung sind unsere elektromotorisch höhenverstellbaren Liegen konstruktiv mit Sicherheitselementen ausgestattet, die dem Schutz gegen unautorisierte/unbeabsichtigte Bedienung bzw. dem Schutz des Bedieners während der Höhenverstellung dienen:

Doppeltipp-Aktivierung:

Schutz gegen unautorisierte/unbeabsichtigte Bedienung

- Automatisches Verriegeln des Elektromotors
- Nach 30 Sekunden Betätigung in eine Fahrtrichtung schaltet der Antrieb ab
- Freischaltung nur mit einer definierten Schaltfolge, dem Doppeltipp

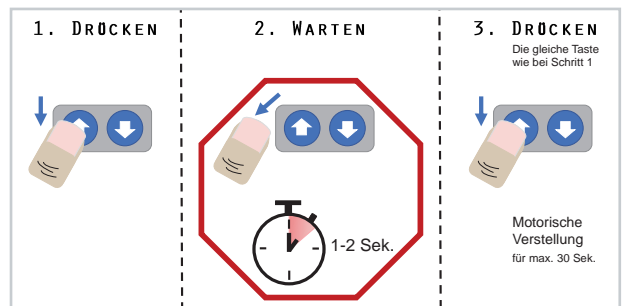

Ein Video zum richtigen Umgang mit der Doppeltipp-Aktivierung finden Sie auf unserem YouTube-Kanal



OPTIONAL



Drei-Stufen-Fußschalter: Schutz des Bedieners



- Bei starkem Druck auf die Abwärtstaste wird eine dritte Stufe aktiviert. Dadurch stoppt der Motor sofort und verfährt anschließend automatisch einige cm nach oben, um den Bediener im Falle einer Einklemmung zu befreien.




Grundausrüstung:



NEUE GRUNDAUSSTATTUNG:
HANDSCHALTER
MIT VERSENKTEM BEDIENFELD

Serie 6000E - Säulenliegen

Gute Gründe für eine Säulenliege der Serie 6000E

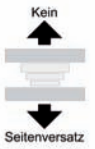


Technik:

- Hubsäule je nach Modell mittig oder einseitig angeordnet, dadurch großer Freiraum unterhalb der Liegefläche
- **Hohe Stabilität** auch bei außermittiger Belastung der Liege durch spezielles integriertes Führungssystem
- Verkleidung der Hubsäule durch drei ineinander gleitende Kulissen aus eloxiertem Aluminium, silberfarbig
- Hohe Verwindungssteifigkeit durch Verwendung von großvolumigem Rechteck-Stahlrohr für Oberrahmen und Untergestell mit Materialwandstärken bis 3 mm
- Optimale Standsicherheit durch ausgewogenes Eigengewicht und weit auseinander stehende Füße
- Robuste und langlebige Konstruktion, seit vielen Jahren im anspruchsvollen Krankenhaus-Alltag bewährt
- Belastbarkeit modellabhängig



Dewert-Hygiene-Ausstattung

Ermöglicht optimale Reinigung und Desinfizierbarkeit






• Scharnierabdeckung aus identischem Bezugsmaterial



• Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen



• Entlüftungsöffnungen an der Polsterunterseite, verschlossen mit Luftausgleichskappen mit Ventilfunktion



• Einfache Hygiene durch offene Bauweise: Gute Erreichbarkeit aller Bauteile, keine im Alterungsprozess brechenden Kunststoffabdeckungen

• Optional: Innovatives Polsterbezugsmaterial Skai® Toronto EN mit staynu



Serie 6000E - Säulenliegen

Gute Gründe für eine Säulenliege der Serie 6000E ...

... mit 2-teiliger oder 5-teiliger Liegefläche:



- Kopfteil stufenlos positiv und negativ verstellbar
- Druckstabile Gasdruckfeder(n) für schwingfreies Arbeiten am Kopf- und Fußbereich



- Bei 5-teiliger Liegefläche **zusätzlich**:
 - Ergonomische Form des Polsters, Verjüngungen vom Mittel-/Rückenteil zum Kopf- und Fußteil
 - Rückenteil stufenlos positiv und negativ verstellbar, durch Verstellung des Rückenteils wird ebenfalls das Kopfteil verstellt, da beide Sektionen miteinander verbunden sind
 - 2-teiliges Fußteil, jedes Beinteil individuell stufenlos verstellbar
 - **Verstellung aller Liegeflächensegmente unabhängig von der Liegenhöhe**




... mit 2-teiliger oder 5-teiliger Liegefläche und Trendelenburg-Einstellung:

- **Elektromotorische Neigungsverstellung** der Liegefläche bis 12°, gemessen in waagerechter Positionierung aller Segmente
- Bedienung der elektromotorischen Neigungsverstellung durch einen Handschalter

... mit 2-teiliger Liegefläche, C-Bogen geeignet:

- Kopfteil stufenlos positiv- und negativ verstellbar (optional einteilige Liegefläche / abnehmbare Polsterauflage)
- Einseitig platzierte Hubsäule, Gestellkonstruktion mit hohen Materialstärken zur Aufnahme und Abfederung von Verwindungskraften
- **Freifläche im Brust- und Beckenbereich** (1.000 mm x 650 mm (ausstattungsabhängig))

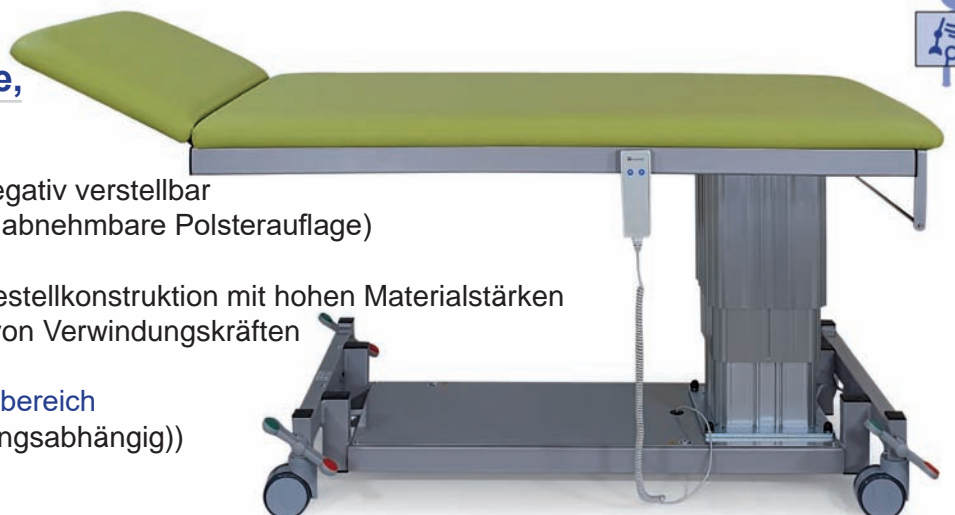

Serie 6000E


2-teilige Säulenliege mit elektromotorischer Höhenverstellung

... für Untersuchung und Behandlung

Modell 6000-03E und 6001-03E weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 6000-04E und 6001-04E graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

► Modell 6805-..E entspricht Modell 6000-..E, jedoch mit Nasenschlitz

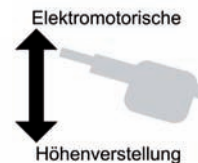

Beide Abb.:
Modell 6000-04XLE
mit Ausstattungsoptionen:
Fahrbar auf zentral
feststellbaren Rollen (1048),
Papierrollenhalter (1270K),
mit Fußschalter anstelle von
Handschalter;
Polsterfarbe: 64-717 deep sea



Grundausrüstung:

- Liege feststehend mit Nivellierfüßen zum Höhenausgleich
- Elektromotorische Höhenverstellung durch mittig angeordnete Hubsäule
- Bedienung des Elektromotors durch einen Handschalter, optional Drei-Stufen-Fußschalter
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors (Art.-Nr. 1999, Pflichtausstattung)
- Dewert-Hygiene-Ausstattung



Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -35 bis +45° verstellbar
- Kopfteillänge: 550 mm
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 1.400 mm
- Polsterteilstärke: 60 mm



Technische Daten:

- Elektromotorisch höhenverstellbar von 560 mm bis 960 mm in 24 Sek. durch AC-Elektromotor mit 3.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: Modell 6000-..E: 700 mm | Modell 6001-..E: 800 mm
- Länge der Liegefläche: 1.950 mm
- Belastbarkeit: 250 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet



Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandora Plus mit samtig-glatter Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 1048
Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 100 mm, Untergestell tiefergelegt, Grundhöhe +20 mm



Art.-Nr. 1047
Rad-Hebe-System mit ergonomischen Fußhebeln zur gesteuerten Absenkung der Liege, Untergestell tiefergelegt, Grundhöhe +20 mm

Weitere Motorbedienelemente



Art.-Nr. 1920E
1 Handschalter mit Magnet zur Befestigung an der Rückseite



Art.-Nr. 1910-3E
1 Drei-Stufen-Fußschalter: Bei stärkerem Druck auf die Abwärtstaste stoppt der Motor und verfährt um einige cm in die Gegenrichtung

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 1270K / 1280K
Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil (nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm / 800 mm



Art.-Nr. 1270K/F / 1280K/F
Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil (70 mm vorstehend), für Liegenbreite 700 mm / 800 mm

Nasenschlitz



Art.-Nr. 1610
Nasenschlitz, eingepolstert in das Kopfteil
Art.-Nr. 1620
Füllpolster für Nasenschlitz

Anbau-Elemente



Art.-Nr. 1410
1 Stück Normschiene 350 mm lang



Art.-Nr. 1430
1 Befestigungskloben für Normschiene, Aufnahme passend für Rohr-Ø 18 mm

Armstützen



Art.-Nr. 1440
1 seitliche Armstütze, schwenk- und abnehmbar, zusätzlich dreh- und kippbar, für Normschiene

Seitensicherung



Art.-Nr. 1080
1 Stück Seitensicherung seitlich versenkbar, verchromt, komplett aus Stahlrohr, Länge 1.060 mm



Art.-Nr. 1040
1 Stück Seitensicherung abklappbar, verchromt, komplett aus Stahlrohr, Länge 700 mm



Art.-Nr. 1005
1 Stück Seitensicherung für Normschiene mit Befestigungskloben, komplett aus Stahlrohr, Länge 800 mm

Wandschutzelemente



Art.-Nr. 1175 / 1176
4 Wandabweisräder Ø 150 mm mit Halterungen, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm

Polsteroptionen

Art.-Nr. 1770 / 1780
Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm, Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. 1772 / 1782
Polster mittelweich durch Kaltschaumauflage, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm, Polsterstärke 70 mm

Serie 6000E


2-teilige Säulenliege mit elektromotorischer Höhenverstellung

... für Untersuchung und Behandlung

Modell 6050-03E und 6051-03E weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 6050-04E und 6051-04E graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)


► Modell 6810-..E entspricht Modell 6050-..E, jedoch mit Nasenschlitz

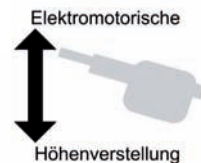

Alle Abb.:
Modell 6050-04XLE
mit Ausstattungsoptionen:
Fahrbar auf zentral
feststellbaren Rollen (1048),
Papierrollenhalter (1270K/F),
Fußschalter anstelle von
Handscharter;
Polsterfarbe: 64-715 anthracite



Grundausstattung:

- Liege feststehend mit Nivellierfüßen zum Höhenausgleich
- Langes Kopfteil in Halbrund-Form, verstellbar zu Sitzposition
- Elektromotorische Höhenverstellung durch mittig angeordnete Hubsäule
- Bedienung des Elektromotors durch einen Handscharter, optional Drei-Stufen-Fußschalter
- Gesamte Liegefläche elektromotorisch neigbar bis 20° (Trendelenburg), Bedienung durch Handscharter
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors (Art.-Nr. 1999, Pflichtausstattung)
- Dewert-Hygiene-Ausstattung 


Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -25 bis +75° verstellbar (Sitzposition)
- Kopfteillänge: 750 mm
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 1.200 mm
- Polsterteilstärke: 60 mm



Technische Daten:

- Elektromotorisch höhenverstellbar von 560 mm bis 960 mm in 24 Sek. durch AC-Elektromotor mit 3.000 N Druckkraft
- Elektromotorische Neigungsverstellung der gesamten Liegefläche bis 20° (Trendelenburg)
- Breite der Liegefläche: Modell 6050-..E: 700 mm | Modell 6051-..E: 800 mm
- Länge der Liegefläche: 1.950 mm
- Belastbarkeit: 250 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet 



Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatter Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 1048
Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 100 mm, Untergestell tiefergelegt, Grundhöhe +20 mm



Art.-Nr. 1047
Rad-Hebe-System mit ergonomischen Fußhebeln zur gesteuerten Absenkung der Liege, Untergestell tiefergelegt, Grundhöhe +20 mm

Weitere Motorbedienelemente



Art.-Nr. 1920E
1 Handschalter mit Magnet zur Befestigung an der Rückseite



Art.-Nr. 1910-3E
1 Drei-Stufen-Fußschalter: Bei stärkerem Druck auf die Abwärtstaste stoppt der Motor und verfährt um einige cm in die Gegenrichtung

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 1270K / 1280K
Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil (nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm / 800 mm



Art.-Nr. 1270K/F / 1280K/F
Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil (70 mm vorstehend), für Liegenbreite 700 mm / 800 mm

Nasenschlitz



Art.-Nr. 1610
Nasenschlitz, eingepolstert in das Kopfteil
Art.-Nr. 1620
Füllpolster für Nasenschlitz

Anbau-Elemente



Art.-Nr. 1410
1 Stück Normschiene 350 mm lang



Art.-Nr. 1430
1 Befestigungskloben für Normschiene, Aufnahme passend für Rohr-Ø 18 mm

Armstützen



Art.-Nr. 1440
1 seitliche Armstütze, schwenk- und abnehmbar, zusätzlich dreh- und kippbar, für Normschiene

Seitensicherung



Art.-Nr. 1080-60
1 Stück Seitensicherung seitlich versenkbar, verchromt, komplett aus Stahlrohr, Länge 820 mm



Art.-Nr. 1005
1 Stück Seitensicherung für Normschiene mit Befestigungskloben, komplett aus Stahlrohr, Länge 800 mm

Wandschutzelemente



Art.-Nr. 1175 / 1176
4 Wandabweisräder Ø 150 mm mit Halterungen, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm

Polsteroptionen

Art.-Nr. 1770 / 1780
Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm, Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. 1772 / 1782
Polster mittelweich durch Kaltschaumaufgabe, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm, Polsterstärke 70 mm

Serie 6000E


5-teilige Säulenliege mit elektromotorischer Höhenverstellung

... für Untersuchung und Behandlung

Modell 6070-03E weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 6070-04E graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)


► Modell 6870-..E entspricht Modell 6070-..E

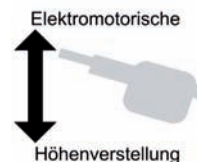

Alle Abb.:
Modell 6070-04XLE
mit Ausstattungsoption:
Fahrbar auf zentral
feststellbaren Doppelrollen,
Untergestell tiefergelegt
(1048), Fußschalter anstelle
von Handschalter;
Polsterfarbe 64-715 anthracite



Grundausrüstung:

- Liegefläche 5-teilig, höhenunabhängige Verstellung aller Liegeflächensegmente
- Liege feststehend mit Nivellierfüßen zum Höhenausgleich
- Elektromotorische Höhenverstellung durch mittig angeordnete Hubsäule
- Bedienung des Elektromotors durch einen Handschalter, optional Drei-Stufen-Fußschalter
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors (Art.-Nr. 1999, Pflichtausstattung)
- Dewert-Hygiene-Ausstattung 




Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 5-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -30° bis $+35^\circ$ verstellbar
- Kopfteillänge: 360 mm, mit Nasenschlitz und Abdeckung
- Rückenteil stufenlos durch 2 Gasdruckfedern von -15° bis $+70^\circ$ verstellbar, Rückenteillänge: 570 mm
- Kopf- und Rückenteil miteinander verbunden, durch Verstellung des Rückenteils wird das Kopfteil ebenfalls verstellt
- Sitzteil fest, Sitzteillänge: 460 mm
- Fußteil 2-teilig: Jedes Beinteil individuell stufenlos durch Gasdruckfeder von -50° bis $+50^\circ$ verstellbar, Beinteillänge: 650 mm, Beiteilbreite: 320 mm
- Gesamte Polsterauflage in ergonomischer Form, Verjüngung von Kopf- und Fußteil
- Polsterteilstärke: 60 mm



Technische Daten:

- Elektromotorisch höhenverstellbar von 560 mm bis 960 mm in 24 Sek. durch integrierten AC-Elektromotor mit 3.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: 700 mm
- Länge der Liegefläche: 2.040 mm
- Belastbarkeit: 220 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet 



Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandora Plus mit samtig-glatter Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 1048
Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 100 mm, Untergestell tiefergelegt, Grundhöhe +20 mm



Art.-Nr. 1047
Rad-Hebe-System mit ergonomischen Fußhebeln zur gesteuerten Absenkung der Liege, Untergestell tiefergelegt, Grundhöhe +20 mm

Weitere Motorbedienelemente



Art.-Nr. 1920E
1 Handschalter mit Magnet zur Befestigung an der Rückseite



Art.-Nr. 1910-3E
1 Drei-Stufen-Fußschalter: Bei stärkerem Druck auf die Abwärtstaste stoppt der Motor und verfährt um einige cm in die Gegenrichtung

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 1270K
Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil (nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm

Nasenschlitz



Art.-Nr. 1615-EF
Entfall Nasenschlitz

Polsteroptionen

Art.-Nr. 1770
Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, für Liegenbreite 700 mm, Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. 1772
Polster mittelweich durch Kaltschaumauflage, für Liegenbreite 700 mm, Polsterstärke 70 mm

Anbau-Elemente



Art.-Nr. 1410
1 Stück Normschiene



Art.-Nr. 1430
1 Befestigungskloben für Normschiene, Aufnahme passend für Rohr-Ø 18 mm

Armstützen



Art.-Nr. 1440
1 seitliche Armstütze, schwenk- und abnehmbar, zusätzlich dreh- und kippar, für Normschiene

Seitensicherung



Art.-Nr. 1005
1 Stück Seitensicherung für Normschiene mit Befestigungskloben, komplett aus Stahlrohr, Länge 800 mm

Fußteil-Optionen



Art.-Nr. G101
Fußteil 1-teilig

Serie 6000E


5-teilige Säulenliege mit elektromotorischer Höhenverstellung

... für Untersuchung und Behandlung

Modell 6075-03E weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 6075-04E graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

► Modell 6875-..E entspricht Modell 6075-..E

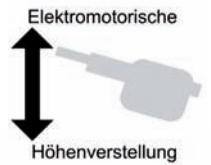

Große Abb.:
Modell 6075-04XLE
mit Ausstattungsoption:
Fahrbar auf zentral feststellbaren Doppelrollen, Untergestell tiefergelegt (1048), Fußschalter anstelle von Handschalter; Polsterfarbe 64-702 white



Grundausrüstung:

- Liegefläche 5-teilig, höhenunabhängige Verstellung aller Liegeflächensegmente
- Liege feststehend mit Nivellierfüßen zum Höhenausgleich
- Elektromotorische Höhenverstellung durch mittig angeordnete Hubsäule
- Bedienung des Elektromotors durch einen Handschalter, optional Drei-Stufen-Fußschalter
- Gesamte Liegefläche elektromotorisch neigbar bis 12° (Trendelenburg), Bedienung durch separaten Handschalter
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung der Elektromotoren (Art.-Nr. 1999, Pflichtausstattung)
- Dewert-Hygiene-Ausstattung



Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 5-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -30° bis +35° verstellbar
- Kopfteillänge: 360 mm, mit Nasenschlitz und Abdeckung
- Rückenteil stufenlos durch 2 Gasdruckfedern von -15° bis +70° verstellbar, Rückenteillänge: 570 mm
- Kopf- und Rückenteil miteinander verbunden, durch Verstellung des Rückenteils wird das Kopfteil ebenfalls verstellt
- Sitzteil fest, Sitzteillänge: 460 mm
- Fußteil 2-teilig: Jedes Beinteil individuell stufenlos durch Gasdruckfeder von -50° bis +50° verstellbar, Beinteillänge: 650 mm, Beiteilbreite: 320 mm
- Gesamte Polsterauflage in ergonomischer Form, Verjüngung von Kopf- und Fußteil
- Polsterteilstärke: 60 mm



Technische Daten:

- Elektromotorisch höhenverstellbar von 560 mm bis 960 mm in 24 Sek. durch integrierten AC-Elektromotor mit 3.000 N Druckkraft
- Elektromotorische Neigungsverstellung der gesamten Liegefläche bis 12° (Trendelenburg)
- Breite der Liegefläche: 700 mm | Länge der Liegefläche: 2.040 mm
- Belastbarkeit: 220 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet



Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandora Plus mit samtig-glatter Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 1048
Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 100 mm, Untergestell tiefergelegt, Grundhöhe +20 mm



Art.-Nr. 1047
Rad-Hebe-System mit ergonomischen Fußhebeln zur gesteuerten Absenkung der Liege, Untergestell tiefergelegt, Grundhöhe +20 mm

Weitere Motorbedienelemente



Art.-Nr. 1920E
1 Handschalter mit Magnet zur Befestigung an der Rückseite



Art.-Nr. 1910-3E
1 Drei-Stufen-Fußschalter: Bei stärkerem Druck auf die Abwärtstaste stoppt der Motor und verfährt um einige cm in die Gegenrichtung

Nasenschlitz



Art.-Nr. 1615-EF
Entfall Nasenschlitz

Polsteroptionen

Art.-Nr. 1770
Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, für Liegenbreite 700 mm, Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. 1772
Polster mittelweich durch Kaltschaumaufgabe, für Liegenbreite 700 mm, Polsterstärke 70 mm

Anbau-Elemente



Art.-Nr. 1410
1 Stück Normschiene



Art.-Nr. 1430
1 Befestigungskloben für Normschiene, Aufnahme passend für Rohr-Ø 18 mm

Armstützen



Art.-Nr. 1440
1 seitliche Armstütze, schwenk- und abnehmbar, zusätzlich dreh- und kippar, für Normschiene

Seitensicherung



Art.-Nr. 1005
1 Stück Seitensicherung für Normschiene mit Befestigungskloben, komplett aus Stahlrohr, Länge 800 mm

Fußteil-Optionen



Art.-Nr. G101
Fußteil 1-teilig

Serie 6000E


5-teilige Säulenliege mit elektromotorischer Höhenverstellung

... für Untersuchung und Behandlung

Modell 6080-03E weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 6080-04E graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

► Modell 6880-..E entspricht Modell 6080-..E

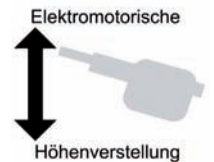

ohne
Abbildung



Grundausstattung:

- Liegefläche 5-teilig, höhenunabhängige Verstellung aller Liegeflächensegmente, Beinteile nahezu senkrecht abklappbar, dadurch sehr gute Sitzposition
- Liege feststehend mit Nivellierfüßen zum Höhenausgleich
- Elektromotorische Höhenverstellung durch mittig angeordnete Hubsäule
- Bedienung des Elektromotors durch einen Handschalter, optional Drei-Stufen-Fußschalter
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors (Art.-Nr. 1999, Pflichtausstattung)
- Dewert-Hygiene-Ausstattung



Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 5-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -30° bis +35° verstellbar
- Kopfteillänge: 360 mm, mit Nasenschlitz und Abdeckung
- Rückenteil stufenlos durch 2 Gasdruckfedern von -15° bis +70° verstellbar, Rückenteillänge: 570 mm
- Kopf- und Rückenteil miteinander verbunden, durch Verstellung des Rückenteils wird das Kopfteil ebenfalls verstellt
- Sitzteil fest, Sitzteillänge: 460 mm
- Fußteil 2-teilig: Jedes Beinteil individuell stufenlos durch Gasdruckfeder von -85° bis +20° verstellbar, Beinteillänge: 650 mm, Beiteilbreite: 320 mm
- Gesamte Polsterauflage in ergonomischer Form, Verjüngung von Kopf- und Fußteil
- Polsterteilstärke: 60 mm



Technische Daten:

- Elektromotorisch höhenverstellbar von 620 mm bis 1.020 mm in 24 Sek. durch integrierten AC-Elektromotor mit 3.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: 700 mm
- Länge der Liegefläche: 1.950 mm
- Belastbarkeit: 220 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet




kg



Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandora Plus mit samtig-glatter Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie

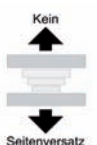

Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 1048
Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral
feststellbar, Ø 100 mm, Untergestell
tiefergelegt, Grundhöhe +20 mm

Weitere Motorbedienelemente



Art.-Nr. 1920E
1 Handschalter mit Magnet
zur Befestigung an der
Rückseite



Art.-Nr. 1910-3E
1 Drei-Stufen-Fußschalter: Bei stärkerem
Druck auf die Abwärtstaste stoppt der Motor
und verfährt um einige cm in die
Gegenrichtung

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 1270K
Papierrollenhalter, Befestigung unter
dem Kopfteil (nicht vorstehend),
für Liegenbreite 700 mm

Nasenschlitz



Art.-Nr. 1615-EF
Entfall Nasenschlitz

Polsteroptionen

Art.-Nr. 1770
Softpolster für hohen Liegekomfort
aus Kaltschaum, für Liegenbreite
700 mm, Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. 1772
Polster mittelweich durch Kaltschaum-
auflage, für Liegenbreite 700 mm,
Polsterstärke 70 mm

Anbau-Elemente



Art.-Nr. 1410
1 Stück Normschiene



Art.-Nr. 1430
1 Befestigungskloben für
Normschiene, Aufnahme passend für
Rohr-Ø 18 mm

Armstützen



Art.-Nr. 1440
1 seitliche Armstütze, schwenk- und
abnehmbar, zusätzlich dreh- und
kippar, für Normschiene

Seitensicherung



Art.-Nr. 1005
1 Stück Seitensicherung für Norm-
schiene mit Befestigungskloben,
komplett aus Stahlrohr, Länge 800 mm

Fußteil-Optionen



Art.-Nr. G101
Fußteil 1-teilig

Serie 6000E

5-teilige Säulenliege mit elektromotorischer Höhenverstellung

... für Untersuchung und Behandlung

Modell 6085-03E weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 6085-04E graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

► Modell 6885-..E entspricht Modell 6085-..E

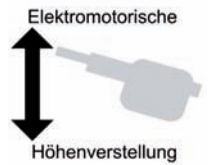



Abb. Modell 6085-04XLE, blau:
mit Ausstattungsoptionen: Fahrbar auf
zentral feststellbaren Doppelrollen,
Untergestell tiefergelegt
(1048), Fußschalter anstelle von
Handschalter;
Polsterfarbe 64-174 sky



Abb. Modell 6085-04XLE, grau: mit Ausstattungsoptionen:
Fahrbar auf zentral feststellbaren Doppelrollen,
Untergestell tiefergelegt (1048),
Fußteil 1-teilig (G101), Fußschalter anstelle von
Handschalter;
Polsterfarbe 64-712 slate grey



Grundausrüstung:

- Liegefläche 5-teilig, höhenunabhängige Verstellung aller Liegeflächensegmente
- Beinteile nahezu senkrecht abklappbar, dadurch sehr gute Sitzposition
- Liege feststehend mit Nivellierfüßen zum Höhenausgleich
- Elektromotorische Höhenverstellung durch mittig angeordnete Hubsäule
- Bedienung des Elektromotors durch einen Handschalter, optional Drei-Stufen-Fußschalter
- Gesamte Liegefläche elektromotorisch neigbar bis 12° (Trendelenburg), Bedienung durch separaten Handschalter
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung der Elektromotoren (Art.-Nr. 1999, Pflichtausstattung)
- Dewert-Hygiene-Ausstattung 




Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 5-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -30° bis +35° verstellbar
- Kopfteillänge: 360 mm, mit Nasenschlitz und Abdeckung
- Rückenteil stufenlos durch 2 Gasdruckfedern von -15° bis +70° verstellbar, Rückenteillänge: 570 mm
- Kopf- und Rückenteil miteinander verbunden, durch Verstellung des Rückenteils wird das Kopfteil ebenfalls verstellt
- Sitzteil fest, Sitzteillänge: 460 mm
- Fußteil 2-teilig: Jedes Beinteil individuell stufenlos durch Gasdruckfeder von -85° bis +20° verstellbar, Beinteillänge: 650 mm, Beiteilbreite: 320 mm
- Gesamte Polsterauflage in ergonomischer Form, Verjüngung von Kopf- und Fußteil
- Polsterteilstärke: 60 mm



Technische Daten:

- Elektromotorisch höhenverstellbar von 620 mm bis 1.020 mm in 24 Sek. durch integrierten AC-Elektromotor mit 3.000 N Druckkraft
- Elektromotorische Neigungsverstellung der gesamten Liegefläche bis 12° (Trendelenburg)
- Breite der Liegefläche: 700 mm | Länge der Liegefläche: 1.950 mm
- Belastbarkeit: 220 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet 



Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandora Plus mit samtig-glatter Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 1048
Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral
feststellbar, Ø 100 mm, Untergestell
tiefergelegt, Grundhöhe +20 mm

Weitere Motorbedienelemente



Art.-Nr. 1920E
1 Handschalter mit Magnet
zur Befestigung an der
Rückseite



Art.-Nr. 1910-3E
1 Drei-Stufen-Fußschalter: Bei stärkerem
Druck auf die Abwärtstaste stoppt der Motor
und verfährt um einige cm in die
Gegenrichtung

Nasenschlitz



Art.-Nr. 1615-EF
Entfall Nasenschlitz

Polsteroptionen

Art.-Nr. 1770
Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, für Liegenbreite 700 mm,
Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. 1772
Polster mittelweich durch Kaltschaumauflage, für Liegenbreite 700 mm,
Polsterstärke 70 mm

Anbau-Elemente



Art.-Nr. 1410
1 Stück Normschiene



Art.-Nr. 1430
1 Befestigungskloben für
Normschiene, Aufnahme passend für
Rohr-Ø 18 mm

Armstützen



Art.-Nr. 1440
1 seitliche Armstütze, schwenk- und
abnehmbar, zusätzlich dreh- und
kippar, für Normschiene

Seitensicherung



Art.-Nr. 1005
1 Stück Seitensicherung für Norm-
schiene mit Befestigungskloben,
komplett aus Stahlrohr, Länge 800 mm

Fußteil-Optionen



Art.-Nr. G101
Fußteil 1-teilig


Serie 6000E

2-teilige Säulenliege mit elektromotorischer Höhenverstellung

C-Bogen-geeignet

Modell 6100-03E weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 6100-04E graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

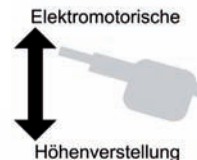

Modell 6100-04XLE
mit Ausstattungsoption:
Papierrollenhalter
(1270K/F);
Polsterfarbe 64-154 limone



Liege in oberer Position



Liege in unterer Position

Grundausrüstung:

- Liege fahrbar auf zentral feststellbaren Doppelrollen, Ø 100 mm
- Elektromotorische Höhenverstellung durch einseitig angeordnete Hubsäule
- Bedienung des Elektromotors durch 1 Drei-Stufen-Fußschalter und 1 Handschalter
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors (Art.-Nr. 1999, Pflichtausstattung)
- Dewert-Hygiene-Ausstattung

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -30 bis +40° verstellbar
- Kopfteillänge: 420 mm
- Fußteil fest | Fußteillänge: 1.580 mm
- Liegefläche mit röntgendurchlässiger Freifläche im Brust- und Beckenbereich (nicht Kopfteil), Länge 1.040 mm x Breite 690 mm
- Optional verschiedene Abmessungen, einteilige Liegefläche, auch mit HPL-Platte und abnehmbarer Polsterauflage möglich
- Polsterteilstärke: 60 mm



6100-04E mit Ausstattungsoption: Liegefläche 1-teilig (028), Papierrollenhalter (1280K/F)

Technische Daten:

- Elektromotorisch höhenverstellbar von 620 mm bis 1.020 mm in 24 Sek. durch AC-Elektromotor mit 3.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: 800 mm
- Länge der Liegefläche: 2.000 mm
- Belastbarkeit: 200 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet



Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandora Plus mit samtig-glatter Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie




Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Polsteroptionen



Art.-Nr. 029
Abnehmbare 1-teilige Polsterauflage auf durchleuchtungsfähiger HPL-Trägerplatte, Polsterauflage und Trägerplatte mit integriertem Nasenschlitz und Füllpolster, im direkten Bereich des Nasenschlitzes eingeschränkte Röntgenfähigkeit
Polsterabmessungen: 1.950 x 730 mm; Röntgenfreifläche: 1.340 x 650 mm

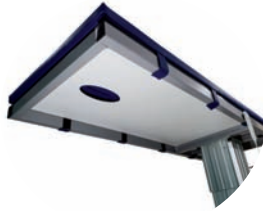

Art.-Nr. 028
Liegefläche 1-teilig, Breite: 730 mm
Röntgenfreifläche: 1.360 x 620 mm



Art.-Nr. 028-10
Liegefläche 1-teilig, Breite: 800 mm
Röntgenfreifläche: 1.360 x 690 mm

Weitere Motorbedienelemente



Art.-Nr. 1920E
1 Handschalter mit Magnet zur Befestigung an der Rückseite



Art.-Nr. 1910-3E
1 Drei-Stufen-Fußschalter: Bei stärkerem Druck auf die Abwärtstaste stoppt der Motor und verfährt um einige cm in die Gegenrichtung

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 1280K/F
Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil, für Liegenbreite 800 mm

Nasenschlitz



Art.-Nr. 1610
Nasenschlitz, eingepolstert in das Kopfteil
Art.-Nr. 1620
Füllpolster für Nasenschlitz

Anbau-Elemente



Art.-Nr. 1410
1 Stück Normschiene, 350 mm lang

Art.-Nr. 1420
1 Stück Normschiene, 1300 mm lang

Seitensicherung



Art.-Nr. 1080
1 Stück Seitensicherung seitlich versenkbar, verchromt, komplett aus Stahlrohr, Länge 1.060 mm



Art.-Nr. 1005
1 Stück Seitensicherung für Normschiene mit Befestigungskloben, komplett aus Stahlrohr, Länge 800 mm



Besonderheit: C-Bogen geeignet:

- Liegefläche: mit röntgendurchlässiger Freifläche im Brust- und Beckenbereich (nicht Kopfteil), Länge 1.000 mm x Breite 650 mm



Ansicht von unten



Änderungen der technischen Daten und Irrtümer vorbehalten.
Maße sind ca.-Angaben.
Druck- & Anzeigentechnisch kann es zu Farbabweichungen kommen.
Sämtliche Produkte sind nicht für den amerikanischen Markt zugelassen.

K.H. Dewert GmbH
Vollmestraße 7
33649 Bielefeld
Germany

Telefon + 49 (0) 5 21 / 4 00 27-0
Fax + 49 (0) 5 21 / 4 00 27-27

Internet: www.khdewert.de



E-Mail: info@khdewert.de

YouTube: K.H. Dewert



SÄULENLIEGEN FÜR UNTERSUCHUNG, BEHANDLUNG, THERAPIE

01.2026_01

LIEGEN FÜR PRAXIS UND KRANKENHAUS | SERIE 6000E

