



THERAPIELIEGEN

2025.1



Präzisions-
Stahlrohrmöbel

SERIE 2800XL UND 4800E



TRENDELENBURG-
POSITIONIERUNG




DACHSTELLUNG



BOBATH-LIEGEN



THERAPIELIEGEN

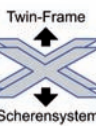

Elektromotorische Höhenverstellung
jetzt auch mit Drei-Stufen-Fußschalter





Therapieliegen

Inhalt

Gute Gründe für eine Therapieliege der Serien 2800XL und 4800E ... 3

Therapieliegen - Serie 2800XL

3-teilige Therapieliegen:

- Modell 2815XLE 8
- Modell 2815XL/H 10
- Modell 2820XLE 12
- Modell 2820XL/H 14



3-teilige Therapieliegen, alle Polstersegmente verstellbar:

- Modell 2830XLE 16
- Modell 2830XL/H 18
- Modell 2890XLE 20
- Modell 2890XL/H 22



4-teilige Therapieliegen, alle Polstersegmente verstellbar:

- Modell 2895XLE 24
- Modell 2895XL/H 26
- Modell 2860XLE 28
- Modell 2860XL/H 30



6-teilige Therapieliegen, alle Polstersegmente verstellbar:

- Modell 2880XLE 32
- Modell 2880XL/H 34



Therapieliegen - Serie 4800E

- Modell 4815E 36
- Modell 4840E 38

Gymnastikliegen zur Therapie nach Bobath und Vojta

- Bobath-Liege Serie 2800XL 40
- Bobath-Liege Serie 4800E 44

Weiteres Zubehör 46




Alle Therapieliegen der Serien 2800XL und 4800E mit Ausnahme der Gymnastik-Liegen verfügen serienmäßig über einen Nasenschlitz, eingepolstert in das Kopfteil, mit Füllpolster.

Therapieliegen

Gute Gründe für eine Therapieliege der Serien 2800XL und 4800E



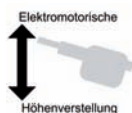

Elektromotorisch höhenverstellbare Modelle - Serie 2800XL und 4800E



- Höhenverstellung durch leistungsstarken AC-Elektromotor mit 10.000 N Druckkraft und hoher Verstellgeschwindigkeit
- Konstante Verstellgeschwindigkeit auch bei Volllast
- EPR-Sicherheitsnetz kabel mit Zugsicherung, 4 m Länge


Integriertes Sicherheitskonzept (nach neuester BfArM-Empfehlung)




- Automatisches Verriegeln des Elektromotors
- Aktiver Freilauf in Abwärtsrichtung 
- Optional: Drei-Stufen-Fußschalter 

Weitere Informationen erhalten Sie auf den nächsten Seiten.

- Hohe maximale Belastbarkeit
- Bei Serie 4800E zusätzlich: Großer Höhenverstellbereich

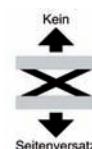




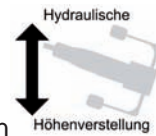

Hydraulisch höhenverstellbare Modelle - Serie 2800XL

- Höhenverstellung durch starke Hydraulikpumpe mit optimaler Übersetzung für hohe Gewichte
- Stabile Tritthebel beidseitig der Liegefläche
- Sicherheitsverstellrichtung: Pedal treten = Liege fährt nach oben, Pedal anheben = Liege fährt nach unten 
- Belastbarkeit: 250 kg

Dewert-Hygiene-Ausstattung

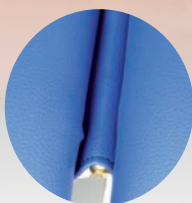Ermöglicht optimale Reinigung und Desinfizierbarkeit



- Scharnierabdeckung aus identischem Bezugsmaterial 
- Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen 
- Entlüftungsöffnungen an der Polsterunterseite, verschlossen mit Luftausgleichskappen mit Ventilfunktion 
- Einfache Hygiene durch offene Bauweise: Gute Erreichbarkeit aller Bauteile, keine im Alterungsprozess brechenden Kunststoffabdeckungen 
- Optional: Innovatives Polsterbezugsmaterial Skai® Toronto EN mit staynu 




Dewert-Liegen - mit Sicherheit!

Integriertes Sicherheitskonzept

entsprechend der aktuellen BfArM-Empfehlung

Sicherheit muss gerade bei elektromotorisch höhenverstellbaren Liegen an oberster Stelle stehen.

Entsprechend der aktuellen BfArM-Empfehlung sind unsere **elektromotorisch höhenverstellbaren Liegen** konstruktiv mit Sicherheitselementen ausgestattet, die dem Schutz gegen unautorisierte/unbeabsichtigte Bedienung bzw. dem Schutz des Bedieners während der Höhenverstellung dienen:

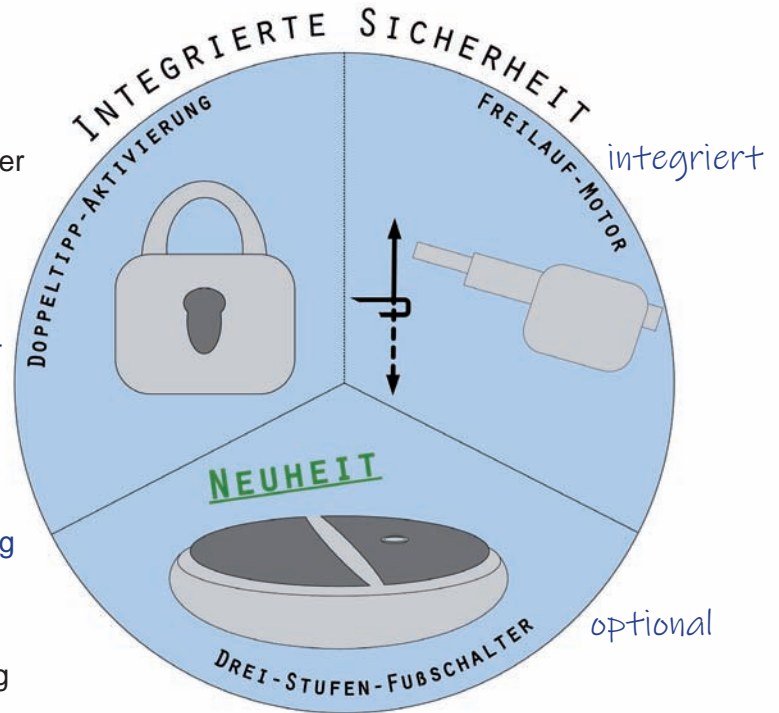


Doppeltipp-Aktivierung:



Schutz gegen unautorisierte/unbeabsichtigte Bedienung

- Automatisches Verriegeln des Elektromotors
- Nach 30 Sekunden Betätigung in eine Fahrtrichtung schaltet der Antrieb ab
- Freischaltung nur mit einer definierten Schaltfolge, dem **Doppeltipp**

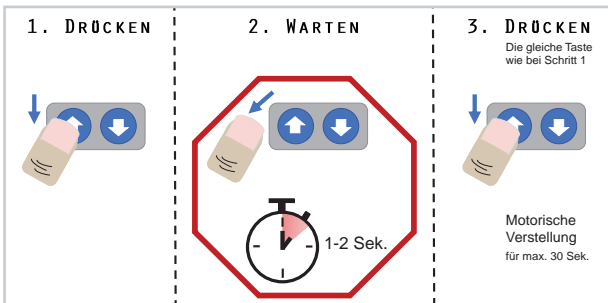

Ein Video zum richtigen Umgang mit der Doppeltipp-Aktivierung finden Sie auf unserem YouTube-Kanal

Motor mit Freilauf-Kupplung:

Schutz des Bedieners

- Aktiver Freilauf des Elektromotors in Abwärtsrichtung mit automatischem Auskuppeln bei Widerstand, Unterbrechung des Kraftflusses



OPTIONAL



Drei-Stufen-Fußschalter:

Schutz des Bedieners



- Bei starkem Druck auf die Abwärtstaste wird eine **dritte Stufe** aktiviert. Dadurch stoppt der Motor sofort und verfährt anschließend automatisch einige cm nach oben, um den Bediener im Falle einer Einklemmung zu befreien.



Dewert-Liegen - mit Sicherheit!

Grundausrüstung und weitere Optionen



NEUE GRUNDAUSSTATTUNG:
HANDSCHALTER
MIT VERSENKTEM BEDIENFELD

Grundausrüstung bei Modellen mit elektromotorischer Höhenverstellung:



- Bedienung des Elektromotors standardmäßig durch einen **Handschalter** mit versenktem Bedienfeld
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors (Pflichtausstattung)
- Freilaufmotor

Ausstattungsvarianten:



Drei-Stufen-Fußschalter:

Aktivierung dritter Stufe durch stärkeren Druck auf die Abwärtstaste, dadurch sofortiges Stoppen des Motors und Verfahren um einige cm in die Gegenrichtung



Längsseitige Fußbedienung mit Sicherheitsverstellung:

Stange drücken = Liege fährt nach oben
Stange anheben = Liege fährt nach unten



Umlaufende ergonomische Fußbedienung mit Sicherheitsverstellung:

Stange drücken = Liege fährt nach oben
Stange anheben = Liege fährt nach unten



Neueste Informationen zur aktuellen Sicherheitstechnik finden Sie auf unserer Internetseite im Bereich „Dewert-Liegen - mit Sicherheit!“

Therapieliegen

Gute Gründe für eine Therapieliege der Serien 2800XL und 4800E




Langlebig ✓



Robust ✓



Pflegeleicht ✓

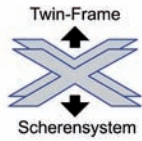


Twin-Scherensystem ✓



Hohe maximale Belastbarkeit ✓



Bewährte Dewert-Qualität

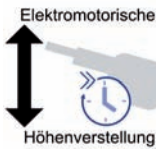

Hohe Verstellgeschwindigkeit ✓



Universeller Einsatz ✓


Technik:



- Liegengestell mit äußerst stabilem Twin-Frame-Scherensystem, dadurch hohe Kraftübertragung mit hoher Belastbarkeit möglich
- Verwendung dickwandiger Stahlrohre mit Wandstärken bis 3,5 mm
- Verwendung massiver Achsen mit Ø 20 mm



- Optimale Standsicherheit durch ausgewogenes Eigengewicht und weit auseinander stehende Füße
- Robuste und langlebige Gestellkonstruktion, seit vielen Jahren im anspruchsvollen Krankenhaus-Alltag bewährt

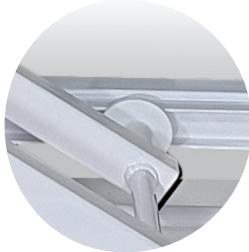

- Verschleißfestes Führungssystem am Unter- und Obergestell durch Einsatz von Wälzlagerrollen, spielfrei eingestellt zur Aufnahme der vertikalen und horizontalen Kräfte



Polsteraufbau:

- Polsterteilstärke: 60 mm
- Trägerplatte bestehend aus massivem 18 mm-Schichtholz → keine brechende Spanplatte bei Randbelastung
- 2-lagiger homogener Polyurethan-Schaumstoff mit RG 46 und RG 75, Ökotex-zertifiziert → kein aus Abfallschaum und chemischen Klebstoffen hergestellter Verbundschaum, der sich im schnellen Alterungsprozess aufreißt
- Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:
 - Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatte Oberfläche
 - Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Reinigungsset für Skai-Produkte (Art.-Nr. 050-1000)

- Inhalt:
- Zerstäuberflasche mit 200 ml Spezial-Skai-Reinigungsmittel
 - 1 Mikrofaser-Pflegtuch 40 x 40 cm



... mit 3-teiliger Liegefläche:

- Verstellbares Kopfteil, je nach Modell positiv und negativ verstellbar bzw. nur positiv mit zusätzlichem Stahlrohrrahmen für hohe Verwindungssteifigkeit
- Druckstabile Gasdruckfedern für **schwingfreies** Arbeiten am Kopf- und Fußbereich
- Freie, nicht störende Zugänglichkeit des Bediengriffs
- Kopfteil abklappbar (teilweise senkrecht), dadurch **variable Liegelänge**



... mit 3-, 4- oder 6-teiliger Liegefläche, alle Polsterteile verstellbar:

- Kopfteil positiv und negativ verstellbar
- Verstellung sämtlicher Polsterteile durch druckstabile Gasdruckfedern, je nach Modell teilweise Einstellung der gewünschten Position durch die Fixierung von zwei Führungsstangen
- Freie, nicht störende Zugänglichkeit der Bediengriffe
- Mittelteil zur **Dachstellung** verstellbar, **Trendelenburgpositionierung** möglich
- Modelle 2890 und 2895:
→ Multifunktionale und unabhängige Verstellung der Polstersegmente untereinander:
Dachstellung, Gesamtschräglage: Trendelenburg, Anti-Trendelenburg

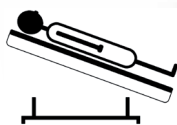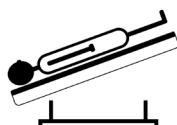

... mit 1-teiliger Liegefläche:

- Gymnastikliegen zur Therapie nach Bobath und Vojta
- Breite der Liegefläche wählbar zwischen 100 cm, 110 cm und 120 cm



Serie 2800XL

3-teilige Therapieliege mit elektromotorischer Höhenverstellung

Modell 2815-00XLE weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 2815-03XLE weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 2815-04XLE grau aluminium pulverbeschichtet (RAL 9007)



Alle Abb.:
Modell 2815-00XLE
mit Ausstattungsoptionen:
Fahrbar auf 4 Doppelrollen mit
Zentralfeststellsystem (046);
Polsterfarbe: 64-719 lime

Grundausrüstung:

- Liegefläche 3-teilig
- Fußteil bis 75° positiv zu Sitzposition verstellbar
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich
- Bedienung des Elektromotors durch einen Handschalter, optional Drei-Stufen-Fußschalter
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors (Art.-Nr. 1999, Pflichtausstattung)
- Freilaufmotor, Auskupplung bei Widerstand in Abwärtsrichtung, Unterbrechung des Kraftflusses
- Dewert-Hygiene-Ausstattung



Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 3-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -35 bis +45° verstellbar
- Kopfteillänge: 540 mm, mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
- Mittelteil fest
- Mittelteillänge: 530 mm
- Fußteil stufenlos durch Gasdruckfeder bis +75° verstellbar (Sitzposition)
- Fußteillänge: 880 mm
- Polsterteilstärke: 60 mm



Technische Daten:

- Elektromotorisch höhenverstellbar von 510 mm bis 950 mm in 22 Sek. durch AC-Elektromotor mit 10.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: 700 mm
- Gesamtlänge der Liegefläche: 1.950 mm
- Belastbarkeit: 250 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet



Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandora Plus mit samtig-glatter Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Kein
Seitenversatz

Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 040N
Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Comfort-Doppelrollen, Ø 100 mm, Grundhöhe - 15 mm



Art.-Nr. 046
Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 100 mm, Grundhöhe + 20 mm



Art.-Nr. B1185
Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 125 mm, Grundhöhe + 50 mm



Art.-Nr. 045N
Rad-Hebe-System mit ergonomischen Fußhebeln zur gesteuerten Absenkung der Liege




Weitere Motorbedienelemente



Art.-Nr. 090E
1 Handschalter mit Magnet zur Befestigung an der Rückseite



Art.-Nr. 091-3E
1 Drei-Stufen-Fußschalter: Bei stärkerem Druck auf die Abwärtstaste stoppt der Motor und verfährt um einige cm in die Gegenrichtung

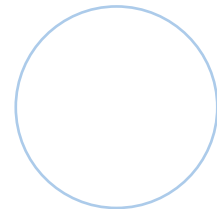

Art.-Nr. 092-3E
1 Fixierung für Fußschalter am Untergestell montiert



Art.-Nr. 094E
Längsseitige Fußbedienung mit Sicherheitsverstellung:
Stange drücken = Liege fährt nach oben
Stange anheben = Liege fährt nach unten



Art.-Nr. 095E
Umlaufende ergonomische Fußbedienung mit Sicherheitsverstellung:
Stange drücken = Liege fährt nach oben
Stange anheben = Liege fährt nach unten

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 010K
Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil (nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm, nicht bei Kopfteil 3-teilig (Art.-Nr. 056)



Art.-Nr. 010K/F
Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil (nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm

Nasenschlitz



Art.-Nr. 1615-EF
Entfall Nasenschlitz

Kopfteiloptionen



Art.-Nr. 056
Kopf 3-teilig mit Armstützen, stufenlos absenk- und abnehmbar, Verstellbereich -25° bis +45°, Art.-Nr. 010K nicht möglich, Abmessungen: Kopfteil: L 540 mm x B 370 mm; Armteil: L 500 mm x B 160 mm

Polsteroptionen

Art.-Nr. 007
Polsterbreite 800 mm

Art.-Nr. B1770
Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, für Liegenbreite 700 mm, Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. B1772
Polster mittelweich durch Kaltschaumauflage, für Liegenbreite 700 mm, Polsterstärke 70 mm

Anbau-Elemente



Art.-Nr. B1410
1 Stück Normschiene 350 mm lang



Art.-Nr. B1430
1 Befestigungskloben für Normschiene, Aufnahme passend für Rohr-Ø 18 mm

Armstützen



Art.-Nr. 088
1 seitliche Armstütze, schwenk- und abnehmbar, zusätzlich dreh- und kippbar, fest angebracht



Art.-Nr. B1440
1 seitliche Armstütze, schwenk- und abnehmbar, zusätzlich dreh- und kippbar, für Normschiene

Serie 2800XL

3-teilige Therapieliege mit hydraulischer Höhenverstellung

Modell 2815-00XL/H weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 2815-03XL/H weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 2815-04XL/H graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)



Alle Abb.:
Modell 2815-00XL/H
mit Ausstattungsoptionen:
Fahrbar auf 4 Doppelrollen mit
Zentralfeststellsystem (046),
Papierrollenhalter (010K);
Polsterfarbe: 64-711 ashgrey



Grundausrüstung:

- Liegefläche 3-teilig
- Fußteil bis 75° positiv zu Sitzposition verstellbar
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich
- Tritthebel zur hydraulischen Höhenverstellung beidseitig der Liegefläche
- Dewert-Hygiene-Ausstattung



Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 3-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -35 bis +45° verstellbar
- Kopfteillänge: 540 mm, mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
- Mittelteil fest
- Mittelteillänge: 530 mm
- Fußteil stufenlos durch Gasdruckfeder bis +75° verstellbar (Sitzposition)
- Fußteillänge: 880 mm
- Polsterteilstärke: 60 mm



Technische Daten:


- Manuell höhenverstellbar von 530 mm bis 950 mm durch Hydraulikpumpe mit 10.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: 700 mm
- Gesamtlänge der Liegefläche: 1.950 mm
- Belastbarkeit: 250 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet



Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandora Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie

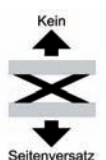

Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 040N
Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Comfort-Doppelrollen, Ø 100 mm, Grundhöhe - 15 mm



Art.-Nr. 046
Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 100 mm, Grundhöhe + 20 mm



Art.-Nr. B1185
Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 125 mm, Grundhöhe + 50 mm



Art.-Nr. 045N
Rad-Hebe-System mit ergonomischen Fußhebeln zur gesteuerten Absenkung der Liege



Papierrollenhalter



Art.-Nr. 010K
Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil (nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm, nicht bei Kopfteil 3-teilig (Art.-Nr. 056)



Art.-Nr. 010K/F
Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil (nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm

Polsteroptionen

Art.-Nr. 007
Polsterbreite 800 mm

Art.-Nr. B1770
Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, für Liegenbreite 700 mm, Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. B1772
Polster mittelweich durch Kaltschaumauflage, für Liegenbreite 700 mm, Polsterstärke 70 mm

Kopfteiloptionen



Art.-Nr. 056
Kopf 3-teilig mit Armstützen, stufenlos absenk- und abnehmbar, Verstellbereich -25° bis +45°, Art.-Nr. 010K nicht möglich, Abmessungen:
Kopfteil: L 540 mm x B 370 mm
Armteil: L 500 mm x B 160 mm

Nasenschlitz



Art.-Nr. 1615-EF
Entfall Nasenschlitz

Anbau-Elemente



Art.-Nr. B1410
1 Stück Normschiene 350 mm lang



Art.-Nr. B1430
1 Befestigungskloben für Normschiene, Aufnahme passend für Rohr-Ø 18 mm

Armstützen



Art.-Nr. 088
1 seitliche Armstütze, schwenk- und abnehmbar, zusätzlich dreh- und kippbar, fest angebracht



Art.-Nr. B1440
1 seitliche Armstütze, schwenk- und abnehmbar, zusätzlich dreh- und kippbar, für Normschiene


Serie 2800XL

3-teilige Therapieliege mit elektromotorischer Höhenverstellung

Modell 2820-00XLE weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 2820-03XLE weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 2820-04XLE graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

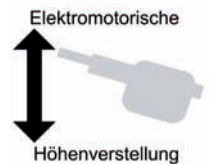

Alle Abb.:
Modell 2820-04XLE
mit Ausstattungsoptionen:
Fahrbar auf 4 Doppelrollen mit
Zentralfeststellsystem (046), Norm-
schiene (B1410), mit Fußschalter
anstelle von Handschalter;
Polsterfarbe: 64-716 black



Grundausstattung:

- Liegefläche 3-teilig
- Kopfteil senkrecht abklappbar
- Fußteil bis 80° positiv zu Sitzposition verstellbar
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich
- Bedienung des Elektromotors durch einen Handschalter, optional Drei-Stufen-Fußschalter
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors (Art.-Nr. 1999, Pflichtausstattung)
- Freilaufmotor, Auskupplung bei Widerstand in Abwärtsrichtung, Unterbrechung des Kraftflusses
- Dewert-Hygiene-Ausstattung



Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 3-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -90 bis +30° verstellbar (senkrecht abklappbar)
- Kopfteillänge: 450 mm, mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
- Mittelteil fest
- Mittelteillänge: 530 mm
- Fußteil stufenlos durch Gasdruckfeder bis +80° verstellbar (Sitzposition)
- Fußteillänge: 1.020 mm
- Polsterteilstärke: 60 mm



Technische Daten:

- Elektromotorisch höhenverstellbar von 510 mm bis 950 mm in 22 Sek. durch AC-Elektromotor mit 10.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: 700 mm
- Gesamtlänge der Liegefläche: 2.000 mm
- Belastbarkeit: 250 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet



Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandora Plus mit samtig-glatter Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 040N
Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Comfort-Doppelrollen, Ø 100 mm, Grundhöhe - 15 mm



Art.-Nr. 046
Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 100 mm, Grundhöhe + 20 mm



Art.-Nr. B1185
Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 125 mm, Grundhöhe + 50 mm



Art.-Nr. 045N
Rad-Hebe-System mit ergonomischen Fußhebeln zur gesteuerten Absenkung der Liege




Weitere Motorbedienelemente



Art.-Nr. 090E
1 Handschalter mit Magnet zur Befestigung an der Rückseite



Art.-Nr. 091-3E
1 Drei-Stufen-Fußschalter: Bei stärkerem Druck auf die Abwärtstaste stoppt der Motor und verfährt um einige cm in die Gegenrichtung

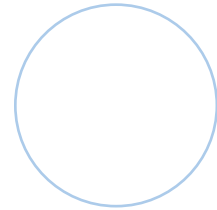

Art.-Nr. 092-3E
1 Fixierung für Fußschalter am Untergestell montiert



Art.-Nr. 094E
Längsseitige Fußbedienung mit Sicherheitsverstellung:
Stange drücken = Liege fährt nach oben
Stange anheben = Liege fährt nach unten

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 010K
Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil (nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm



Art.-Nr. 010K/F
Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil (nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm

Polsteroptionen

Art.-Nr. 007
Polsterbreite 800 mm

Art.-Nr. B1770
Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, für Liegenbreite 700 mm, Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. B1772
Polster mittelweich durch Kaltschaumauflage, für Liegenbreite 700 mm, Polsterstärke 70 mm

Anbau-Elemente



Art.-Nr. B1410
1 Stück Normschiene 350 mm lang



Art.-Nr. B1430
1 Befestigungskloben für Normschiene, Aufnahme passend für Rohr-Ø 18 mm

Armstützen



Art.-Nr. B1440
1 seitliche Armstütze, schwenk- und abnehmbar, zusätzlich dreh- und kippbar, für Normschiene

Nasenschlitz



Art.-Nr. 1615-EF
Entfall Nasenschlitz

Serie 2800XL

3-teilige Therapieliege mit hydraulischer Höhenverstellung

Modell 2820-00XL/H weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 2820-03XL/H weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 2820-04XL/H graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)



Modell 2820-04XL/H
mit Ausstattungsoptionen:
Fahrbar auf 4 Doppelrollen
mit Zentralfeststellsystem
(046), Papierrollenhalter
(010K/F);
Polsterfarbe: 64-713 corn

Grundausrüstung:

- Liegefläche 3-teilig
- Kopfteil senkrecht abklappbar
- Fußteil bis 80° positiv zu Sitzposition verstellbar
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich
- Tritthebel zur hydraulischen Höhenverstellung beidseitig der Liegefläche
- Dewert-Hygiene-Ausstattung

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 3-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -90 bis +30° verstellbar (senkrecht abklappbar)
- Kopfteillänge: 450 mm, mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
- Mittelteil fest
- Mittelteillänge: 530 mm
- Fußteil stufenlos durch Gasdruckfeder bis +80° verstellbar (Sitzposition)
- Fußteillänge: 1020 mm
- Polsterteilstärke: 60 mm



Technische Daten:


- Manuell höhenverstellbar von 530 mm bis 950 mm durch Hydraulikpumpe mit 10.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: 700 mm
- Gesamtlänge der Liegefläche: 2.000 mm
- Belastbarkeit: 250 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet



Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatter Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie

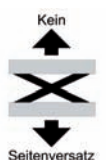

Kein
Seitenversatz

Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 040N
Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Comfort-Doppelrollen, Ø 100 mm, Grundhöhe - 15 mm



Art.-Nr. 046
Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 100 mm, Grundhöhe + 20 mm



Art.-Nr. B1185
Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 125 mm, Grundhöhe + 50 mm



Art.-Nr. 045N
Rad-Hebe-System mit ergonomischen Fußhebeln zur gesteuerten Absenkung der Liege



Papierrollenhalter



Art.-Nr. 010K
Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil (nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm



Art.-Nr. 010K/F
Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil (nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm

Polsteroptionen

Art.-Nr. 007
Polsterbreite 800 mm

Art.-Nr. B1770
Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, für Liegenbreite 700 mm, Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. B1772
Polster mittelweich durch Kaltschaumauflage, für Liegenbreite 700 mm, Polsterstärke 70 mm

Anbau-Elemente



Art.-Nr. B1410
1 Stück Normschiene 350 mm lang



Art.-Nr. B1430
1 Befestigungskloben für Normschiene, Aufnahme passend für Rohr-Ø 18 mm

Armstützen



Art.-Nr. B1440
1 seitliche Armstütze, schwenk- und abnehmbar, zusätzlich dreh- und kippbar, für Normschiene

Nasenschlitz



Art.-Nr. 1615-EF
Entfall Nasenschlitz

Serie 2800XL

3-teilige Therapieliege mit elektromotorischer Höhenverstellung

Modell 2830-00XLE weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 2830-03XLE weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 2830-04XLE grau aluminium pulverbeschichtet (RAL 9007)



Alle Abb.: Modell 2830-00XLE
mit Ausstattungsoptionen:
Rad-Hebe-System (045N),
umlaufende Fußbedienung
(095E), 3-teiliges Kopfteil (056);
Polsterfarbe: 64-716 black



Grundausrüstung:


- Liegefläche 3-teilig
- Mittelteil zur Dachstellung verstellbar, Trendelenburgpositionierung möglich
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich
- Bedienung des Elektromotors durch einen Handschalter, optional Drei-Stufen-Fußschalter
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors (Art.-Nr. 1999, Pflichtausstattung)
- Freilaufmotor, Auskupplung bei Widerstand in Abwärtsrichtung, Unterbrechung des Kraftflusses
- Dewert-Hygiene-Ausstattung



Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 3-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -40 bis $+45^\circ$ verstellbar
- Kopfteillänge: 540 mm, mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
- Mittelteil zur Dachstellung verstellbar, unterstützt durch 2 Gasdruckfedern, spielfreie Einstellung der gewünschten Position durch die Fixierung von 2 Führungsstangen
- Mittelteillänge: 470 mm
- Fußteil stufenlos bis $+70^\circ$ verstellbar durch selbstfixierendes und spielfreies Stangensystem
- Fußteillänge: 940 mm
- Polsterteilstärke: 60 mm

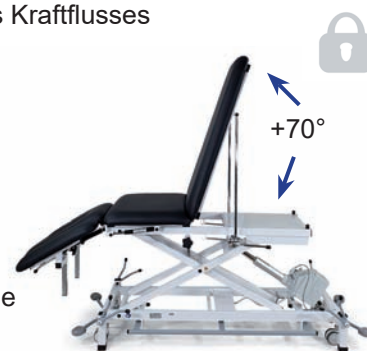

Technische Daten:

- Elektromotorisch höhenverstellbar von 510 mm bis 950 mm in 22 Sek. durch AC-Elektromotor mit 10.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: 700 mm
- Gesamtlänge der Liegefläche: 1.950 mm
- Belastbarkeit: 250 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet



Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandora Plus mit samtig-glatter Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 040N
Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Comfort-Doppelrollen, Ø 100 mm, Grundhöhe - 15 mm



Art.-Nr. 046
Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 100 mm, Grundhöhe + 20 mm



Art.-Nr. 045N
Rad-Hebe-System mit ergonomischen Fußhebeln zur gesteuerten Absenkung der Liege




Weitere Motorbedienelemente



Art.-Nr. 090E
1 Handschalter mit Magnet zur Befestigung an der Rückseite



Art.-Nr. 091-3E
1 Drei-Stufen-Fußschalter: Bei stärkerem Druck auf die Abwärtstaste stoppt der Motor und verfährt um einige cm in die Gegenrichtung

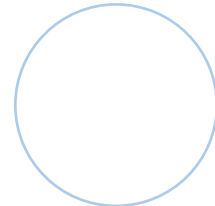


Art.-Nr. 092-3E
1 Fixierung für Fußschalter am Untergestell montiert



Art.-Nr. 094E
Längsseitige Fußbedienung mit Sicherheitsverstellung:
Stange drücken = Liege fährt nach oben
Stange anheben = Liege fährt nach unten



Art.-Nr. 095E
Umlaufende ergonomische Fußbedienung mit Sicherheitsverstellung:
Stange drücken = Liege fährt nach oben
Stange anheben = Liege fährt nach unten

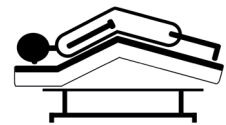

Art.-Nr. 065E
Dachstellung elektromotorisch

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 010K
Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil (nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm; nicht bei Kopfteil 3-teilig (Art.-Nr. 056)



Art.-Nr. 010K/F
Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil (nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm



Art.-Nr. 056
Kopf 3-teilig mit Armstützen, stufenlos absenk- und abnehmbar, Verstellbereich -25° bis +45°, Art.-Nr. 010K nicht möglich
Abmessungen:
Kopfteil: L 540 mm x B 370 mm
Armteil: L 500 mm x B 160 mm

Nasenschlitz



Art.-Nr. 1615-EF
Entfall Nasenschlitz

Armstützen

ohne
Abbildung

Art.-Nr. 088
1 seitliche Armstütze, schwenk- und abnehmbar, zusätzlich dreh- und kippbar, fest angebracht

Polsteroptionen

Art.-Nr. 007
Polsterbreite 800 mm

Art.-Nr. B1772
Polster mittelweich durch Kaltschaumauflage, für Liegenbreite 700 mm, Polsterstärke 70 mm


Serie 2800XL

3-teilige Therapieliege mit hydraulischer Höhenverstellung

Modell 2830-00XL/H weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 2830-03XL/H weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 2830-04XL/H graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

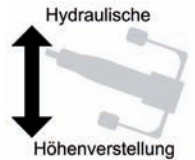

Alle Abb.:
Modell 2830-00XL/H
mit Ausstattungsoptionen:
Rad-Hebe-System (045N),
Papierrollenhalter (010K);
Polsterfarbe: 64-716 black



Grundausrüstung:

- Liegefläche 3-teilig
- Mittelteil zur Dachstellung verstellbar, Trendelenburgpositionierung möglich
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich
- Tritthebel zur hydraulischen Höhenverstellung beidseitig der Liegefläche
- Dewert-Hygiene-Ausstattung



Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 3-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -40 bis $+45^\circ$ verstellbar
- Kopfteillänge: 540 mm, mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
- Mittelteil zur Dachstellung verstellbar, unterstützt durch 2 Gasdruckfedern, spielfreie Einstellung der gewünschten Position durch die Fixierung von 2 Führungsstangen
- Mittelteillänge: 470 mm
- Fußteil stufenlos bis $+70^\circ$ verstellbar durch selbstfixierendes und spielfreies Stangensystem
- Fußteillänge: 940 mm
- Polsterteilstärke: 60 mm



Technische Daten:


- Manuell höhenverstellbar von 530 mm bis 950 mm durch Hydraulikpumpe mit 10.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: 700 mm
- Gesamtlänge der Liegefläche: 1.950 mm
- Belastbarkeit: 250 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet



Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie

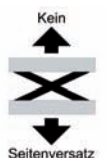

Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 040N
Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren
Comfort-Doppelrollen, Ø 100 mm,
Grundhöhe - 15 mm



Art.-Nr. 046
Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral
feststellbar, Ø 100 mm,
Grundhöhe + 20 mm



Art.-Nr. 045N
Rad-Hebe-System mit
ergonomischen Fußhebeln zur
gesteuerten Absenkung der Liege



Papierrollenhalter



Art.-Nr. 010K
Papierrollenhalter, Befestigung unter
dem Kopfteil (nicht vorstehend),
für Liegenbreite 700 mm, nicht bei
Kopfteil 3-teilig (Art.-Nr. 056)



Art.-Nr. 010K/F
Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil
(nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm



Art.-Nr. 056
Kopf 3-teilig mit Armstützen,
stufenlos absenk- und abnehmbar,
Verstellbereich -25° bis +45°,
Art.-Nr. 010K nicht möglich,
Abmessungen:
Kopfteil: L 540 mm x B 370 mm
Armteil: L 500 mm x B 160 mm

Nasenschlitz



Art.-Nr. 1615-EF
Entfall Nasenschlitz

Armstützen



Art.-Nr. 088
1 seitliche Armstütze, schwenk- und
abnehmbar, zusätzlich dreh- und kippbar,
fest angebracht

Polsteroptionen

Art.-Nr. 007
Polsterbreite 800 mm

Art.-Nr. B1772
Polster mittelweich durch Kaltschaum-
auflage, für Liegenbreite 700 mm,
Polsterstärke 70 mm

Serie 2800XL

3-teilige Therapieliege mit elektromotorischer Höhenverstellung

Modell 2890-00XLE weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 2890-03XLE weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 2890-04XLE graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)



Alle Abb.:
Modell 2890-00XL/H
mit Ausstattungsoption:
Fahrbar auf einzeln
feststellbaren Doppelrollen
(077N), Papierrollenhalter
(010F/K), mit Fußschalter
anstelle von Handschalter;
Polsterfarbe: 64-713 corn



Grundausrüstung:

- Liegefläche 3-teilig
- Multifunktionale und unabhängige Verstellung der Polstersegmente untereinander
- Mögliche Verstellpositionen u.a.: Gesamtschräglage, Dachstellung, Trendelenburg, Anti-Trendelenburg
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich
- Bedienung des Elektromotors durch einen Handschalter, optional Drei-Stufen-Fußschalter
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors (Art.-Nr. 1999, Pflichtausstattung)
- Freilaufmotor, Auskupplung bei Widerstand in Abwärtsrichtung, Unterbrechung des Kraftflusses
- Dewert-Hygiene-Ausstattung



Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 3-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -35° bis $+40^{\circ}$ verstellbar
- Kopfteillänge: 420 mm, mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
- Mittelteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -15° bis $+45^{\circ}$ verstellbar
- Mittelteillänge: 550 mm
- Fußteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -15° bis $+50^{\circ}$ verstellbar
- Fußteillänge: 980 mm
- Polsterteilstärke: 60 mm



Technische Daten:

- Elektromotorisch höhenverstellbar von 570 mm bis 1.010 mm in 22 Sek. durch AC-Elektromotor mit 10.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: 700 mm
- Gesamtlänge der Liegefläche: 1.950 mm
- Belastbarkeit: 200 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet



Design:


Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten

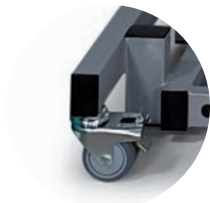

Art.-Nr. 077N
Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Doppelrollen, Ø 75 mm



Art.-Nr. 049
Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 100 mm



Art.-Nr. 044N
Rad-Hebe-System mit ergonomischen Fußhebeln zur gesteuerten Absenkung der Liege




Weitere Motorbedienelemente



Art.-Nr. 090E
1 Handschalter mit Magnet zur Befestigung an der Rückseite



Art.-Nr. 091-3E
1 Drei-Stufen-Fußschalter: Bei stärkerem Druck auf die Abwärtstaste stoppt der Motor und verfährt um einige cm in die Gegenrichtung

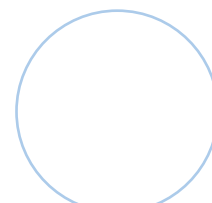

Art.-Nr. 092-3E
1 Fixierung für Fußschalter am Untergestell montiert

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 010F/K
Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil (nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm



Art.-Nr. 010F
Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil, (70 mm vorstehend), für Liegenbreite 700 mm

Anbau-Elemente



Art.-Nr. B1410
1 Stück Normschiene 350 mm lang



Art.-Nr. B1430
1 Befestigungskloben für Normschiene, Aufnahme passend für Rohr-Ø 18 mm

Armstützen



Art.-Nr. B1440
1 seitliche Armstütze, schwenk- und abnehmbar, zusätzlich dreh- und kippbar, für Normschiene

Seitensicherung



Art.-Nr. 1005
1 Stück Seitensicherung für Normschiene mit Befestigungskloben, komplett aus Stahlrohr, Länge 800 mm

Nasenschlitz



Art.-Nr. 1615-EF
Entfall Nasenschlitz

Polsteroptionen

Art.-Nr. B1770
Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, für Liegenbreite 700 mm, Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. B1772
Polster mittelweich durch Kaltschaum-auflage, für Liegenbreite 700 mm, Polsterstärke 70 mm

Serie 2800XL

3-teilige Therapieliege mit hydraulischer Höhenverstellung

Modell 2890-00XL/H weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 2890-03XL/H weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 2890-04XL/H graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)



Alle Abb.:
Modell 2890-00XL/H
mit Ausstattungsoptionen:
Fahrbar auf 4 Doppelrollen
mit Zentralfeststellsystem
(046), Papierrollenhalter
(010F/K);
Polsterfarbe: 64-704 birch



Grundausrüstung:

- Liegefläche 3-teilig
- Multifunktionale und unabhängige Verstellung der Polstersegmente untereinander
- Mögliche Verstellpositionen u.a.: Gesamtschräglage, Dachstellung, Trendelenburg, Anti-Trendelenburg
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich
- Tritthebel zur hydraulischen Höhenverstellung beidseitig der Liegefläche
- Dewert-Hygiene-Ausstattung

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 3-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -35° bis $+40^{\circ}$ verstellbar
- Kopfteillänge: 420 mm, mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
- Mittelteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -15° bis $+45^{\circ}$ verstellbar
- Mittelteillänge: 550 mm
- Fußteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -15° bis $+50^{\circ}$ verstellbar
- Fußteillänge: 980 mm
- Polsterteilstärke: 60 mm



Technische Daten:


- Manuell höhenverstellbar von 600 mm bis 1.020 mm durch Hydraulikpumpe mit 10.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: 700 mm
- Gesamtlänge der Liegefläche: 1.950 mm
- Belastbarkeit: 200 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet



Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandora Plus mit samtig-glatter Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie

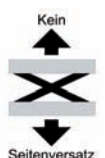

Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 077N
Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Doppelrollen, Ø 75 mm



Art.-Nr. 049
Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 100 mm



Art.-Nr. 044N
Rad-Hebe-System mit ergonomischen Fußhebeln zur gesteuerten Absenkung der Liege



Papierrollenhalter



Art.-Nr. 010F/K
Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil (nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm



Art.-Nr. 010F
Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil, (70 mm vorstehend), für Liegenbreite 700 mm



Art.-Nr. 1615-EF
Entfall Nasenschlitz

Anbau-Elemente



Art.-Nr. B1410
1 Stück Normschiene 350 mm lang



Art.-Nr. B1430
1 Befestigungskloben für Normschiene, Aufnahme passend für Rohr-Ø 18 mm

Armstützen



Art.-Nr. B1440
1 seitliche Armstütze, schwenk- und abnehmbar, zusätzlich dreh- und kippar, für Normschiene

Seitensicherung



Art.-Nr. 1005
1 Stück Seitensicherung für Normschiene mit Befestigungskloben, komplett aus Stahlrohr, Länge 800 mm

Polsteroptionen

Art.-Nr. B1770
Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, für Liegenbreite 700 mm, Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. B1772
Polster mittelweich durch Kaltschaumauflage, für Liegenbreite 700 mm, Polsterstärke 70 mm


Serie 2800XL

4-teilige Therapieliege mit elektromotorischer Höhenverstellung

Modell 2895-00XLE weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)


Modell 2895-03XLE weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 2895-04XLE grau aluminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

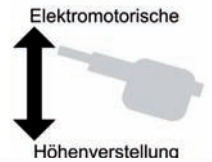

Modell 2895-00XLE
mit Ausstattungsoptionen:
Fahrbar auf 4 Doppelrollen mit
Zentralfeststellsystem (046),
Papierrollenhalter (010F/K),
mit Fußschalter anstelle von
Handschalter;
Polsterfarbe: 64-153 platin

Grundausrüstung:

- Liegefläche 4-teilig
- Multifunktionale und unabhängige Verstellung der Polstersegmente untereinander
- Mögliche Verstellpositionen u.a.: Gesamtschräglage, Dachstellung, Trendelenburg, Anti-Trendelenburg
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich
- Bedienung des Elektromotors durch einen Handschalter, optional Drei-Stufen-Fußschalter
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors (Art.-Nr. 1999, Pflichtausstattung)
- Freilaufmotor, Auskupplung bei Widerstand in Abwärtsrichtung, Unterbrechung des Kraftflusses
- Dewert-Hygiene-Ausstattung 


Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 4-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -35° bis $+40^{\circ}$ verstellbar
- Kopfteillänge: 420 mm, mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
- Mittelteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -15° bis $+45^{\circ}$ verstellbar
- Mittelteillänge: 550 mm
- Fußteil 2-teilig, quer geteilt
Oberes Fußteil-Segment stufenlos durch Gasdruckfeder von -15° bis $+50^{\circ}$ verstellbar
Unteres Fußteil-Segment stufenlos durch Gasdruckfeder von -30° bis $+35^{\circ}$ verstellbar
- Fußteillänge: oberes Fußteil: 550 mm | unteres Fußteil: 420 mm
- Polsterteilstärke: 60 mm



Technische Daten:


- Elektromotorisch höhenverstellbar von 570 mm bis 1.010 mm in 22 Sek. durch AC-Elektromotor mit 10.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: 700 mm
- Gesamtlänge der Liegefläche: 1.950 mm
- Belastbarkeit: 200 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet 



Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatter Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie

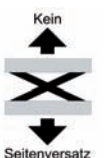

Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten




Art.-Nr. 077N
Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren
Doppelrollen, Ø 75 mm



Art.-Nr. 049
Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral
feststellbar, Ø 100 mm



Art.-Nr. 044N
Rad-Hebe-System mit
ergonomischen Fußhebeln zur
gesteuerten Absenkung der Liege

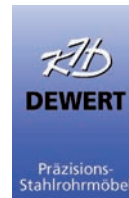


Weitere Motorbedienelemente



Art.-Nr. 090E
1 Handschalter mit Magnet zur
Befestigung an der Rückseite



Art.-Nr. 091-3E
1 Drei-Stufen-Fußschalter: Bei stärkerem
Druck auf die Abwärtstaste stoppt der Motor
und verfährt um einige cm in die Gegenrichtung

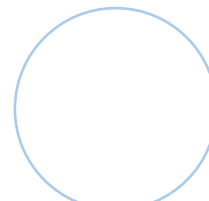

Art.-Nr. 092-3E
1 Fixierung für Fußschalter am
Untergestell montiert

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 010F/K
Papierrollenhalter, Befestigung unter
dem Kopfteil (nicht vorstehend),
für Liegenbreite 700 mm

Nasenschlitz



Art.-Nr. 1615-EF
Entfall Nasenschlitz

Polsteroptionen

Art.-Nr. B1770
Softpolster für hohen Liegekomfort aus
Kaltschaum, für Liegenbreite 700 mm,
Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. B1772
Polster mittelweich durch
Kaltschaumauflage, für Liegenbreite
700 mm, Polsterstärke 70 mm


Serie 2800XL

4-teilige Therapieliege mit hydraulischer Höhenverstellung

Modell 2895-00XL/H weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 2895-03XL/H weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 2895-04XL/H graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

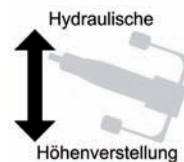

Untergestell bei hydraulischer Höhenverstellung, mit Ausstattungsoptionen:
Fahrbar auf 4 Doppelrollen mit Zentralfeststellsystem (046), Papierrollenhalter (010K/F)



ohne
Abbildung

Modell 2895-00XLE (elektromotorische Höhenverstellung) mit Ausstattungsoptionen:
Fahrbar auf 4 Doppelrollen mit Zentralfeststellsystem (046), Papierrollenhalter (010F/K), mit Fußschalter anstelle von Handschalter; Polsterfarbe: 64-153 platin

Grundausrüstung:

- Liegefläche 4-teilig
- Multifunktionale und unabhängige Verstellung der Polstersegmente untereinander
- Mögliche Verstellpositionen u.a.: Gesamtschräglage, Dachstellung, Trendelenburg, Anti-Trendelenburg
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich
- Tritthebel zur hydraulischen Höhenverstellung beidseitig der Liegefläche
- Dewert-Hygiene-Ausstattung

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 4-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -35 bis +40° verstellbar
- Kopfteillänge: 420 mm, mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
- Mittelteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -15° bis +45° verstellbar
- Mittelteillänge: 550 mm
- Fußteil 2-teilig, quer geteilt
Oberes Fußteil-Segment stufenlos durch Gasdruckfeder von -15° bis +50° verstellbar
Unteres Fußteil-Segment stufenlos durch Gasdruckfeder von -30° bis +35° verstellbar
- Fußteillänge: oberes Fußteil: 550 mm | unteres Fußteil: 420 mm
- Polsterteilstärke: 60 mm

Technische Daten:

- Manuell höhenverstellbar von 600 mm bis 1.020 mm durch Hydraulikpumpe mit 10.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: 700 mm
- Gesamtlänge der Liegefläche: 1.950 mm
- Belastbarkeit: 200 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet



Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatter Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 077N
Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren
Doppelrollen, Ø 75 mm



Art.-Nr. 049
Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral
feststellbar, Ø 100 mm



Art.-Nr. 044N
Rad-Hebe-System mit
ergonomischen Fußhebeln zur
gesteuerten Absenkung der Liege



Papierrollenhalter



Art.-Nr. 010F/K
Papierrollenhalter, Befestigung unter
dem Kopfteil (nicht vorstehend),
für Liegenbreite 700 mm

Nasenschlitz



Art.-Nr. 1615-EF
Entfall Nasenschlitz

Polsteroptionen

Art.-Nr. B1770
Softpolster für hohen Liegekomfort aus
Kaltschaum, für Liegenbreite 700 mm,
Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. B1772
Polster mittelweich durch
Kaltschaumauflage, für Liegenbreite
700 mm, Polsterstärke 70 mm

Serie 2800XL

4-teilige Therapieliege mit elektromotorischer Höhenverstellung

Modell 2860-00XLE weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 2860-03XLE weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 2860-04XLE graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)



Alle Abb.:
Modell 2860-00XLE mit Fußschalter anstelle von Handschalter;
Polsterfarbe: 64-703 pearl



Grundausrüstung:

- Liegefläche 4-teilig
- Mittelteil zur Dachstellung verstellbar, Trendelenburgpositionierung möglich
- Fußteil 2-teilig, längs geteilt
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich
- Bedienung des Elektromotors durch einen Handschalter, optional Drei-Stufen-Fußschalter
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors (Art.-Nr. 1999, Pflichtausstattung)
- Freilaufmotor, Auskupplung bei Widerstand in Abwärtsrichtung, Unterbrechung des Kraftflusses
- Dewert-Hygiene-Ausstattung

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 4-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -40 bis +45° verstellbar
- Kopfteillänge: 540 mm, mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
- Mittelteil zur Dachstellung verstellbar, unterstützt durch 2 Gasdruckfedern, spielfreie Einstellung der gewünschten Position durch die Fixierung von 2 Führungsstangen
- Mittelteillänge: 470 mm
- Fußteil 2-teilig, längs geteilt; jedes Fußteilsegment stufenlos bis +65° verstellbar durch selbstfixierendes und spielfreies Stangensystem (Fußteil-Segmente unabhängig voneinander verstellbar)
- Fußteillänge: 940 mm
- Polsterteilstärke: 60 mm

Technische Daten:


- Elektromotorisch höhenverstellbar von 510 mm bis 950 mm in 22 Sek. durch AC-Elektromotor mit 10.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: 700 mm
- Gesamtlänge der Liegefläche: 1.950 mm
- Belastbarkeit: 250 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet



Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandora Plus mit samtig-glatter Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie

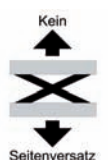

Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 040N
Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren
Comfort-Doppelrollen, Ø 100 mm,
Grundhöhe - 15 mm



Art.-Nr. 046
Fahrbar auf 4 Doppelrollen
zentral feststellbar, Ø 100 mm,
Grundhöhe + 20 mm



Art.-Nr. 045N
Rad-Hebe-System mit ergo-
nomischen Fußhebeln zur
gesteuerten Absenkung der
Liege




Weitere Motorbedienelemente



Art.-Nr. 090E
1 Handschalter mit Magnet zur
Befestigung an der Rückseite



Art.-Nr. 091-3E
1 Drei-Stufen-Fußschalter: Bei stärkerem
Druck auf die Abwärtstaste stoppt der Motor
und verfährt um einige cm in die Gegenrichtung

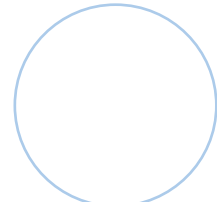

Art.-Nr. 092-3E
1 Fixierung für Fußschalter am
Untergestell montiert



Art.-Nr. 094E
Längsseitige Fußbedienung mit
Sicherheitsverstellung:
Stange drücken = Liege fährt nach oben
Stange anheben = Liege fährt nach unten



Art.-Nr. 095E
Umlaufende ergonomische Fußbedienung
mit Sicherheitsverstellung:
Stange drücken = Liege fährt nach oben
Stange anheben = Liege fährt nach unten

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 010K
Papierrollenhalter, Befestigung unter
dem Kopfteil (nicht vorstehend),
für Liegenbreite 700 mm, nicht bei
Kopfteil 3-teilig (Art.-Nr. 056)

Kopfteiloptionen



Art.-Nr. 056
Kopf 3-teilig mit Armstützen,
stufenlos absenk- und abnehmbar,
Verstellbereich -25° bis +45°,
Art.-Nr. 010K nicht möglich,
Abmessungen:
Kopfteil: L 540 mm x B 370 mm
Armteil: L 500 mm x B 160 mm

Polsteroptionen

Art.-Nr. 008
Polsterbreite 800 mm

Art.-Nr. B1772
Polster mittelweich durch Kaltschaum-
auflage, für Liegenbreite 700 mm,
Polsterstärke 70 mm

Nasenschlitz



Art.-Nr. 1615-EF
Entfall Nasenschlitz

Serie 2800XL

4-teilige Therapieliege mit hydraulischer Höhenverstellung

Modell 2860-00XL/H weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 2860-03XL/H weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 2860-04XL/H graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)



ohne
Abbildung



Modell 2860-00XLE (elektromotorische Höhenverstellung) mit Fußschalter anstelle von Handschalter; Polsterfarbe: 64-703 pearl



Grundausrüstung:

- Liegefläche 4-teilig
- Mittelteil zur Dachstellung verstellbar, Trendelenburgpositionierung möglich
- Fußteil 2-teilig, längs geteilt
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich
- Tritthebel zur hydraulischen Höhenverstellung beidseitig der Liegefläche
- Dewert-Hygiene-Ausstattung



Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 4-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -40 bis +45° verstellbar
- Kopfteillänge: 540 mm, mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
- Mittelteil zur Dachstellung verstellbar, unterstützt durch 2 Gasdruckfedern, spielfreie Einstellung der gewünschten Position durch die Fixierung von 2 Führungsstangen
- Mittelteillänge: 470 mm
- Fußteil 2-teilig, längs geteilt; jedes Fußteilsegment stufenlos bis +65° verstellbar durch selbstfixierendes und spielfreies Stangensystem (Fußteil-Segmente unabhängig voneinander verstellbar)
- Fußteillänge: 940 mm
- Polsterteilstärke: 60 mm



Technische Daten:

- Manuell höhenverstellbar von 530 mm bis 950 mm durch Hydraulikpumpe mit 10.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: 700 mm
- Gesamtlänge der Liegefläche: 1.950 mm
- Belastbarkeit: 250 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet



Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandora Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten




Art.-Nr. 040N
Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren
Comfort-Doppelrollen, Ø 100 mm,
Grundhöhe - 15 mm



Art.-Nr. 046
Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral
feststellbar, Ø 100 mm,
Grundhöhe + 20 mm



Art.-Nr. 045N
Rad-Hebe-System mit ergo-
nomischen Fußhebeln zur
gesteuerten Absenkung der
Liege

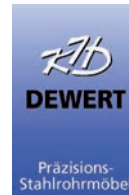

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 010K
Papierrollenhalter, Befestigung unter
dem Kopfteil (nicht vorstehend),
für Liegenbreite 700 mm, nicht bei
Kopfteil 3-teilig (Art.-Nr. 056)

Kopfteiloptionen




Art.-Nr. 056
Kopf 3-teilig mit Armstützen, stufenlos
absenk- und abnehmbar, Verstellbereich
-25° bis +45°, Art.-Nr. 010K nicht möglich,
Abmessungen:
Kopfteil: L 540 mm x B 370 mm
Armteil: L 500 mm x B 160 mm

Polsteroptionen

Art.-Nr. 008
Polsterbreite 800 mm

Art.-Nr. B1772
Polster mittelweich durch Kaltschaum-
auflage, für Liegenbreite 700 mm,
Polsterstärke 70 mm

Nasenschlitz

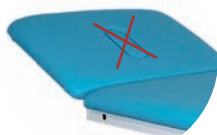

Art.-Nr. 1615-EF
Entfall Nasenschlitz

Serie 2800XL

6-teilige Therapieliege mit elektromotorischer Höhenverstellung

Modell 2880-00XLE weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 2880-03XLE weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 2880-04XLE grau aluminium pulverbeschichtet (RAL 9007)



Alle Abb.:
Modell 2880-00E
mit Ausstattungsoptionen:
Radhebesystem (045N),
umlaufende Fußbedienung (095E);
Polsterfarbe: 64-702 white



Grundausrüstung:

- Liegefläche 6-teilig
- Mittelteil zur Dachstellung verstellbar, Trendelenburgpositionierung möglich
- Fußteil 4-teilig, quer und längs geteilt
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich
- Bedienung des Elektromotors durch einen Handschalter, optional Drei-Stufen-Fußschalter
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors (Art.-Nr. 1999, Pflichtausstattung)
- Freilaufmotor, Auskupplung bei Widerstand in Abwärtsrichtung, Unterbrechung des Kraftflusses
- Dewert-Hygiene-Ausstattung



Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 6-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -40 bis $+45^\circ$ verstellbar
- Kopfteillänge: 540 mm, mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
- Mittelteil zur Dachstellung verstellbar, unterstützt durch 2 Gasdruckfedern, spielfreie Einstellung der gewünschten Position durch die Fixierung von 2 Führungsstangen
- Mittelteillänge: 530 mm
- Fußteil 4-teilig, quer und längs geteilt
- Jedes Fußteilstück einzeln stufenlos bis $+60^\circ$ verstellbar durch selbstfixierendes und spielfreies Stangensystem (Fußteil-Segmente unabhängig voneinander verstellbar)
- Untere Fußteilstücke zusätzlich einzeln stufenlos bis -65° verstellbar durch Gasdruckfeder
- Fußteillänge: oberes Fußteil: 405 mm | unteres Fußteil: 485 mm
- Polsterteilstärke: 60 mm



Technische Daten:

- Elektromotorisch höhenverstellbar von 510 mm bis 950 mm in 22 Sek. durch AC-Elektromotor mit 10.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: 700 mm
- Gesamtlänge der Liegefläche: 1.950 mm
- Belastbarkeit: 250 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet



Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatter Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 040N
Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Comfort-Doppelrollen, Ø 100 mm, Grundhöhe - 15 mm



Art.-Nr. 046
Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 100 mm, Grundhöhe + 20 mm



Art.-Nr. 045N
Rad-Hebe-System mit ergonomischen Fußhebeln zur gesteuerten Absenkung der Liege




Weitere Motorbedienelemente



Art.-Nr. 090E
1 Handschalter mit Magnet zur Befestigung an der Rückseite



Art.-Nr. 091-3E
1 Drei-Stufen-Fußschalter: Bei stärkerem Druck auf die Abwärtstaste stoppt der Motor und verfährt um einige cm in die Gegenrichtung

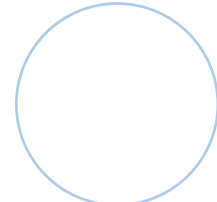


Art.-Nr. 092-3E
1 Fixierung für Fußschalter am Untergestell montiert



Art.-Nr. 094E
Längsseitige Fußbedienung mit Sicherheitsverstellung:
Stange drücken = Liege fährt nach oben
Stange anheben = Liege fährt nach unten



Art.-Nr. 095E
Umlaufende ergonomische Fußbedienung mit Sicherheitsverstellung:
Stange drücken = Liege fährt nach oben
Stange anheben = Liege fährt nach unten

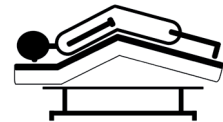

Art.-Nr. 065E
Dachstellung elektromotorisch

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 010K
Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil (nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm, nicht bei Kopfteil 3-teilig (Art.-Nr. 056)

Nasenschlitz



Art.-Nr. 1615-EF
Entfall Nasenschlitz

Kopfteiloptionen



Art.-Nr. 056
Kopf 3-teilig mit Armstützen, stufenlos absenk- und abnehmbar, Verstellbereich -25° bis +45°, Art.-Nr. 010K nicht möglich, Abmessungen:
Kopfteil: L 540 mm x B 370 mm
Armteil: L 500 mm x B 160 mm

Armstützen



Art.-Nr. 088
1 seitliche Armstütze, schwenk- und abnehmbar, zusätzlich dreh- und kippbar, fest angebracht

Polsteroptionen

Art.-Nr. 009
Polsterbreite 800 mm

Art.-Nr. B1772
Polster mittelweich durch Kaltschaumauflage, für Liegenbreite 700 mm, Polsterstärke 70 mm


Serie 2800XL

6-teilige Therapieliege mit hydraulischer Höhenverstellung

Modell 2880-00XL/H weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 2880-03XL/H weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 2880-04XL/H graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

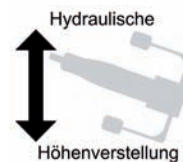

ohne
Abbildung



Modell 2880-00E (elektromotorische Höhenverstellung) mit Ausstattungsoptionen:
Radhebesystem (045N), umlaufende Fußbedienung (095E);
Polsterfarbe: 64-702 white



Grundausrüstung:

- Liegefläche 6-teilig
- Mittelteil zur Dachstellung verstellbar, Trendelenburgpositionierung möglich
- Fußteil 4-teilig, quer und längs geteilt
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich
- Tritthebel zur hydraulischen Höhenverstellung beidseitig der Liegefläche
- Dewert-Hygiene-Ausstattung

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 6-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -40 bis +45° verstellbar
- Kopfteillänge: 540 mm, mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
- Mittelteil zur Dachstellung verstellbar, unterstützt durch 2 Gasdruckfedern, spielfreie Einstellung der gewünschten Position durch die Fixierung von 2 Führungsstangen
- Mittelteillänge: 530 mm
- Fußteil 4-teilig, quer und längs geteilt
- Jedes Fußteilsegment einzeln stufenlos bis +60° verstellbar durch selbstfixierendes und spiel-freies Stangensystem (Fußteil-Segmente unabhängig voneinander verstellbar)
- Untere Fußteilsegmente zusätzlich einzeln stufenlos bis -65° verstellbar durch Gasdruckfeder
- Fußteillänge: oberes Fußteil: 405 mm | unteres Fußteil: 485 mm
- Polsterteilstärke: 60 mm



Technische Daten:

- Manuell höhenverstellbar von 590 mm bis 1.010 mm durch Hydraulikpumpe mit 10.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: 700 mm
- Gesamtlänge der Liegefläche: 1.950 mm
- Belastbarkeit: 200 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet



Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatter Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten




Art.-Nr. 040N
Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren
Comfort-Doppelrollen, Ø 100 mm,
Grundhöhe - 15 mm



Art.-Nr. 046
Fahrbar auf 4 Doppelrollen
zentral feststellbar, Ø 100 mm,
Grundhöhe + 20 mm



Art.-Nr. 045N
Rad-Hebe-System mit ergo-
nomischen Fußhebeln zur
gesteuerten Absenkung der
Liege

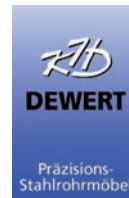

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 010K
Papierrollenhalter, Befestigung unter
dem Kopfteil (nicht vorstehend),
für Liegenbreite 700 mm, nicht bei
Kopfteil 3-teilig (Art.-Nr. 056)

Kopfteiloptionen



Art.-Nr. 056
Kopf 3-teilig mit Armstützen,
stufenlos absenk- und abnehmbar,
Verstellbereich -25° bis +45°,
Art.-Nr. 010K nicht möglich,
Abmessungen:
Kopfteil: L 540 mm x B 370 mm
Armteil: L 500 mm x B 160 mm

Nasenschlitz



Art.-Nr. 1615-EF
Entfall Nasenschlitz

Armstützen



Art.-Nr. B088
1 seitliche Armstütze, schwenk- und
abnehmbar, zusätzlich dreh- und
kipfbar, fest angebracht

Polsteroptionen

Art.-Nr. 009
Polsterbreite 800 mm

Art.-Nr. B1772
Polster mittelweich durch Kaltschaum-
auflage, für Liegenbreite 700 mm,
Polsterstärke 70 mm


Serie 4800E

3-teilige Therapieliege mit elektromotorischer Höhenverstellung

Modell 4815-00E weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 4815-03E weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 4815-04E graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

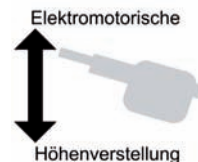

Alle Abb.:
Modell 4815-00E
mit Ausstattungsoptionen:
Fahrbar auf 4 Doppelrollen mit
Zentralfeststellsystem (046),
umlaufende Fußbedienung
(095E) Papierrollenhalter (010F);
Polsterfarbe: 64-708 cherry



Liege in höchster Position



Liege in niedrigster Position

Grundausrüstung:

- Liegefläche 3-teilig
- Fußteil bis +75° zur Sitzposition verstellbar
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich
- Großer Höhenverstellbereich
- Bedienung des Elektromotors durch einen Handschalter, optional Drei-Stufen-Fuß
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors (Art.-Nr. 1999, Pflichtausstattung)
- Freilaufmotor, Auskupplung bei Widerstand in Abwärtsrichtung, Unterbrechung des Kraftflusses
- Dewert-Hygiene-Ausstattung



Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 3-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -40 bis +50° verstellbar
- Kopfteillänge: 450 mm, mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
- Mittelteil fest
- Mittelteillänge: 530 mm
- Fußteil stufenlos durch Gasdruckfeder bis +75° verstellbar (Sitzposition)
- Fußteillänge: 1.020 mm
- Polsterteilstärke: 60 mm

Technische Daten:

- Elektromotorisch höhenverstellbar von 450 mm bis 1.000 mm in 18 Sek. durch AC-Elektromotor mit 10.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: 700 mm
- Gesamtlänge der Liegefläche: 2.000 mm
- Belastbarkeit: 200 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet



Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandora Plus mit samtig-glatter Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 040N
 Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren
 Comfort-Doppelrollen, Ø 100 mm,
 Grundhöhe - 15 mm



Art.-Nr. 046
 Fahrbar auf 4 Doppelrollen
 zentral feststellbar, Ø 100 mm,
 Grundhöhe + 20 mm



Art.-Nr. 045N
 Rad-Hebe-System mit ergo-
 nomischen Fußhebeln zur
 gesteuerten Absenkung der
 Liege




Weitere Motorbedienelemente



Art.-Nr. 090E
 1 Handschalter mit Magnet zur
 Befestigung an der Rückseite



Art.-Nr. 091-3E
 1 Drei-Stufen-Fußschalter: Bei stärkerem
 Druck auf die Abwärtstaste stoppt der Motor
 und verfährt um einige cm in die Gegenrichtung

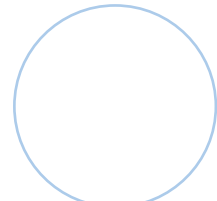

Art.-Nr. 092-3E
 1 Fixierung für Fußschalter am
 Untergestell montiert



Art.-Nr. 094E
 Längsseitige Fußbedienung mit
 Sicherheitsverstellung:
 Stange drücken = Liege fährt nach oben
 Stange anheben = Liege fährt nach unten



Art.-Nr. 095E
 Umlaufende ergonomische Fußbedienung mit Sicherheitsverstellung:
 Stange drücken = Liege fährt nach oben; Stange anheben = Liege fährt nach unten
 dann Kopfteillänge 450 mm, Fußteillänge 990 mm

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 010K
 Papierrollenhalter, Befestigung unter
 dem Kopfteil (nicht vorstehend),
 für Liegenbreite 700 mm, nicht bei
 Kopfteil 3-teilig



Art.-Nr. 010F
 Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil,
 (70 mm vorstehend), für Liegenbreite
 700 mm



Kopfteilloptionen


Art.-Nr. 055
 Kopf 3-teilig mit Armstützen,
 stufenlos absenk- und abnehmbar,
 Verstellbereich -25° bis +45°,
 Art.-Nr. 010K nicht möglich,
 Abmessungen:
 Kopfteil: L 500 mm x B 370 mm
 Armteil: L 420 mm x B 160 mm

Armstützen



Art.-Nr. 088
 1 seitliche Armstütze, schwenk- und
 abnehmbar, zusätzlich dreh- und
 kippbar, fest angebracht

Nasenschlitz

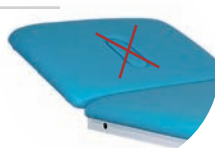

Art.-Nr. 1615-EF
 Entfall Nasenschlitz

Polsteroptionen

Art.-Nr. 007
 Polsterbreite 800 mm

Art.-Nr. B1770
 Softpolster für hohen Liegekomfort aus
 Kaltschaum, für Liegenbreite 700 mm,
 Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. B1772
 Polster mittelweich durch Kaltschaum-
 auflage, für Liegenbreite 700 mm,
 Polsterstärke 70 mm


Serie 4800E

3-teilige Therapieliege mit elektromotorischer Höhenverstellung

Modell 4840-00E weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 4840-03E weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 4840-04E graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

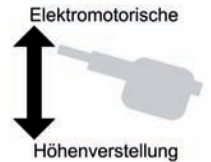

Alle Abb.:
Modell 4840-00E
mit Ausstattungsoptionen:
Rad-Hebe-System (045N),
Umlaufende Fußbedienung
(095E) Kopfteil 3-teilig (055-10);
Polsterfarbe: 64-701 stone blue



Grundausrüstung:

- Liegefläche 3-teilig
- Multifunktionale Verstellung der Polstersegmente
- Mögliche Verstellpositionen u.a.: Gesamtschräglage, Dachstellung, Trendelenburg, Anti-Trendelenburg
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich
- Großer Höhenverstellbereich
- Bedienung des Elektromotors durch einen Handschalter, optional Drei-Stufen-Fußschalter
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors (Art.-Nr. 1999, Pflichtausstattung)
- Freilaufmotor, Auskupplung bei Widerstand in Abwärtsrichtung, Unterbrechung des Kraftflusses
- Dewert-Hygiene-Ausstattung



Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 3-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -35° bis $+45^\circ$ verstellbar
- Kopfteillänge: 450 mm, mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
- Mittelteil stufenlos positiv zur Dachstellung verstellbar durch 2 Gasdruckfedern
- Mittelteillänge: 530 mm
- Fußteil stufenlos positiv ($+65^\circ$) zur Sitzposition verstellbar durch 2 Gasdruckfedern
- Fußteillänge: 1.020 mm
- Alle Betätigungsgriffe an beiden Längsseiten der Liege
- Polsterteilstärke: 60 mm



Technische Daten:


- Elektromotorisch höhenverstellbar von 510 mm bis 1.030 mm in 18 Sek. durch AC-Elektromotor mit 10.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: 700 mm
- Gesamtlänge der Liegefläche: 2.000 mm
- Belastbarkeit: 250 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet



Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatter Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie

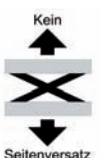

Kein
Seitenversatz

Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten




Art.-Nr. 040N
Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren
Comfort-Doppelrollen, Ø 100 mm,
Grundhöhe - 15 mm



Art.-Nr. 046
Fahrbar auf 4 Doppelrollen
zentral feststellbar, Ø 100 mm,
Grundhöhe + 20 mm



Art.-Nr. 045N
Rad-Hebe-System mit ergo-
nomischen Fußhebeln zur
gesteuerten Absenkung der
Liege

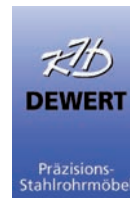


Weitere Motorbedienelemente



Art.-Nr. 090E
1 Handschalter mit Magnet zur
Befestigung an der Rückseite



Art.-Nr. 091-3E
1 Drei-Stufen-Fußschalter: Bei stärkerem
Druck auf die Abwärtstaste stoppt der Motor
und verfährt um einige cm in die Gegenrichtung

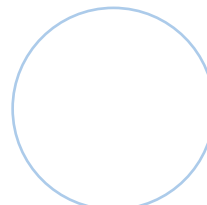

Art.-Nr. 092-3E
1 Fixierung für Fußschalter am
Untergestell montiert



Art.-Nr. 094E
Längsseitige Fußbedienung mit
Sicherheitsverstellung:
Stange drücken = Liege fährt nach oben
Stange anheben = Liege fährt nach unten



Art.-Nr. 095E
Umlaufende ergonomische Fußbedienung
mit Sicherheitsverstellung:
Stange drücken = Liege fährt nach oben
Stange anheben = Liege fährt nach unten

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 010K
Papierrollenhalter, Befestigung unter
dem Kopfteil (nicht vorstehend),
für Liegenbreite 700 mm, nicht bei
Kopfteil 3-teilig



Art.-Nr. 010F
Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil,
(70 mm vorstehend), für Liegenbreite
700 mm



Art.-Nr. 055-10
Kopf 3-teilig mit Armstützen,
stufenlos absenk- und abnehmbar,
Verstellbereich -25° bis +45°,
Art.-Nr. 010K nicht möglich,
Abmessungen:
Kopfteil: L 500 mm x B 370 mm
Armteil: L 420 mm x B 160 mm

Armstützen



Art.-Nr. B088
1 seitliche Armstütze, schwenk- und
abnehmbar, zusätzlich dreh- und
kippar, fest angebracht

Nasenschlitz



Art.-Nr. 1615-EF
Entfall Nasenschlitz

Polsteroptionen

Art.-Nr. 007
Polsterbreite 800 mm

Art.-Nr. B1772
Polster mittelweich durch
Kaltschaumauflege,
für Liegenbreite 700 mm,
Polsterstärke 70 mm

Serie 2800XL


Gymnastikliege zur Therapie nach Bobath und Vojta mit elektromotorischer Höhenverstellung

Modell 2800-00XLE* weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 2800-03XLE* weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 2800-04XLE* graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

* Modellbezeichnung abhängig von der Breite der Liegefläche (siehe technische Daten)

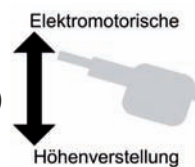

Modell 2804-00XLE
mit Ausstattungsoptionen:
Rad-Hebe-System (045N),
umlaufende Fußbedienung
(095E), Kopfteil stufenlos durch
Gasdruckfeder verstellbar (063);
Polsterfarbe: 64-707 chestnut

Grundausrüstung:

- Liegefläche 1-teilig
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich
- Bedienung des Elektromotors durch einen Handschalter, optional Drei-Stufen-Fußschalter
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors (Art.-Nr. 1999, Pflichtausstattung)
- Freilaufmotor, Auskupplung bei Widerstand in Abwärtsrichtung, Unterbrechung des Kraftflusses
- Dewert-Hygiene-Ausstattung



Liege in niedrigster Position

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 1-teilig:

- Länge: 1.950 mm
- Optional: Kopfteil
- Polsterteilstärke: 60 mm

Beide Abb.:
Modell 2800-00XLE
mit Ausstattungsoption:
Fahrbar auf zentral feststellbaren Doppelrollen (046), mit Fußschalter anstelle von Handschalter;
Polsterfarbe: 64-717 deep sea



Technische Daten:


- Elektromotorisch höhenverstellbar von 480 mm bis 920 mm in 22 Sek. durch AC-Elektromotor mit 10.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: **Modell 2800XLE:** 1.000 mm | **Modell 2802XLE:** 1.100 mm | **Modell 2804XLE:** 1.200 mm
- Gesamtlänge der Liegefläche: 1.950 mm
- Belastbarkeit: 250 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet



Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie

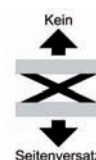

Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten




Art.-Nr. 040N
Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren
Comfort-Doppelrollen, Ø 100 mm,
Grundhöhe - 15 mm



Art.-Nr. 046
Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral
feststellbar, Ø 100 mm,
Grundhöhe + 20 mm



Art.-Nr. 045N
Rad-Hebe-System mit ergo-
nomischen Fußhebeln zur
gesteuerten Absenkung der
Liege

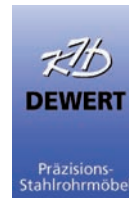


Weitere Motorbedienelemente



Art.-Nr. 090E
1 Handschalter mit Magnet zur
Befestigung an der Rückseite



Art.-Nr. 091-3E
1 Drei-Stufen-Fußschalter: Bei stärkerem
Druck auf die Abwärtstaste stoppt der Motor
und verfährt um einige cm in die Gegenrichtung

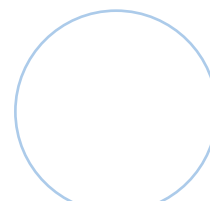

Art.-Nr. 092-3E
1 Fixierung für Fußschalter am
Untergestell montiert



Art.-Nr. 094E
Längsseitige Fußbedienung mit
Sicherheitsverstellung:
Stange drücken = Liege fährt nach oben
Stange anheben = Liege fährt nach unten



Art.-Nr. 095E
Umlaufende ergonomische Fußbedienung
mit Sicherheitsverstellung:
Stange drücken = Liege fährt nach oben
Stange anheben = Liege fährt nach unten

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 016K
Papierrollenhalter, Befestigung unter der
Liegefläche (nicht vorstehend), für Liegen-
breite 1.000 mm

Kopfteiloptionen



Art.-Nr. 063
Kopfteil, durch Gasdruckfeder stufenlos
positiv und negativ verstellbar

Serie 2800XL


Gymnastikliege zur Therapie nach Bobath und Vojta mit elektromotorischer Höhenverstellung

Modell 2800-00XL/H* weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 2800-03XL/H* weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 2800-04XL/H* graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

* Modellbezeichnung abhängig von der Breite der Liegefläche (siehe technische Daten)

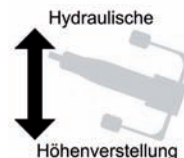

Modell 2800-00XLE (elektromotorische Höhenverstellung) mit Ausstattungsoption: Fahrbar auf zentral feststellbaren Doppelrollen (046), mit Fußschalter anstelle von Handschalter; Polsterfarbe: 64-717 deep sea



Grundausrüstung:

- Liegefläche 1-teilig
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich
- Tritthebel zur hydraulischen Höhenverstellung beidseitig der Liegefläche
- Dewert-Hygiene-Ausstattung



Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 1-teilig:

- Länge: 1.950 mm
- Optional: Kopfteil
- Polsterteilstärke: 60 mm



Modell 2804-00XLE (elektromotorische Höhenverstellung) mit Ausstattungsoptionen: Rad-Hebe-System (045N), umlaufende Fußbedienung (095E), Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder verstellbar (063); Polsterfarbe: 64-707 chestnut



Technische Daten:

- Manuell höhenverstellbar von 500 mm bis 920 mm durch Hydraulikpumpe mit 10.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: **Modell 2800XL/H:** 1.000 mm | **Modell 2802XL/H:** 1.100 mm | **Modell 2804XL/H:** 1.200 mm
- Gesamtlänge der Liegefläche: 1.950 mm
- Belastbarkeit: 250 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet



Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatter Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 040N
Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren
Comfort-Doppelrollen, Ø 100 mm,
Grundhöhe - 15 mm



Art.-Nr. 046
Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral
feststellbar, Ø 100 mm,
Grundhöhe + 20 mm



Art.-Nr. 045N
Rad-Hebe-System mit ergo-
nomischen Fußhebeln zur
gesteuerten Absenkung der
Liege



Papierrollenhalter



Art.-Nr. 016K
Papierrollenhalter, Befestigung unter der
Liegefläche (nicht vorstehend), für Liegen-
breite 1.000 mm

Kopfteiloptionen



Art.-Nr. 063
Kopfteil, durch Gasdruckfeder stufenlos
positiv und negativ verstellbar

Serie 4800E


Gymnastikliege zur Therapie nach Bobath und Vojta mit elektromotorischer Höhenverstellung

Modell 4800-00E* weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 4800-03E* weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 4800-04E* graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

* Modellbezeichnung abhängig von der Breite der Liegefläche (siehe technische Daten)

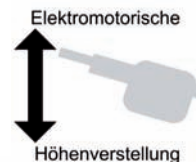

Alle Abb.:
Modell 4804-00E
mit Ausstattungsoption:
Rad-Hebe-System (045N), mit
Fußschalter anstelle von Hand-
schalter;
Polsterfarbe: 64-717 deep sea

Grundausrüstung:

- Liegefläche 1-teilig
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich
- Bedienung des Elektromotors durch einen Handschalter, optional Drei-Stufen-Fußschalter
- Großer Höhenverstellbereich
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors (Art.-Nr. 1999, Pflichtausstattung)
- Freilaufmotor, Auskupplung bei Widerstand in Abwärtsrichtung, Unterbrechung des Kraftflusses
- Dewert-Hygiene-Ausstattung



Liege in niedrigster Position

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 1-teilig:

- Länge: 1.950 mm
- Optional: Kopfteil
- Polsterteilstärke: 60 mm



Liege in höchster Position

Technische Daten:

- Elektromotorisch höhenverstellbar von 420 mm bis 970 mm in 22 Sek. durch AC-Elektromotor mit 10.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: **Modell 4800E:** 1.000 mm | **Modell 4802E:** 1.100 mm | **Modell 4804E:** 1.200 mm
- Gesamtlänge der Liegefläche: 1.950 mm
- Belastbarkeit: 250 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet

Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandora Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 040N
Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren
Comfort-Doppelrollen, Ø 100 mm,
Grundhöhe - 15 mm



Art.-Nr. 046
Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral
feststellbar, Ø 100 mm,
Grundhöhe + 20 mm



Art.-Nr. 045N
Rad-Hebe-System mit ergo-
nomischen Fußhebeln zur
gesteuerten Absenkung der
Liege




Weitere Motorbedienelemente



Art.-Nr. 090E
1 Handschalter mit Magnet zur
Befestigung an der Rückseite



Art.-Nr. 091-3E
1 Drei-Stufen-Fußschalter: Bei stärkerem
Druck auf die Abwärtstaste stoppt der Motor
und verfährt um einige cm in die Gegenrichtung

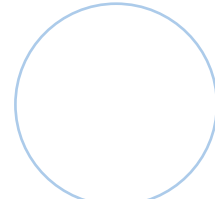

Art.-Nr. 092-3E
1 Fixierung für Fußschalter am
Untergestell montiert



Art.-Nr. 094E
Längsseitige Fußbedienung mit
Sicherheitsverstellung:
Stange drücken = Liege fährt nach oben
Stange anheben = Liege fährt nach unten



Art.-Nr. 095E
Umlaufende ergonomische Fußbedienung
mit Sicherheitsverstellung:
Stange drücken = Liege fährt nach oben
Stange anheben = Liege fährt nach unten

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 016K
Papierrollenhalter, Befestigung unter der
Liegefläche (nicht vorstehend), für Liegen-
breite 1.000 mm

Kopfteiloptionen



Art.-Nr. 063
Kopfteil, durch Gasdruckfeder stufenlos
positiv und negativ verstellbar

K.H. Dewert GmbH
Vollmestraße 7
33649 Bielefeld
Germany

Telefon + 49 (0) 5 21 / 4 00 27-0
Fax + 49 (0) 5 21 / 4 00 27-27

Internet: www.khdewert.de



E-Mail: info@khdewert.de

YouTube: K.H. Dewert



12.2024_01

THERAPIELIEGEN



+ Weiteres Zubehör

Keilkissen, Halbrollen, Rollen, Kissen



Art.-Nr. 1211-..*
Keilkissen,
Abm. (L x B x H):
400 x 400 x 100 - 10 mm



Art.-Nr. 1113-..*
Halbrolle,
Abm. (L x B x H):
570 x 200 x 95 mm




Art.-Nr. 1111-..*
Nackenrolle,
Abm.: L 570 x Ø 150 mm



Art.-Nr. 1112-..*
Knierolle,
Abm.: L 570 x Ø 200 mm

*Der Artikelnummer bitte die jeweilige Nummer der Bezugsfarbe anfügen.

Polsterschutzmatten

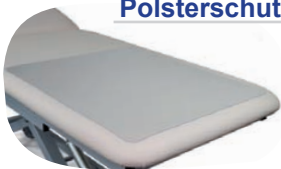

Art.-Nr. 1890
Polsterschutzmatte, aus Klarsicht-
PVC-Folie, 0,8 mm Stärke,
Abm.: 700 x 600 mm

Die gesamte Dewert-Produktpalette mit zusätzlichen Zubehörartikeln finden Sie auf unserer Internetseite und in den weiteren Katalogen. Wir freuen uns auf Sie!

