

TRANSPORT- UND AUFWACHLIEGEN KOLLEKTION 2021 - BEWÄHRTES NEU KOMBINIERT




2022.1



LIEGEN FÜR PRAXIS UND KRANKENHAUS

... MIT FESTER HÖHE

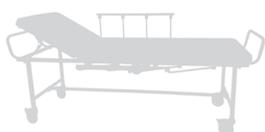

SERIE DFH

... MIT HYDRAULISCHER HÖHENVERSTELLUNG



SERIE 2000XL



SERIE DX1

Transport- und Aufwachliegen



**Aufwach-
Liegenpolster** ✓

+



Fahrbarkeit ✓

+



**Seiten-
sicherung** ✓

+



Schiebegriff ✓

=



**Transport-
und
Aufwachliege** ✓

Inhalt

Transport- und Aufwachliegen - Ihre Vorteile	3
Transport- und Aufwachliegen mit fester Höhe Serie DFH	4
2-teilige Transport- und Aufwachliegen mit fester Höhe:	
• Modell 61 Kopfteillänge: 550 mm	6
• Modell 60 Kopfteillänge: 750 mm	8
3-teilige Transport- und Aufwachliegen mit fester Höhe:	
• Modell 71 Kopfteillänge: 550 mm	10
• Modell 70 Kopfteillänge: 750 mm	12
Transport- und Aufwachliegen mit hydraulischer Höhenverstellung Serie 2000XL	14
2-teilige Transport- und Aufwachliegen mit hydraulischer Höhenverstellung:	
• Modell 2220XL/H Kopfteillänge: 550 mm	16
• Modell 2210XL/H Kopfteillänge: 750 mm	18
3-teilige Transport- und Aufwachliegen mit hydraulischer Höhenverstellung:	
• Modell 2250XL/H Kopfteillänge: 750 mm	20
2-teilige Transport- und Aufwachliegen mit hydraulischer Höhenverstellung und Trendelenburg-Einstellung:	
• Modell 2320XL/H Kopfteillänge: 550 mm	22
• Modell 2310XL/H Kopfteillänge: 750 mm	24
2-teilige Transport- und Aufwachliegen mit hydraulischer Höhenverstellung, Trendelenburg-Einstellung und abnehmbarer Polsterauflage:	
• Modell 2410XL/H Kopfteillänge: 750 mm	26
Transport- und Aufwachliegen mit hydraulischer Höhenverstellung Serie DX1	28
2-teilige Transport- und Aufwachliegen mit hydraulischer Höhenverstellung:	
• Modell 1090/H Kopfteillänge: 550 mm	30
• Modell 1093/H Kopfteillänge: 750 mm	32
3-teilige Transport- und Aufwachliegen mit hydraulischer Höhenverstellung:	
• Modell 1095/H Kopfteillänge: 550 mm	34
Weiteres Zubehör	35





Aufwachliegenpolster:

- Polsterteilstärke 80 mm; Serie DX1: 70 mm
- Trägerplatte bestehend aus 18 mm-Spanplatte, z.T. auch Schichtholz, mit umlaufendem Massivholz-Verstärkungsrahmen;
- 2-lagiger homogener Polyurethan-Schaumstoff mit RG 46 und weicher Kaltschaumauflage, dadurch bequeme, weiche Liegefläche; Ökotex-zertifiziert
→ kein aus Abfallschaum und chemischen Klebstoffen hergestellter Verbundschaum, der sich im schnellen Alterungsprozess aufreißt
- **Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:**
 - Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatte Oberfläche
 - Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Dewert-Hygiene-Ausstattung

Ermöglicht optimale Reinigung und Desinfizierbarkeit

- Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen
- Entlüftungsöffnungen an der Polsterunterseite, verschlossen mit Luftausgleichskappen mit Ventalfunktion
- Einfache Hygiene durch offene Bauweise:
Gute Erreichbarkeit aller Bauteile,
keine im Alterungsprozess brechenden Kunststoffabdeckungen
- Optional:
Innovatives Polsterbezugsmaterial Skai® Toronto EN mit staynu




Modelle mit fester Liegenhöhe

Seiten 4 bis 13



Modelle mit hydraulischer Höhenverstellung

Seiten 14 bis 35

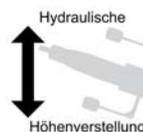


Serie DFH: Transport- und Aufwachliegen mit fester Höhe



Technik:

- Untergestell aus 30 x 30 x 2 mm 4-kant-Rohr
- Längsverstrebung und Querstreben zwischen den Liegenfüßen zur zusätzlichen Stabilisierung
- Liegenfußpaare und Gestellrahmen fest verschraubt
- Verzinkte Stahlscharniere als Verbindungselemente zwischen den Polstersegmenten, keine brechenden Kunststoffelemente
- Belastbarkeit: 250 kg 

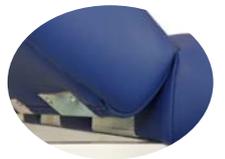

Ausstattung:


- **Aufwachliegenpolster:**
Hoher Liegekomfort durch Liegenpolster in halbsoft-Ausführung mit hochwertiger Kaltschaumauflage
- **Fahrbar** auf 4 einzeln feststellbaren Rollen Ø 100 mm
- 2 **Seitensicherungen** unter Polsterniveau absenkbar, komplett aus Stahlrohr, ohne brechende Kunststoffeile, RAL 9006 pulverbeschichtet, Länge: 820 mm (4 Streben)
- 1 **Schiebegriff**, RAL 9006 pulverbeschichtet, angebracht am Fußende (Abb.: Schiebegriff-Ausführung verchromt)
- **Dewert-Hygiene-Ausstattung**



Weitere Ausstattungsoptionen finden Sie auf den folgenden Seiten

*****Alle Abb. dieser Seite zeigen die verchromte Schiebegriff-Ausführung.
Standardmäßig ist der Schiebegriff weißaluminium (RAL 9006) pulverbeschichtet.*****

Transport- und Aufwachliegen mit fester Höhe

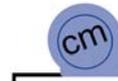

- Breite der Liegefläche: 65 cm, optional 80 cm
- Höhe: 69 cm



- Liegefläche je nach Modell 2- oder 3-teilig



Varianten:

	Liegefläche	Liegefläche 2-teilig	Liegefläche 3-teilig
Kopfteil		Kopfteil positiv verstellbar; Fußteil fest, nicht verstellbar	Kopfteil positiv verstellbar; Mittelteil fest; Fußteil positiv verstellbar durch Gasdruckfeder bis +35°
<ul style="list-style-type: none"> • Kopfteillänge: 550 mm • Zwei stabile, parallel angebrachte Sicherheitsraster zur positiven Kopfteilverstellung <p>Optional: Komfortable Verstellung durch Gasdruckfeder stufenlos bis +40°</p>		Modell: 61 	Modell: 71  <p>NEU</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Kopfteillänge: 750 mm • Kopfteil stufenlos positiv verstellbar zur Sitzposition (+75°) des Patienten durch Gasdruckfeder 		Modell: 60  <p>+75°</p>	Modell: 70  <p>+75°</p> <p>NEU</p>

*****Alle Abb. dieser Seite zeigen die verchromte Schiebegriff-Ausführung. Standardmäßig ist der Schiebegriff weißaluminium (RAL 9006) pulverbeschichtet.*****

Transport- und Aufwachliegen

2-teilige Transport- und Aufwachliege mit fester Höhe

Kopfteillänge: 550 mm

Modell 61-00 weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 61-03 weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 61-04 graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)



Beide Abb.:
Modell 61-00
mit Ausstattungsoption:
2. Schiebegriff am Kopfende
(1810), Schiebegriff-Ausführung
verchromt;
Polsterfarbe: 64-717 deep sea

Grundausrüstung:

- Liege fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Rollen Ø 100 mm
- Längsverstrebung zur zusätzlichen Stabilisierung
- 1 Schiebegriff, RAL 9006 pulverbeschichtet, angebracht am Fußende (optional am Kopfteil möglich)
- 2 Seitensicherungen seitlich versenkbar, RAL 9006 beschichtet, Länge: 820 mm
- Aufwachliegenpolster
- Dewert-Hygiene-Ausstattung 

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil bis 30° positiv verstellbar durch 2 Sicherheits-Zahnrasten
- Kopfteillänge: 550 mm
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 1.400 mm
- Polsterteilstärke: 80 mm



Technische Daten:

- Länge der Liegefläche: 1.950 mm | Gesamtlänge der Liege: 2.080 mm
- Breite der Liegefläche: 650 mm | Gesamtbreite: 750 mm | optional Breite 800 mm, dann Gesamtbreite 900 mm
- Höhe: 690 mm
- Belastbarkeit: 250 kg 

Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)



Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 1120-EF
Entfall der serienmäßigen
Fahrbarkeit



Art.-Nr. 1140-11
Fahrbar auf 4 Rollen
einzeln feststellbar,
Ø 125 mm



Art.-Nr. 1180N
Fahrbar auf 4 Doppelrollen
zentral feststellbar, Ø 100
mm



Art.-Nr. 1185
Fahrbar auf 4 Comfort-Doppel-
rollen zentral feststellbar,
Ø 125 mm

Seitensicherung



Art.-Nr. 1088-EF
Entfall der serienmäßigen
Seitensicherungen



Art.-Nr. 1040
1 Stück Seitensicherung abklappbar mit
Halterung, komplett aus Stahlrohr,
Länge 700 mm



Art.-Nr. 1005
1 Stück Seitensicherung für
Normschiene mit Befestigungskloben,
komplett aus Stahlrohr, Länge 800 mm

Kopfteiloptionen



Art.-Nr. 1655-20
Komfortable Kopfteilverstellung
stufenlos durch Gasdruckfeder
von 0° bis +55°



Art.-Nr. 1662
Zusätzliches 2. Kopfteil,
Länge: 550 mm,
verstellbar durch
2 Zahnraster



Art.-Nr. 1610
Nasenschlitz

Art.-Nr. 1620
Füllpolster

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 1210 / 1220
Papierrollenhalter,
für Liegenbreite
650 mm / 800 mm

Wandschutzelemente



Art.-Nr. 1172
4 Wandabweisräder Ø 100 mm

Anbau-Elemente



Art.-Nr. 1810
1 zusätzlicher Schiebegriff



Art.-Nr. 1850
Ablagekorb mit Halterung,
Abmessungen:
L. 530 x B. 370 x H. 80 mm

Polsteroptionen



Art.-Nr. 1410
1 Stück Normschiene 350
mm lang



Art.-Nr. 1430
1 Befestigungskloben für
Normschiene, Aufnahme
passend für Rohr-Ø 18 mm



Art.-Nr. 1450
1 Infusionsstange für
Normschiene, ohne
Befestigungskloben

Art.-Nr. 61-800
Polsterbreite 800 mm

Art.-Nr. 1765 / 1780
Softpolster für hohen Liegekomfort
aus Kaltschaum, für Liegenbreite
700 mm / 800 mm,
Polsterstärke 100 mm

Transport- und Aufwachliegen

2-teilige Transport- und Aufwachliege mit fester Höhe

Kopfteillänge: 750 mm

Modell 60-00 weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 60-03 weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 60-04 graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)



Beide Abb.:
Modell 60-00
in Grundausstattung,
Schiebegriff-Ausführung
verchromt;
Polsterfarbe: 64-711 ash grey



Grundausstattung:

- Liege fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Rollen Ø 100 mm
- Längsverstrebung zur zusätzlichen Stabilisierung
- 1 Schiebegriff, RAL 9006 pulverbeschichtet, angebracht am Fußende (optional am Kopfteil möglich)
- 2 Seitensicherungen seitlich versenkbar, RAL 9006 beschichtet, Länge: 820 mm
- Aufwachliegenpolster
- Dewert-Hygiene-Ausstattung

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos von 0° bis +75° durch Gasdruckfeder verstellbar (Sitzposition)
- Kopfteillänge: 750 mm
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 1.200 mm
- Polsterteilstärke: 80 mm



Technische Daten:

- Länge der Liegefläche: 1.950 mm | Gesamtlänge der Liege: 2.080 mm
- Breite der Liegefläche: 650 mm | Gesamtbreite: 750 mm | optional Breite 800 mm, dann Gesamtbreite 900 mm
- Höhe: 690 mm
- Belastbarkeit: 250 kg



Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)



Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 1120-EF
Entfall der serienmäßigen
Fahrbarkeit



Art.-Nr. 1140-11
Fahrbar auf 4 Rollen
einzeln feststellbar,
Ø 125 mm



Art.-Nr. 1180N
Fahrbar auf 4 Doppelrollen
zentral feststellbar, Ø 100
mm



Art.-Nr. 1185
Fahrbar auf 4 Comfort-Doppel-
rollen zentral feststellbar,
Ø 125 mm

Seitensicherung



Art.-Nr. 1088-EF
Entfall der serienmäßigen
Seitensicherungen



Art.-Nr. 1040
1 Stück Seitensicherung abklappbar mit
Halterung, komplett aus Stahlrohr,
Länge 700 mm



Art.-Nr. 1005
1 Stück Seitensicherung für
Normschiene mit Befestigungskloben,
komplett aus Stahlrohr, Länge 800 mm

Kopfteiloptionen



Art.-Nr. 1662
Zusätzliches 2. Kopfteil,
Länge: 550 mm, verstellbar durch
2 Zahnraster



Art.-Nr. 1610
Nasenschlitz

Art.-Nr. 1620
Füllpolster

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 1210 / 1220
Papierrollenhalter,
für Liegenbreite
650 mm / 800 mm

Wandschutzelemente



Art.-Nr. 1172
4 Wandabweisräder Ø 100 mm

Anbau-Elemente



Art.-Nr. 1810
1 zusätzlicher Schiebegriff



Art.-Nr. 1850
Ablagekorb mit Halterung,
Abmessungen:
L. 530 x B. 370 x H. 80 mm



Art.-Nr. 1410
1 Stück Normschiene 350
mm lang



Art.-Nr. 1430
1 Befestigungskloben für
Normschiene, Aufnahme
passend für Rohr-Ø 18 mm



Art.-Nr. 1450
1 Infusionsstange für
Normschiene, ohne
Befestigungskloben

Polsteroptionen

Art.-Nr. 60-800
Polsterbreite 800 mm

Art.-Nr. 1765 / 1780
Softpolster für hohen Liegekomfort
aus Kaltschaum, für Liegenbreite
700 mm / 800 mm,
Polsterstärke 100 mm

Transport- und Aufwachliegen

3-teilige Transport- und Aufwachliege mit fester Höhe

Kopfteillänge: 550 mm

Modell 71-00 weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 71-03 weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 71-04 graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)



Beide Abb.:
Modell 71-00
mit Ausstattungsoption:
Fahrbar auf zentral
feststellbaren Doppelrollen
(1180N), Kopfteilverstellung
durch Gasdruckfeder (1655),
Schiebegriff-Ausführung
verchromt;
Polsterfarbe: 64-708 cherry

Grundausrüstung:

- Liege fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Rollen Ø 100 mm
- Längsverstrebung zur zusätzlichen Stabilisierung
- 1 Schiebegriff, RAL 9006 pulverbeschichtet, angebracht am Fußende (optional am Kopfteil möglich)
- 2 Seitensicherungen seitlich versenkbar, RAL 9006 beschichtet, Länge: 820 mm
- Aufwachliegenpolster
- Dewert-Hygiene-Ausstattung 

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 3-teilig:

- Kopfteil bis 30° positiv verstellbar durch 2 Sicherheits-Zahnrasten
- Kopfteillänge: 550 mm
- Mittelteil fest
- Mittelteillänge: 450 mm
- Fußteil stufenlos durch Gasdruckfeder von 0° bis +30° verstellbar
- Fußteillänge: 950 mm
- Polsterteilstärke: 80 mm



Technische Daten:

- Länge der Liegefläche: 1.950 mm | Gesamtlänge der Liege: 2.080 mm
- Breite der Liegefläche: 650 mm | Gesamtbreite: 750 mm | optional Breite 800 mm, dann Gesamtbreite 900 mm
- Höhe: 690 mm
- Belastbarkeit: 250 kg 

Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)



Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 1120-EF
Entfall der serienmäßigen Fahrbarkeit



Art.-Nr. 1140-11
Fahrbar auf 4 Rollen einzeln feststellbar, Ø 125 mm



Art.-Nr. 1180N
Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 100 mm



Art.-Nr. 1185
Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 125 mm

Seitensicherung



Art.-Nr. 1088-EF
Entfall der serienmäßigen Seitensicherungen



Art.-Nr. 1040
1 Stück Seitensicherung abklappbar mit Halterung, komplett aus Stahlrohr, Länge 700 mm



Art.-Nr. 1005
1 Stück Seitensicherung für Normschiene mit Befestigungskloben, komplett aus Stahlrohr, Länge 800 mm

Kopfteiloptionen



Art.-Nr. 1655-20
Komfortable Kopfteilverstellung stufenlos durch Gasdruckfeder von 0° bis +55°



Art.-Nr. 1610
Nasenschlitz

Art.-Nr. 1620
Füllpolster

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 1210 / 1220
Papierrollenhalter, für Liegenbreite 650 mm / 800 mm

Wandschutzelemente



Art.-Nr. 1172
4 Wandabweisräder Ø 100 mm

Anbau-Elemente



Art.-Nr. 1810
1 zusätzlicher Schiebegriff



Art.-Nr. 1850
Ablagekorb mit Halterung, Abmessungen: L. 530 x B. 370 x H. 80 mm



Art.-Nr. 1410
1 Stück Normschiene 350 mm lang



Art.-Nr. 1430
1 Befestigungskloben für Normschiene, Aufnahme passend für Rohr-Ø 18 mm



Art.-Nr. 1450
1 Infusionsstange für Normschiene, ohne Befestigungskloben

Polsteroptionen

Art.-Nr. 71-800
Polsterbreite 800 mm

Art.-Nr. 1765 / 1780
Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm, Polsterstärke 100 mm

Transport- und Aufwachliegen

3-teilige Transport- und Aufwachliege mit fester Höhe

Kopfteillänge: 750 mm

Modell 70-00 weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 70-03 weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 70-04 graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)



Beide Abb.:
Modell 70-00
mit Ausstattungsoption:
Zusätzlicher 2. Schiebegriff
(1810),
Schiebegriff-Ausführung
verchromt;
Polsterfarbe: 64-717 deep sea

Grundausrüstung:

- Liege fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Rollen Ø 100 mm
- Längsverstrebung zur zusätzlichen Stabilisierung
- 1 Schiebegriff, RAL 9006 pulverbeschichtet, angebracht am Fußende (optional am Kopfteil möglich)
- 2 Seitensicherungen seitlich versenkbar, RAL 9006 beschichtet, Länge: 820 mm
- Aufwachliegenpolster
- Dewert-Hygiene-Ausstattung 



Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 3-teilig:

- Kopfteil stufenlos von 0° bis +75° durch Gasdruckfeder verstellbar (Sitzposition)
- Kopfteillänge: 750 mm
- Mittelteil fest
- Mittelteillänge: 300 mm
- Fußteil stufenlos von 0° bis +30° durch Gasdruckfeder verstellbar
- Fußteillänge: 900 mm
- Polsterteilstärke: 80 mm

Technische Daten:

- Länge der Liegefläche: 1.950 mm | Gesamtlänge der Liege: 2.080 mm
- Breite der Liegefläche: 650 mm | Gesamtbreite: 750 mm | optional Breite 800 mm, dann Gesamtbreite 900 mm
- Höhe: 690 mm
- Belastbarkeit: 250 kg 

Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)



Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 1120-EF
Entfall der serienmäßigen
Fahrbarkeit



Art.-Nr. 1140-11
Fahrbar auf 4 Rollen
einzeln feststellbar,
Ø 125 mm



Art.-Nr. 1180N
Fahrbar auf 4 Doppelrollen
zentral feststellbar, Ø 100
mm



Art.-Nr. 1185
Fahrbar auf 4 Comfort-Doppel-
rollen zentral feststellbar,
Ø 125 mm

Seitensicherung



Art.-Nr. 1088-EF
Entfall der serienmäßigen
Seitensicherungen



Art.-Nr. 1040
1 Stück Seitensicherung abklappbar mit
Halterung, komplett aus Stahlrohr,
Länge 700 mm



Art.-Nr. 1005
1 Stück Seitensicherung für
Normschiene mit Befestigungskloben,
komplett aus Stahlrohr, Länge 800 mm

Kopfteiloptionen



Art.-Nr. 1610
Nasenschlitz

Art.-Nr. 1620
Füllpolster

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 1210 / 1220
Papierrollenhalter,
für Liegenbreite
650 mm / 800 mm

Wandschutzelemente



Art.-Nr. 1172
4 Wandabweisräder Ø 100 mm

Anbau-Elemente



Art.-Nr. 1810
1 zusätzlicher Schiebegriff



Art.-Nr. 1850
Ablagekorb mit Halterung,
Abmessungen:
L. 530 x B. 370 x H. 80 mm



Art.-Nr. 1410
1 Stück Normschiene 350
mm lang



Art.-Nr. 1430
1 Befestigungskloben für
Normschiene, Aufnahme
passend für Rohr-Ø 18 mm



Art.-Nr. 1450
1 Infusionsstange für
Normschiene, ohne
Befestigungskloben

Polsteroptionen

Art.-Nr. 70-800
Polsterbreite 800 mm

Art.-Nr. 1765 / 1780
Softpolster für hohen Liegekomfort
aus Kaltschaum, für Liegenbreite
700 mm / 800 mm,
Polsterstärke 100 mm


Serie 2000XL: Transport- und Aufwachliegen mit hydraulischer Höhenverstellung



Abb. mit speziellem Sonderzubehör:
Gurtführungen unterhalb der Seitensicherung;
Schiebegriff-Ausführung verchromt

Technik:

- Höhenverstellung durch starke Hydraulikpumpe mit optimaler Übersetzung für hohe Gewichte
- Stabile Tritthebel **beidseitig** der Liegefläche
- Belastbarkeit: 250 kg 
- Liegengestell mit äußerst stabilem **Twin-Frame-Scherensystem**
- Verwendung dickwandiger Stahlrohre mit Wandstärken bis 3,5 mm und massiver Achsen mit Ø 20 mm
- Optimale Standsicherheit durch ausgewogenes Eigengewicht und weit auseinander stehende Rollen
- Robuste Gestellkonstruktion, seit vielen Jahren im anspruchsvollen Krankenhaus-Alltag bewährt
- Verschleißfestes Führungssystem am Unter- und Obergestell durch Einsatz von Wälzlagerrollen, spielfrei eingestellt zur Aufnahme der vertikalen und horizontalen Kräfte

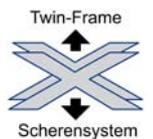


Ausstattung:

- **Aufwachliegenpolster:**
Hoher Liegekomfort durch Liegenpolster in halbsoft-Ausführung durch hochwertige Kaltschaumauflage
- **Fahrbar** auf 4 zentral feststellbaren Comfort-Doppelrollen Ø 125 mm
- 2 **Seitensicherungen** unter Polsterniveau absenkbar, komplett aus Stahlrohr, ohne brechende Kunststoffteile, verchromt, Länge: 1.060 mm (5 Streben)
- Sehr gutes Handling beim Schieben der Liege durch 2 **Schiebegriffe**, platziert an Kopf- und Fußende, RAL 9006 pulverbeschichtet
- Längs- und querseitiger Wandschutz durch großdimensionierte **Wandabweisräder**
- **Dewert-Hygiene-Ausstattung**



Weitere Ausstattungsoptionen finden Sie auf den folgenden Seiten

*****Alle Abb. dieser Seite zeigen die verchromte Schiebegriff-Ausführung. Standardmäßig sind die Schiebegriffe weißaluminium pulverbeschichtet.*****

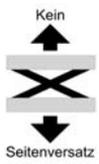

Serie 2000XL: Transport- und Aufwachliegen mit hydraulischer Höhenverstellung



Varianten:



Kopfteillänge 550 mm:

- Zwei stabile, parallel angebrachte Sicherheits-Raster zur positiven Kopfteilverstellung
Optional: Komfortable Verstellung durch Gasdruckfeder stufenlos bis +40°

Kopfteillänge 750 mm:

- Komfortable Verstellung durch Gasdruckfeder stufenlos bis +75° zur Sitzposition des Patienten



Mit 2-teiliger Liegefläche:

- Fußteil fest, nicht verstellbar

Mit 3-teiliger Liegefläche:

- Fußteil positiv verstellbar durch Gasdruckfeder bis +35°
- Mittelteil fest



Mit 2-teiliger Liegefläche und Trendelenburg-Einstellung:

- Gesamte Liegefläche neigbar bis 12° (Trendelenburg) durch Gasdruckfeder



Mit 2-teiliger Liegefläche, Trendelenburg-Einstellung und abnehmbarer Polsterauflage:

- Abnehmbare Soft-Polsterauflage, 10 cm stark
- Polster komplett aus Kaltschaum bestehend, ringsum mit Polsterbezugsmaterial bezogen
- Klettbefestigung und Reißverschluss an der Unterseite
- Hochfeste HPL-Trägerplatten (desinfektionsmittelfest) als Auflage



Serie 2000XL: Transport- und Aufwachliegen


2-teilige Transport- und Aufwachliege mit hydraulischer Höhenverstellung

Kopfteillänge: 550 mm

Modell 2220-00XL/H weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 2220-03XL/H weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 2220-04XL/H graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

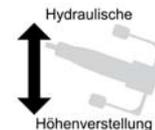

Modell 2220-00XL/H
mit Ausstattungsoption:
Ablegekorb (1850),
Schiebegriff-Ausführung
verchromt;
Polsterfarbe: 64-717 deep sea

Grundausrüstung:

- Tritthebel zur hydraulischen Höhenverstellung beidseitig der Liegefläche
- Liege fahrbar auf 4 zentral feststellbaren Comfort-Doppelrollen Ø 125 mm
- 2 Schiebegriffe an Kopf- und Fußteil, RAL 9006 pulverbeschichtet
- 2 Seitensicherungen seitlich unter Polsterniveau absenkbar, verchromt, Länge: 1.060 mm
- 4 Wandabweisräder, Ø 200 mm
- Aufwachliegenpolster
- Dewert-Hygiene-Ausstattung

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil bis 30° positiv verstellbar durch 2 Sicherheits-Zahnraster
- Kopfteillänge: 550 mm
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 1.400 mm
- Polsterteilstärke: 80 mm



Modell 2220-00XL/H mit Ausstattungsoption:
Entfall der serienmäßigen Seitensicherung, Seitensicherung
abklappbar (2x1040), Papierrollenhalter (1267K), Fahrbar
auf zentral feststellbaren Doppelrollen (1180N), Schiebegriff-
Ausführung verchromt; 64-708 cherry


Technische Daten:

- Manuell höhenverstellbar von 570 mm bis 990 mm durch Hydraulikpumpe mit 10.000 N Druckkraft
- Länge der Liegefläche: 1.950 mm | Gesamtlänge der Liege: 2.200 mm
- Breite der Liegefläche: 650 mm | Gesamtbreite: 800 mm | optional Breite 800 mm, dann Gesamtbreite 950 mm
- Belastbarkeit: 250 kg

Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatter Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie

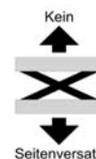

Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 1185-EF
Entfall der serienmäßigen
Fahrbarkeit



Art.-Nr. 1195
Fahrbar auf 4 Comfort-
Rollen zentral feststellbar,
Ø 150 mm, Rollen leitfähig,
Grundhöhe + 70 mm



Art.-Nr. 1199
Fußbügel zur zentralen
Bremsbetätigung am
Fußende



Art.-Nr. 1190
5. Rolle, gefedert und
zuschaltbar, mittig des
Untergestells

Seitensicherung



Art.-Nr. 1080-EF
Entfall der serienmäßigen
Seitensicherung (1 Stück)



Art.-Nr. 1040
1 Stück Seitensicherung abklappbar mit
Halterung, komplett aus Stahlrohr, Länge
700 mm, dann mit Wandabweisrädern
Ø 150 mm



Art.-Nr. 1005
1 Stück Seitensicherung für
Normschiene mit Befestigungskloben,
komplett aus Stahlrohr, Länge 800 mm

Kopfteiloptionen



Art.-Nr. 1655-30
Komfortable Kopfteilverstellung
stufenlos durch Gasdruckfeder von 0°
bis +60°

Polsteroptionen

Art.-Nr. 2220-800
Polsterbreite 800 mm,
Gesamtbreite der Liege 950 mm

Art.-Nr. 1765 / 1780
Softpolster für hohen Liegekomfort
aus Kaltschaum, für Liegenbreite
650 mm / 800 mm,
Polsterstärke 100 mm

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 1267K / 1268K
Papierrollenhalter, Befestigung
unter dem Kopfteil, für Liegen-
breite 650 mm / 800 mm

Anbau-Elemente



Art.-Nr. 1410
1 Stück Normschiene 350 mm lang



Art.-Nr. 1430
1 Befestigungskloben für
Normschiene, Aufnahme passend für
Rohr-Ø 18 mm



Art.-Nr. 1450
1 Infusionsstange für Normschiene,
ohne Befestigungskloben



Art.-Nr. 1850
Ablagekorb mit Halterung,
Abmessungen:
L. 530 x B. 370 x H. 80 mm

Serie 2000XL: Transport- und Aufwachliegen


2-teilige Transport- und Aufwachliege mit hydraulischer Höhenverstellung

Kopfteillänge: 750 mm

Modell 2210-00XL/H weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 2210-03XL/H weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 2210-04XL/H graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

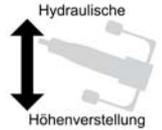

Beide Abb.:

Modell 2210-00XL/H

mit Ausstattungsoptionen:

Fußbügel zur zentralen Bremsbetätigung (1199), Normschiene (beidseitig, 2 x 1410), Ablagekorb (1850), Schiebegriff-Ausführung verchromt; Polsterfarbe: 64-717 deep sea

Abb. mit speziellem Sonderzubehör:

Gurtführungen unterhalb der Seitensicherung



Grundausrüstung:

- Tritthebel zur hydraulischen Höhenverstellung beidseitig der Liegefläche
- Liege fahrbar auf 4 zentral feststellbaren Comfort-Doppelrollen Ø 125 mm
- 2 Schiebegriffe an Kopf- und Fußteil, RAL 9006 pulverbeschichtet
- 2 Seitensicherungen seitlich unter Polsterniveau absenkbar, verchromt, Länge: 1.060 mm
- 4 Wandabweisräder, Ø 200 mm
- Aufwachliegenpolster
- Dewert-Hygiene-Ausstattung 

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von 0° bis +75° verstellbar (Sitzposition)
- Kopfteillänge: 750 mm
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 1.200 mm
- Polsterteilstärke: 80 mm




Technische Daten:

- Manuell höhenverstellbar von 630 mm bis 1.050 mm durch Hydraulikpumpe mit 10.000 N Druckkraft
- Länge der Liegefläche: 1.950 mm | Gesamtlänge der Liege: 2.200 mm
- Breite der Liegefläche: 650 mm | Gesamtbreite: 800 mm | optional Breite 800 mm, dann Gesamtbreite 950 mm
- Belastbarkeit: 250 kg 

Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatter Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie

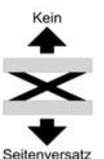

Kein
Seitenversatz

Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 1185-EF
Entfall der serienmäßigen
Fahrbarkeit



Art.-Nr. 1195
Fahrbar auf 4 Comfort-
Rollen zentral feststellbar,
Ø 150 mm, Rollen leitfähig,
Grundhöhe + 70 mm



Art.-Nr. 1199
Fußbügel zur zentralen
Bremsbetätigung am
Fußende



Art.-Nr. 1190
5. Rolle, gefedert und
zuschaltbar, mittig des
Untergestells

Seitensicherung



Art.-Nr. 1080-EF
Entfall der serienmäßigen
Seitensicherung (1 Stück)



Art.-Nr. 1040
1 Stück Seitensicherung abklappbar mit
Halterung, komplett aus Stahlrohr, Länge
700 mm, dann mit Wandabweisrädern
Ø 150 mm



Art.-Nr. 1005
1 Stück Seitensicherung für
Normschiene mit Befestigungskloben,
komplett aus Stahlrohr, Länge 800 mm

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 1267K / 1268K
Papierrollenhalter, Befestigung
unter dem Kopfteil, für Liegen-
breite 650 mm / 800 mm

Polsteroptionen

Art.-Nr. 2210-800
Polsterbreite 800 mm,
Gesamtbreite der Liege 950 mm

Art.-Nr. 1765 / 1780
Softpolster für hohen Liegekomfort
aus Kaltschaum, für Liegenbreite
650 mm / 800 mm,
Polsterstärke 100 mm

Anbau-Elemente



Art.-Nr. 1410
1 Stück Normschiene 350 mm lang



Art.-Nr. 1430
1 Befestigungskloben für
Normschiene, Aufnahme passend für
Rohr-Ø 18 mm



Art.-Nr. 1450
1 Infusionsstange für Normschiene,
ohne Befestigungskloben



Art.-Nr. 1850
Ablagekorb mit Halterung,
Abmessungen:
L. 530 x B. 370 x H. 80 mm

Serie 2000XL: Transport- und Aufwachliegen


3-teilige Transport- und Aufwachliege mit hydraulischer Höhenverstellung

Kopfteillänge: 750 mm

Modell 2250-00XL/H weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 2250-03XL/H weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 2250-04XL/H graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

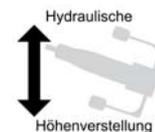

Alle Abb.:
Modell 2250-00XL/H
mit Ausstattungsoption:
Paperrollenhalter (1267K),
Schiebegriff-Ausführung
verchromt;
Polsterfarbe: 64-717 deep sea

Grundausrüstung:

- Tritthebel zur hydraulischen Höhenverstellung beidseitig der Liegefläche
- Liege fahrbar auf 4 zentral feststellbaren Comfort-Doppelrollen Ø 125 mm
- 2 Schiebegriffe an Kopf- und Fußteil, RAL 9006 pulverbeschichtet
- 2 Seitensicherungen seitlich unter Polsterniveau absenkbar, verchromt, Länge: 1.060 mm
- 4 Wandabweisräder, Ø 200 mm
- Aufwachliegenpolster
- Dewert-Hygiene-Ausstattung



Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 3-teilig:

- Kopfteil stufenlos von 0° bis +75° durch Gasdruckfeder verstellbar (Sitzposition)
- Kopfteillänge: 750 mm
- Mittelteil: fest
- Mittelteillänge: 300 mm
- Fußteil stufenlos von 0° bis +35° durch Gasdruckfeder verstellbar
- Fußteillänge: 900 mm
- Polsterteilstärke: 80 mm




Technische Daten:

- Manuell höhenverstellbar von 630 mm bis 1.050 mm durch Hydraulikpumpe mit 10.000 N Druckkraft
- Länge der Liegefläche: 1.950 mm | Gesamtlänge der Liege: 2.200 mm
- Breite der Liegefläche: 650 mm | Gesamtbreite: 800 mm | optional Breite 800 mm, dann Gesamtbreite 950 mm
- Belastbarkeit: 250 kg

Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandora Plus mit samtig-glatter Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie

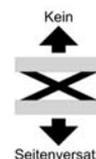

Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 1185-EF
Entfall der serienmäßigen Fahrbarkeit



Art.-Nr. 1195
Fahrbar auf 4 Comfort-Rollen zentral feststellbar, Ø 150 mm, Rollen leitfähig, Grundhöhe + 70 mm



Art.-Nr. 1199
Fußbügel zur zentralen Bremsbetätigung am Fußende



Art.-Nr. 1190
5. Rolle, gefedert und zuschaltbar, mittig des Untergestells

Seitensicherung



Art.-Nr. 1080-EF
Entfall der serienmäßigen Seitensicherung (1 Stück)



Art.-Nr. 1040
1 Stück Seitensicherung abklappbar mit Halterung, komplett aus Stahlrohr, Länge 700 mm, dann mit Wandabweisrädern Ø 150 mm



Art.-Nr. 1005
1 Stück Seitensicherung für Normschiene mit Befestigungskloben, komplett aus Stahlrohr, Länge 800 mm

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 1267K / 1268K
Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil, für Liegenbreite 650 mm / 800 mm

Polsteroptionen

2250-800
Polsterbreite 800 mm, Gesamtbreite der Liege 950 mm

Art.-Nr. 1765 / 1780
Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, für Liegenbreite 650 mm / 800 mm, Polsterstärke 100 mm

Anbau-Elemente



Art.-Nr. 1410
1 Stück Normschiene 350 mm lang



Art.-Nr. 1430
1 Befestigungskloben für Normschiene, Aufnahme passend für Rohr-Ø 18 mm



Art.-Nr. 1450
1 Infusionsstange für Normschiene, ohne Befestigungskloben



Art.-Nr. 1850
Ablagekorb mit Halterung, Abmessungen: L. 530 x B. 370 x H. 80 mm

Serie 2000XL: Transport- und Aufwachliegen


2-teilige Transport- und Aufwachliege mit hydraulischer Höhenverstellung und Trendelenburg-Einstellung

Kopfteillänge: 550 mm

Modell 2320-00XL/H weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 2320-03XL/H weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 2320-04XL/H graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

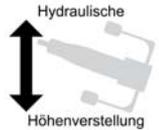

Alle Abb:
Modell 2320-00XL/H
mit Ausstattungsoption:
2 Stück Seitensicherungen
abklappbar (2x 1040),
mit Wandabweisrädern
Ø 150 mm,
Schiebegriff-Ausführung
verchromt;
Polsterfarbe: 64-717 deep sea



Grundausrüstung:

- Tritthebel zur hydraulischen Höhenverstellung beidseitig der Liegefläche
- Liege fahrbar auf 4 zentral feststellbaren Comfort-Doppelrollen Ø 125 mm
- 2 Schiebegriffe an Kopf- und Fußteil, RAL 9006 pulverbeschichtet
- 2 Seitensicherungen seitlich unter Polsterniveau absenkbar, verchromt, Länge: 1.060 mm
- 4 Wandabweisräder, Ø 200 mm
- Aufwachliegenpolster
- Dewert-Hygiene-Ausstattung

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos von 0° bis 60° durch Gasdruckfeder verstellbar
- Kopfteillänge: 550 mm
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 1.400 mm
- Liegefläche neigbar bis 12° (Trendelenburg-Einstellung) durch Gasdruckfeder
- Polsterteilstärke: 80 mm


Technische Daten:

- Manuell höhenverstellbar von 640 mm bis 1.060 mm durch Hydraulikpumpe mit 10.000 N Druckkraft
- Länge der Liegefläche: 1.950 mm | Gesamtlänge der Liege: 2.200 mm
- Breite der Liegefläche: 650 mm | Gesamtbreite: 800 mm | optional Breite 800 mm, dann Gesamtbreite 950 mm
- Belastbarkeit: 250 kg

Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie

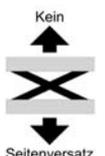

Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 1185-EF
Entfall der serienmäßigen
Fahrbarkeit



Art.-Nr. 1195
Fahrbar auf 4 Comfort-
Rollen zentral feststellbar,
Ø 150 mm, Rollen leitfähig,
Grundhöhe + 70 mm



Art.-Nr. 1199
Fußbügel zur zentralen
Bremsbetätigung am
Fußende



Art.-Nr. 1190
5. Rolle, gefedert und
zuschaltbar, mittig des
Untergestells

Seitensicherung



Art.-Nr. 1080-EF
Entfall der serienmäßigen
Seitensicherung (1 Stück)



Art.-Nr. 1040
1 Stück Seitensicherung abklappbar mit
Halterung, komplett aus Stahlrohr, Länge
700 mm, dann mit Wandabweisrädern
Ø 150 mm



Art.-Nr. 1005
1 Stück Seitensicherung für
Normschiene mit Befestigungskloben,
komplett aus Stahlrohr, Länge 800 mm

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 1267K / 1268K
Papierrollenhalter, Befestigung
unter dem Kopfteil, für Liegen-
breite 650 mm / 800 mm

Polsteroptionen

Art.-Nr. 2320-800
Polsterbreite 800 mm,
Gesamtbreite der Liege 950 mm

Art.-Nr. 1765 / 1780
Softpolster für hohen Liegekomfort
aus Kaltschaum, für Liegenbreite
650 mm / 800 mm,
Polsterstärke 100 mm

Anbau-Elemente



Art.-Nr. 1410
1 Stück Normschiene 350 mm lang



Art.-Nr. 1430
1 Befestigungskloben für
Normschiene, Aufnahme passend für
Rohr-Ø 18 mm



Art.-Nr. 1450
1 Infusionsstange für Normschiene,
ohne Befestigungskloben



Art.-Nr. 1850
Ablagekorb mit Halterung,
Abmessungen:
L. 530 x B. 370 x H. 80 mm

Serie 2000XL: Transport- und Aufwachliegen

2-teilige Transport- und Aufwachliege mit hydraulischer Höhenverstellung und Trendelenburg-Einstellung

Kopfteillänge: 750 mm

Modell 2310-00XL/H weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 2310-03XL/H weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 2310-04XL/H graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)



Beide Abb.:
Modell 2310-00XL/H
mit Ausstattungsoptionen:
Polsterbreite 800 mm (2310-800), Papierrollenhalter (1268K), Normschiene (1410), Ablagekorb (1850), Schiebegriff-Ausführung verchromt;
Polsterfarbe: 64-717 deep sea

Grundausrüstung:

- Tritthebel zur hydraulischen Höhenverstellung beidseitig der Liegefläche
- Liege fahrbar auf 4 zentral feststellbaren Comfort-Doppelrollen Ø 125 mm
- 2 Schiebegriffe an Kopf- und Fußteil, RAL 9006 pulverbeschichtet
- 2 Seitensicherungen seitlich unter Polsterniveau absenkbar, verchromt, Länge: 1.060 mm
- 4 Wandabweisräder, Ø 200 mm
- Aufwachliegenpolster
- Dewert-Hygiene-Ausstattung

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos von 0° bis +75° durch Gasdruckfeder verstellbar (Sitzposition)
- Kopfteillänge: 750 mm
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 1.200 mm
- Liegefläche neigbar bis 12° (Trendelenburg-Einstellung) durch Gasdruckfeder
- Polsterteilstärke: 80 mm



Abb. zusätzlich: Befestigungskloben für Normschiene (1430), Infusionsstange für Normschiene (1450) mit Zubehör


Technische Daten:

- Manuell höhenverstellbar von 640 mm bis 1.060 mm durch Hydraulikpumpe mit 10.000 N Druckkraft
- Länge der Liegefläche: 1.950 mm | Gesamtlänge der Liege: 2.200 mm
- Breite der Liegefläche: 650 mm | Gesamtbreite: 800 mm | optional Breite 800 mm, dann Gesamtbreite 950 mm
- Belastbarkeit: 250 kg

Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie

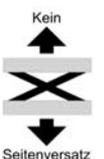

Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 1185-EF
Entfall der serienmäßigen
Fahrbarkeit



Art.-Nr. 1195
Fahrbar auf 4 Comfort-
Rollen zentral feststellbar,
Ø 150 mm, Rollen leitfähig,
Grundhöhe + 70 mm



Art.-Nr. 1199
Fußbügel zur zentralen
Bremsbetätigung am
Fußende



Art.-Nr. 1190
5. Rolle, gefedert und
zuschaltbar, mittig des
Untergestells

Seitensicherung



Art.-Nr. 1080-EF
Entfall der serienmäßigen
Seitensicherung (1 Stück)



Art.-Nr. 1040
1 Stück Seitensicherung abklappbar mit
Halterung, komplett aus Stahlrohr, Länge
700 mm, dann mit Wandabweisrädern
Ø 150 mm



Art.-Nr. 1005
1 Stück Seitensicherung für
Normschiene mit Befestigungskloben,
komplett aus Stahlrohr, Länge 800 mm

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 1267K / 1268K
Papierrollenhalter, Befestigung
unter dem Kopfteil, für Liegen-
breite 650 mm / 800 mm

Polsteroptionen

Art.-Nr. 2310-800
Polsterbreite 800 mm,
Gesamtbreite der Liege 950 mm

Art.-Nr. 1765 / 1780
Softpolster für hohen Liegekomfort
aus Kaltschaum, für Liegenbreite
650 mm / 800 mm,
Polsterstärke 100 mm

Anbau-Elemente



Art.-Nr. 1410
1 Stück Normschiene 350 mm lang



Art.-Nr. 1430
1 Befestigungskloben für
Normschiene, Aufnahme passend für
Rohr-Ø 18 mm



Art.-Nr. 1450
1 Infusionsstange für Normschiene,
ohne Befestigungskloben



Art.-Nr. 1850
Ablagekorb mit Halterung,
Abmessungen:
L. 530 x B. 370 x H. 80 mm

Serie 2000XL: Transport- und Aufwachliegen


2-teilige Transport- und Aufwachliege mit hydraulischer Höhenverstellung, Trendelenburg-Einstellung und abnehmbarer Polsterauflage

Kopfteillänge: 730 mm

Modell 2410-00XL/H weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 2410-03XL/H weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 2410-04XL/H graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

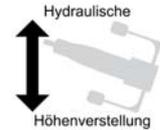

Alle Abb.:
Modell 2410-00XL/H
mit Ausstattungsoption:
Ablagekorb (1850),
Schiebegriff-Ausführung
verchromt;
Polsterfarbe: 64-174 sky



Grundausrüstung:

- Tritthebel zur hydraulischen Höhenverstellung beidseitig der Liegefläche
- Liege fahrbar auf 4 zentral feststellbaren Comfort-Doppelrollen Ø 150 mm, alle Rollen elektrisch leitfähig
- Fußbügel, verchromt, fußseitig am Untergestell zur leichten Betätigung des Zentralfeststellsystems
- Schiebegriffe an Kopf- und Fußteil, RAL 9006 pulverbeschichtet, am Kopfteil 2-teilig
- 2 Seitensicherungen seitlich unter Polsterniveau absenkbar, verchromt, Länge: 1.060 mm
- 4 Wandabweisräder, Ø 200 mm
- Abnehmbare Soft-Polsterauflage
- Dewert-Hygiene-Ausstattung

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos von 0° bis +70° durch Gasdruckfeder verstellbar (Sitzposition)
- Kopfteillänge: 730 mm
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 1.200 mm
- Liegefläche neigbar bis 12° (Trendelenburg-Einstellung) durch Gasdruckfeder
- Besonderheit Soft-Polsterauflage, siehe rechts



Technische Daten:


- Manuell höhenverstellbar von 690 mm bis 1.110 mm durch Hydraulikpumpe mit 10.000 N Druckkraft
- Länge der Liegefläche: 1.930 mm | Gesamtlänge der Liege: 2.030 mm
- Breite der Liegefläche: 650 mm | Gesamtbreite: 800 mm | optional Breite 800 mm, dann Gesamtbreite 950 mm
- Belastbarkeit: 250 kg



Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandora Plus mit samtig-glatter Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie

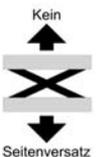

Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeit



Art.-Nr. 1190
5. Rolle, gefedert und zuschaltbar,
mittig des Untergestells

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 1267K / 1268K
Papierrollenhalter, Befestigung
unter dem Kopfteil, für Liegen-
breite 650 mm / 800 mm

Ablagekorb



Art.-Nr. 1850
Ablagekorb mit Halterung,
Abmessungen:
L. 530 x B. 370 x H. 80 mm

Anbau-Elemente



Art.-Nr. 1410
1 Stück Normschiene 350 mm lang



Art.-Nr. 1430
1 Befestigungskloben für
Normschiene, Aufnahme passend für
Rohr-Ø 18 mm



Art.-Nr. 1450
1 Infusionsstange für Normschiene,
ohne Befestigungskloben

Polsteroptionen

Art.-Nr. 2410-800
Polsterbreite 800 mm, Gesamtbreite der Liege 950 mm

Besonderheit Soft-Polsterauflage:

- Abnehmbare Soft-Polsterauflage, 10 cm stark
- Polster komplett aus Kaltschaum bestehend, ringsum mit Polsterbezugsmaterial bezogen
- Klettbefestigung und Reißverschluss an der Unterseite
- Kopf- und Fußteil fugenfrei aneinander hängend
- Hochfeste HPL-Trägerplatten (desinfektionsmittelfest) als Auflage





Serie DX1 Transport- und Aufwachliegen mit hydraulischer Höhenverstellung



Technik:



- Höhenverstellung durch starke Hydraulikpumpe mit optimaler Übersetzung für hohe Gewichte
- Stabile Tritthebel **beidseitig** der Liegefläche
- Belastbarkeit: 225 kg 
- Liegengestell mit stabilem **Single-Frame-Scherensystem**
- Verwendung dickwandiger Stahlrohre mit Wandstärken bis 3,5 mm und massiver Achsen mit Ø 20 mm
- Optimale Standsicherheit durch ausgewogenes Eigengewicht und weit auseinander stehende Rollen
- Robuste Gestellkonstruktion, seit vielen Jahren im anspruchsvollen Krankenhaus-Alltag bewährt
- Verschleißfestes Führungssystem am Unter- und Obergestell durch Einsatz von Wälzlagerrollen, spielfrei eingestellt zur Aufnahme der vertikalen und horizontalen Kräfte



Ausstattung:



- **Aufwachliegenpolster:**
Hoher Liegekomfort durch Liegenpolster in halbsoft-Ausführung durch hochwertige Kaltschaumauflage
- **Fahrbar** auf 4 zentral feststellbaren Doppellrollen Ø 100 mm
- 2 **Seitensicherungen** unter Polsterniveau absenkbar, komplett aus Stahlrohr, ohne brechende Kunststoffteile, RAL 9006 pulverbeschichtet, Länge: 820 mm (4 Streben)
- Sehr gutes Handling beim Schieben der Liege durch vier an den Rahmenaußenpunkten platzierte **Schiebegriffe**, RAL 9006 pulverbeschichtet
- Längs- und querseitiger Wandschutz durch großdimensionierte **Wandabweisräder**
- **Dewert-Hygiene-Ausstattung**



Weitere Ausstattungsoptionen finden Sie auf den folgenden Seiten

Serie DX1: Transport- und Aufwachliegen mit hydraulischer Höhenverstellung

Varianten:

Kopfteillänge 550 mm:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von 0° bis +65° verstellbar



Kopfteillänge 750 mm:

- Komfortable Verstellung durch Gasdruckfeder stufenlos bis +75° zur Sitzposition des Patienten




Mit 2-teiliger Liegefläche:

- Fußteil fest, nicht verstellbar

Mit 3-teiliger Liegefläche:

- Fußteil positiv verstellbar durch Gasdruckfeder bis +35°
- Mittelteil fest
- Verstellbares Fußteil mit zusätzlichem Stahlrohrrahmen für hohe Verwindungssteifigkeit
- Druckstabile Gasdruckfeder für schwingfreies Arbeiten am Fußbereich
- Freie, nicht störende Zugänglichkeit des Bediengriffs am Fußende

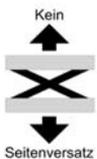



Serie DX1


2-teilige Transport- und Aufwachliege

Mit hydraulischer Höhenverstellung

Modell 1090-00/H weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 1090-03/H weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 1090-04/H grau aluminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

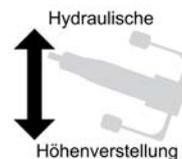

Beide Abb.:
Modell 1090-04/H
mit Ausstattungsoption:
Ablagekorb mit Halterung (B1850)

Grundausrüstung:

- Tritthebel zur hydraulischen Höhenverstellung beidseitig der Liegefläche
- Fahrbar auf 4 Doppelrollen, Ø 100 mm, zentral feststellbar, 1 Rolle mit Richtungsfeststeller
- Schiebegriffe an Kopf- und Fußteil, RAL 9006 pulverbeschichtet
- 2 Seitensicherungen seitlich unter Polsterniveau absenkbar, RAL 9006 pulverbeschichtet, Länge: 820 mm
- 4 Wandabweisräder, Ø 200 mm
- Polster mittelweich durch hochwertige Kaltschaumauflage
- Dewert-Hygiene-Ausstattung

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos von 0° bis +65° durch Gasdruckfeder verstellbar
- Kopfteillänge: 550 mm
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 1.400 mm
- Polsterteilstärke: 70 mm



Technische Daten:

- Manuell höhenverstellbar von 500 mm bis 950 mm durch Hydraulikpumpe mit 10.000 N
- Breite der Liegefläche: 700 mm, Gesamtbreite: 780 mm
- Länge der Liegefläche: 1.950 mm, Gesamtlänge: 2.060 mm
- Belastbarkeit: 225 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet

Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandora Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 1181
Entfall der serienmäßigen
Fahrbarkeit



Art.-Nr. B1185
Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen
mit Zentralfeststellsystem,
Ø 125 mm, Grundhöhe + 30 mm



Art.-Nr. B1199
Fußbügel zur zentralen
Bremsbetätigung am Fußende

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 011K / 013K
Papierrollenhalter, Befestigung unter dem
Kopfteil,
für Liegenbreite 700 mm / 800 mm

Polsteroptionen

Art.-Nr. 1090-016
Liegenbreite 800 mm

Art.-Nr. B1770 / B1780
Softpolster für hohen Liegekomfort
aus Kaltschaum,
für Liegenbreite 700 mm / 800 mm,
Polsterstärke 80 mm

Anbau-Elemente



Art.-Nr. B1410
1 Stück Normschiene 350 mm lang



Art.-Nr. B1430
1 Befestigungskloben für
Normschiene, Aufnahme passend für
Rohr-Ø 18 mm



Art.-Nr. B1450
1 Infusionsstange für Normschiene,
ohne Befestigungskloben



Art.-Nr. B1850
Ablagekorb mit Halterung,
Abmessungen:
L. 530 x B. 370 x H. 80 mm

NEU

Serie DX1


2-teilige Transport- und Aufwachliege

Mit hydraulischer Höhenverstellung

Modell 1093-00/H weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 1093-03/H weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 1093-04/H grau aluminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

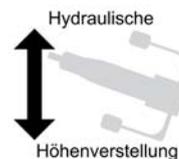

Beide Abb.:
Modell 1093-04/H
in Grundausstattung;
Polsterfarbe: 64-712 slate grey


Grundausstattung:

- Tritthebel zur hydraulischen Höhenverstellung beidseitig der Liegefläche
- Fahrbar auf 4 Doppelrollen, Ø 100 mm, zentral feststellbar, 1 Rolle mit Richtungsfeststeller
- Schiebegriffe an Kopf- und Fußteil, RAL 9006 pulverbeschichtet
- 2 Seitensicherungen seitlich unter Polsterniveau absenkbar, RAL 9006 pulverbeschichtet, Länge: 820 mm
- 4 Wandabweisräder, Ø 200 mm
- Polster mittelweich durch hochwertige Kaltschaumauflage
- Dewert-Hygiene-Ausstattung

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos von 0° bis +75° durch Gasdruckfeder verstellbar (Sitzposition)
- Kopfteillänge: 750 mm
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 1.200 mm
- Polsterteilstärke: 70 mm

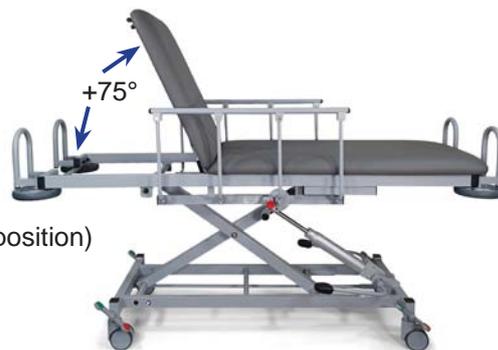

Technische Daten:

- Manuell höhenverstellbar von 540 mm bis 990 mm durch Hydraulikpumpe mit 10.000 N
- Breite der Liegefläche: 700 mm, Gesamtbreite: 780 mm
- Länge der Liegefläche: 1.950 mm, Gesamtlänge: 2.060 mm
- Belastbarkeit: 225 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet

Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 1181
Entfall der serienmäßigen
Fahrbarkeit



Art.-Nr. B1185
Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen
mit Zentralfeststellsystem,
Ø 125 mm, Grundhöhe + 30 mm



Art.-Nr. B1199
Fußbügel zur zentralen
Bremsbetätigung am Fußende

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 011K / 013K
Papierrollenhalter, Befestigung unter dem
Kopfteil,
für Liegenbreite 700 mm / 800 mm

Polsteroptionen

Art.-Nr. 1093-016
Liegenbreite 800 mm

Art.-Nr. B1770 / B1780
Softpolster für hohen Liegekomfort
aus Kaltschaum,
für Liegenbreite 700 mm / 800 mm,
Polsterstärke 80 mm

Anbau-Elemente



Art.-Nr. B1410
1 Stück Normschiene 350 mm lang



Art.-Nr. B1430
1 Befestigungskloben für
Normschiene, Aufnahme passend für
Rohr-Ø 18 mm



Art.-Nr. B1450
1 Infusionsstange für Normschiene,
ohne Befestigungskloben




Art.-Nr. B1850
Ablagekorb mit Halterung,
Abmessungen:
L. 530 x B. 370 x H. 80 mm



Serie DX1

3-teilige Transport- und Aufwachliege Mit hydraulischer Höhenverstellung

- Modell 1095-00/H weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)
- Modell 1095-03/H weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)
- Modell 1095-04/H grau aluminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

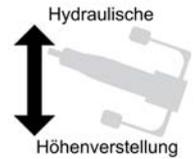

Beide Abb.:
Modell 1095-00/H
mit Ausstattungsoptionen:
Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen mit Zentralfeststellsystem (B1185), Normschiene (B1410);
Polsterfarbe: 64-713 corn

Grundausrüstung:

- Tritthebel zur hydraulischen Höhenverstellung beidseitig der Liegefläche
- Fahrbar auf 4 Doppelrollen, Ø 100 mm, zentral feststellbar, 1 Rolle mit Richtungsfeststeller
- Schiebegriffe an Kopf- und Fußteil, RAL 9006 pulverbeschichtet
- 2 Seitensicherungen seitlich unter Polsterniveau absenkbar, RAL 9006 pulverbeschichtet, Länge: 820 mm
- 4 Wandabweisräder, Ø 200 mm
- Polster mittelweich durch hochwertige Kaltschaumauflage
- Dewert-Hygiene-Ausstattung

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 3-teilig:

- Kopfteil stufenlos von 0° bis +65° durch Gasdruckfeder verstellbar
- Kopfteillänge: 550 mm
- Mittelteil fest
- Mittelteillänge: 480 mm
- Fußteil stufenlos durch Gasdruckfeder von 0° bis +50° verstellbar
- Fußteillänge: 920 mm
- Polsterteilstärke: 70 mm




Technische Daten:

- Manuell höhenverstellbar von 520 mm bis 970 mm durch Hydraulikpumpe mit 10.000 N
- Breite der Liegefläche: 700 mm, Gesamtbreite: 780 mm
- Länge der Liegefläche: 1.950 mm, Gesamtlänge: 2.060 mm
- Belastbarkeit: 225 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet
Kopfteil belastbar bis 90 kg

Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatter Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie

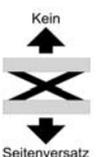

Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 1181
Entfall der serienmäßigen
Fahrbarkeit



Art.-Nr. B1185
Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen
mit Zentralfeststellsystem,
Ø 125 mm, Grundhöhe + 30 mm



Art.-Nr. B1199
Fußbügel zur zentralen
Bremsbetätigung am Fußende

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 011K / 013K
Papierrollenhalter, Befestigung unter dem
Kopfteil,
für Liegenbreite 700 mm / 800 mm

Polsteroptionen

Art.-Nr. 1095-017
Liegenbreite 800 mm

Art.-Nr. B1770 / B1780
Softpolster für hohen Liegekomfort
aus Kaltschaum,
für Liegenbreite 700 mm / 800 mm,
Polsterstärke 80 mm

Anbau-Elemente



Art.-Nr. B1410
1 Stück Normschiene 350 mm lang



Art.-Nr. B1430
1 Befestigungskloben für
Normschiene, Aufnahme passend für
Rohr-Ø 18 mm



Art.-Nr. B1450
1 Infusionsstange für Normschiene,
ohne Befestigungskloben

+ Weiteres Zubehör

Keilkissen, Halbrollen, Rollen, Kissen



Art.-Nr. 1211-..*
Keilkissen,
Abm. (L x B x H):
400 x 400 x 100 - 10 mm



Art.-Nr. 1113-..*
Halbrolle,
Abm. (L x B x H):
570 x 200 x 95 mm



Art.-Nr. 1111-..*
Nackenrolle,
Abm.: L 570 x Ø 150 mm



Art.-Nr. 1112-..*
Knierolle,
Abm.: L 570 x Ø 200 mm



Art.-Nr. 1314-..*
Kissen, Klettbefestigung,
Inlett mit
Polyesterfüllung,
Abm. (L x B):
400 x 400 mm

*Der Artikelnummer bitte die jeweilige Nummer der Bezugsfarbe anfügen.

Polsterschutzmatten



Art.-Nr. 1890
Polsterschutzmatte, aus Klarsicht-PVC-Folie, 0,8 mm Stärke,
Abm.: 700 x 600 mm

Die gesamte Dewert-Produktpalette mit zusätzlichen Zubehörartikeln finden Sie auf unserer Internetseite und in den weiteren Katalogen. Wir freuen uns auf Sie!





K.H. Dewert GmbH
Vollmestraße 7
33649 Bielefeld
Germany

Postfach 14 40 28
33634 Bielefeld
Germany

Telefon + 49 (0) 5 21 / 4 00 27-0
Fax + 49 (0) 5 21 / 4 00 27-27

Internet: www.khdewert.de
E-Mail: info@khdewert.de
YouTube: K.H. Dewert



... MIT FESTER HÖHE



Änderungen der technischen Daten und Irrtümer vorbehalten.

TRANSPORT- UND AUFWACHLIEGEN



... MIT HYDRAULISCHER HÖHENVERSTELLUNG

