

SERIE DFH -

DEWERT-UNIVERSAL-LIEGEN MIT FESTER HÖHE

2021.1



Präzisions-
Stahlrohrmöbel




LANGLEBIG

ROBUST

PFLEGELEICHT

... MIT 2-TEILIGER LIEGEFLÄCHE

... MIT 3-TEILIGER LIEGEFLÄCHE

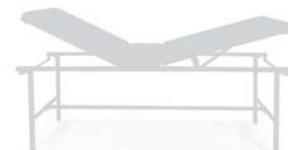

Neue Serie DFH - Dewert-Universal-Liegen mit fester Höhe

Inhalt



Gute Gründe für eine Universal-Liege der Serie DFH	3
--	---



Universelle Behandlungs- und Untersuchungsliegen aus Vierkantrrohr

2-teilige Liegen mit fester Höhe:

- Modell 21, 22, 32, 36
Kopfteillänge: 550 mm, positiv verstellbar 6
- Modell 20
Kopfteillänge: 750 mm, positiv verstellbar 8
- Modell 27, 37
Kopfteillänge: 550 mm, positiv und negativ verstellbar 10

3-teilige Liegen mit fester Höhe:

- Modell 31
Kopfteillänge: 550 mm, positiv verstellbar 12
- Modell 30
Kopfteillänge: 750 mm, positiv verstellbar 14

NEU



Universelle Behandlungs- und Untersuchungsliegen aus Rundrohr

2-teilige Liegen mit fester Höhe:

- Modell 106, 107
Kopfteillänge: 550 mm, positiv verstellbar 16

3-teilige Liegen mit fester Höhe:

- Modell 120
Kopfteillänge: 550 mm, positiv verstellbar 18
- Modell 119
Kopfteillänge: 550 mm, positiv und negativ verstellbar 20

Universelle Kurzliegen zur Behandlung und Untersuchung

1-teilige Liegen mit fester Höhe:

- Modell 16
Vierkantrrohr 22

3-teilige Liegen mit fester Höhe und **variabler Länge**:

- Modell 113, 114
Kopfteillänge: 550 mm, Fußteil senkrecht abklappbar, Vierkantrrohr 24
- Modell 121
Kopfteillänge: 550 mm, Fußteil senkrecht abklappbar, Rundrohr 26
- Modell 122
Kopfteillänge: 450 mm, Kopf- und Fußteil senkrecht abklappbar 28



Wandklappliegen

- Modell 125 30
- Modell 126 32

Serie DFH - Dewert-Universal-Liegen mit fester Höhe

Gute Gründe für eine Universal-Liege der Serie DFH



Langlebig ✓



Robust ✓



Pflegeleicht ✓



Hohe maximale Belastbarkeit ✓



Bewährte ✓
Dewert-Qualität



Universeller Einsatz ✓



Polsteraufbau:

- Polsterteilstärke 60 mm; Modell 106, 107: 80 mm
- Trägerplatte bestehend aus 18 mm-Spanplatte mit umlaufendem Massivholz-Verstärkungsrahmen
- 2-lagiger homogener Polyurethan-Schaumstoff mit RG 46 und 76; Ökotex-zertifiziert, kein aus Abfallschaum und chemischen Klebstoffen hergestellter Verbundschaum, der sich im schnellen Alterungsprozess aufreißt
- **Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:**
 - Skai® Pandora Plus mit samtig-glatte Oberfläche
 - Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Reinigungsset für Skai-Produkte
(Art.-Nr. 050-1000)

Inhalt:

- Zerstäuberflasche mit 200 ml Spezial-Skai-Reinigungsmittel
- 1 Mikrofaser-Pflegetuch 40 x 40 cm



Dewert-Hygiene-Ausstattung

Ermöglicht optimale Reinigung und Desinfizierbarkeit

- Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen
- Entlüftungsöffnungen an der Polsterunterseite, verschlossen mit Luftausgleichskappen mit Ventilfunktion
- Einfache Hygiene durch offene Bauweise:
Gute Erreichbarkeit aller Bauteile,
keine im Alterungsprozess brechenden Kunststoffabdeckungen
- Optional:
Innovatives Polsterbezugsmaterial Skai® Toronto EN mit staynu



Neue Serie DFH - Dewert-Universal-Liegen mit fester Höhe

Universelle Untersuchungs- und Behandlungsliegen aus Vierkanthohr:

Technik:



- Untergestell aus 30 x 30 x 2 mm Vierkanthohr
- Querstreben zwischen den Liegenfüßen
- Feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich bei Bodenunebenheiten
→ Fahrbarkeiten als Option wählbar, dann zusätzliche Längsverstrebung erforderlich
- Verzinkte Stahlscharniere als Verbindungselemente zwischen den Polstersegmenten, keine brechenden Kunststoffelemente
- Liegenfußpaare und Gestellrahmen fest verschraubt
- Belastbarkeit: 250 kg



Varianten:

2-teilige Liegefläche:

- Kopfteil positiv verstellbar
- Fußteil fest, nicht verstellbar

Kopfteillänge 550 mm | Polster 2-teilig: Modell 21, 22, 27, 32, 36, 37



- Zwei stabile, parallel angebrachte Sicherheits-Raster zur positiven Kopfteilverstellung
→ Optional: Komfortable Verstellung durch Gasdruckfeder stufenlos bis +40°
- Modell 27, 37: Kopfteil stufenlos positiv und negativ verstellbar durch Gasdruckfeder



Kopfteillänge 750 mm | Polster 2-teilig: Modell 20

- Komfortable Verstellung durch Gasdruckfeder stufenlos bis +75° zur Sitzposition des Patienten



3-teilige Liegefläche: **NEU**

- Fußteil positiv verstellbar durch Gasdruckfeder bis +35°
- Mittelteil fest

Kopfteillänge 550 mm | Polster 3-teilig: Modell 31

Kopfteillänge 750 mm | Polster 3-teilig: Modell 30



Universelle Untersuchungs- und Behandlungsliegen aus Rundrohr:

Technik:



- Untergestell aus \varnothing 32 x 2 mm Rundrohr
- Querstreben zwischen den Liegenfüßen
- Feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich bei Bodenunebenheiten
→ Fahrbarkeiten als Option wählbar, dann zusätzliche Längsverstrebung erforderlich
- Verzinkte Stahlscharniere als Verbindungselemente zwischen den Polstersegmenten, keine brechenden Kunststoffelemente
- Gestell im Stück verschweißt (dann mit Pulverbeschichtung)
- Belastbarkeit: 250 kg



Kopfteillänge 550 mm | Polster 2-teilig bzw. 3-teilig



- Kopfteil positiv verstellbar durch zwei parallel angebrachte Sicherheits-Raster (Abb. links)
→ Optional: Komfortable Verstellung durch Gasdruckfeder stufenlos bis +40°
→ Modell 119: Kopfteil auch negativ verstellbar durch Gasdruckfeder



Universelle Kurzliegen zur Untersuchung und Behandlung:

Technik:



- Untergestell je nach Modell aus 30 x 30 x 2 mm Vierkantrohr bzw. \varnothing 32 x 2 mm Rundrohr
- Querstreben zwischen den Liegenfüßen
- Feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich bei Bodenunebenheiten
→ Fahrbarkeiten als Option wählbar, dann zusätzliche Längsverstrebung erforderlich
- Je nach Modell verzinkte Stahlscharniere als Verbindungselemente zwischen den Polstersegmenten, keine brechenden Kunststoffelemente
- Gestell im Stück verschweißt (dann mit Pulverbeschichtung)
- Belastbarkeit: 250 kg

1-teilige Liegefläche: Modell 16, 17

3-teilige Liegefläche:

- Kopfteil je nach Modell positiv verstellbar durch zwei Sicherheits-Raster bzw. senkrecht abklappbar durch Gasdruckfeder
- Mittelteil fest
- Fußteil senkrecht abklappbar durch Gasdruckfeder

Varianten:

Kopfteillänge 550 mm | Polster 3-teilig | Vierkantrohr: Modell 113, 114

Kopfteillänge 550 mm | Polster 3-teilig | Rundrohr: Modell 121

Kopfteillänge 450 mm | Polster 3-teilig | Rundrohr: Modell 122



Serie DFH

2-teilige Liege mit fester Höhe aus Vierkantrrohr

Kopfteillänge: 550 mm

Modell 21-00 und 32-00 weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 21-03 und 32-03 weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 21-04 und 32-04 graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

Modell 22-01 und 36-01 verchromt



Modell 21-00 mit
Ausstattungsoption:
Papierrollenhalter (1210)



Grundausrüstung:

- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich bei Bodenunebenheiten
- Kopfteil positiv verstellbar
- Ansteckmöglichkeit für Papierrollenhalter an Kopf- und Fußseite
- Dewert-Hygiene-Ausstattung



Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil bis 30° positiv verstellbar durch 2 Sicherheits-Zahnraster
- Kopfteillänge: 550 mm
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 1.400 mm
- Polsterteilstärke: 60 mm



Modell 21-00 mit Ausstattungsoptionen:
Fahrbar auf einzeln feststellbaren Rollen (1120-10),
Längsverstrebung (1310), Papierrollenhalter (1210)



Technische Daten:

- Länge der Liegefläche: 1.950 mm
- Breite der Liegefläche: Modell 21-..., 22-01: 650 mm | Modell 32-..., 36-01: 800 mm
- Höhe: 680 mm
- Belastbarkeit: 250 kg



Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)



Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 1120-10
Fahrbar auf 4 Rollen
einzeln feststellbar,
Ø 100 mm



Art.-Nr. 1140-11
Fahrbar auf 4 Rollen
einzeln feststellbar,
Ø 125 mm



Art.-Nr. 1180N
Fahrbar auf 4 Doppelrollen
zentral feststellbar, Ø 100
mm (nicht bei Ausführung
verchromt)



Art.-Nr. 1185
Fahrbar auf 4 Comfort-Doppel-
rollen zentral feststellbar,
Ø 125 mm (nicht bei Ausführung
verchromt)

Längsverstrebung



Art.-Nr. 1310
Längsverstrebung zur
zusätzlichen Stabilisierung
**(erforderlich bei
Fahrbarkeit)**

Kopfteiloptionen



Art.-Nr. 1655-20
Komfortable Kopfteilverstellung
stufenlos durch Gasdruckfeder
von 0° bis +55°



Art.-Nr. 1662
Zusätzliches 2. Kopfteil,
55 cm lang, verstellbar
durch 2 Zahnraster



Art.-Nr. 1610
Nasenschlitz

Art.-Nr. 1620
Füllpolster

Seitengitter



Art.-Nr. 1088
Seitengitter seitlich versenkbar,
RAL 9006 pulverbeschichtet,
Länge 820 mm



Art.-Nr. 1040
1 Stück Seitengitter abklappbar mit
Halterung, verchromt, komplett aus Stahlrohr
ohne brechende Kunststoffteile,
Länge 700 mm



Art.-Nr. 1005
1 Stück Seitengitter für Normschiene
mit Befestigungskloben, verchromt,
komplett aus Stahlrohr, Länge 800 mm

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 1210 / 1220
Papierrollenhalter,
für Liegenbreite
650 mm / 800 mm

Polsteroptionen

Art.-Nr. 1770 / 1780
Softpolster für hohen Liegekomfort aus
Kaltschaum, für Liegenbreite 650 mm /
800 mm, Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. 1772 / 1782
Polster mittelweich durch Kaltschaum-
auflage, für Liegenbreite 650 mm /
800 mm, Polsterstärke 70 mm



Art.-Nr. 1850
Ablagekorb mit Halterung,
Abmessungen:
L. 530 x B. 370 x H. 80 mm

Anbau-Elemente



Art.-Nr. 1410
1 Stück Normschiene,
Länge: 350 mm

Art.-Nr. 1420
1 Stück Normschiene,
Länge: 1.300 mm



Art.-Nr. 1430
1 Befestigungskloben für
Normschiene, Aufnahme
passend für Rohr-Ø 18 mm



Art.-Nr. 1440
1 Armauflage für
Normschiene, ohne
Befestigungskloben



Art.-Nr. 1450
1 Infusionsstange für
Normschiene, ohne
Befestigungskloben

Serie DFH

2-teilige Liege mit fester Höhe aus Vierkantrrohr Kopfteillänge: 750 mm

Modell 20-00 weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 20-03 weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 20-04 graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)



Beide Abb.:
Modell 20-04
mit Ausstattungsoption:
Papierrollenhalter (1210)



Grundausrüstung:

- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich bei Bodenunebenheiten
- Kopfteil stufenlos zu Sitzposition verstellbar
- Ansteckmöglichkeit für Papierrollenhalter an Kopf- und Fußseite
- Dewert-Hygiene-Ausstattung 

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder bis +75° verstellbar (Sitzposition)
- Kopfteillänge: 750 mm
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 1.200 mm
- Polsterteilstärke: 60 mm



Technische Daten:

- Länge der Liegefläche: 1.950 mm
- Breite der Liegefläche: 650 mm
- Höhe: 680 mm
- Belastbarkeit: 250 kg 



Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)



Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 1120-10
Fahrbar auf 4 Rollen
einzeln feststellbar,
Ø 100 mm



Art.-Nr. 1140-11
Fahrbar auf 4 Rollen
einzeln feststellbar,
Ø 125 mm



Art.-Nr. 1180N
Fahrbar auf 4 Doppelrollen
zentral feststellbar, Ø 100
mm



Art.-Nr. 1185
Fahrbar auf 4 Comfort-Doppel-
rollen zentral feststellbar,
Ø 125 mm

Längsverstrebung



Art.-Nr. 1310
Längsverstrebung zur
zusätzlichen Stabilisierung
(erforderlich bei Fahrbarkeit)

Kopfteiloptionen



Art.-Nr. 1662
Zusätzliches 2. Kopfteil, 55 cm lang,
verstellbar durch 2 Zahnraster



Art.-Nr. 1610
Nasenschlitz

Art.-Nr. 1620
Füllpolster

Seitengitter



Art.-Nr. 1088
Seitengitter seitlich versenkbar,
RAL 9006 pulverbeschichtet,
Länge 820 mm



Art.-Nr. 1040
1 Stück Seitengitter abklappbar mit
Halterung, verchromt, komplett aus Stahlrohr
ohne brechende Kunststoffteile,
Länge 700 mm



Art.-Nr. 1005
1 Stück Seitengitter für Normschiene
mit Befestigungskloben, verchromt,
komplett aus Stahlrohr, Länge 800 mm

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 1210 / 1220
Papierrollenhalter,
für Liegenbreite
650 mm / 800 mm

Polsteroptionen

Art.-Nr. 1770 / 1780
Softpolster für hohen Liegekomfort aus
Kaltschaum, für Liegenbreite 650 mm /
800 mm, Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. 1772 / 1782
Polster mittelweich durch Kaltschaum-
auflage, für Liegenbreite 650 mm /
800 mm, Polsterstärke 70 mm



Art.-Nr. 1850
Ablagekorb mit Halterung,
Abmessungen:
L. 530 x B. 370 x H. 80 mm

Anbau-Elemente



Art.-Nr. 1410
1 Stück Normschiene,
Länge: 350 m

Art.-Nr. 1420
1 Stück Normschiene,
Länge: 1.300 mm



Art.-Nr. 1430
1 Befestigungskloben für
Normschiene, Aufnahme
passend für Rohr-Ø 18 mm



Art.-Nr. 1440
1 Armauflage für
Normschiene, ohne
Befestigungskloben



Art.-Nr. 1450
1 Infusionsstange für
Normschiene, ohne
Befestigungskloben

Serie DFH

2-teilige Liege mit fester Höhe aus Vierkanthrohr Kopfteillänge: 550 mm

Modell 27-00 und 37-00 weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 27-03 und 37-03 weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 27-04 und 37-04 graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)



Beide Abb.:
Modell 27-04 mit
Ausstattungsoption:
Papierrollenhalter (1210)

Grundausrüstung:

- Kopfteil positiv und negativ verstellbar
- Längsverstrebung
- Gestell komplett als Einheit verschweißt
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich bei Bodenunebenheiten
- Dewert-Hygiene-Ausstattung 

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder positiv (+30°) und negativ (-25°) verstellbar
- Kopfteillänge: 550 mm
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 1.400 mm
- Polsterteilstärke: 60 mm



Technische Daten:

- Länge der Liegefläche: 1.950 mm
- Breite der Liegefläche: Modell 27-...: 650 mm | Modell 37-...: 800 mm
- Höhe: 650 mm
- Belastbarkeit: 250 kg 

Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandora Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)



Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 1120-10
Fahrbar auf 4 Rollen
einzeln feststellbar,
Ø 100 mm



Art.-Nr. 1140-11
Fahrbar auf 4 Rollen
einzeln feststellbar,
Ø 125 mm



Art.-Nr. 1180N
Fahrbar auf 4 Doppelrollen
zentral feststellbar, Ø 100
mm



Art.-Nr. B1185
Fahrbar auf 4 Comfort-Doppel-
rollen zentral feststellbar,
Ø 125 mm

Kopfteiloptionen



Art.-Nr. 1610
Nasenschlitz

Art.-Nr. 1620
Füllpolster

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 1210 / 1220
Papierrollenhalter, für Liegenbreite
650 mm / 800 mm

Polsteroptionen

Art.-Nr. 1770 / 1780
Softpolster für hohen Liegekomfort aus
Kaltschaum, für Liegenbreite 650 mm /
800 mm, Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. 1772 / 1782
Polster mittelweich durch Kaltschaum-
auflage, für Liegenbreite 650 mm /
800 mm, Polsterstärke 70 mm

Seitengitter



Art.-Nr. 1088
Seitengitter seitlich versenkbar,
RAL 9006 pulverbeschichtet,
Länge 820 mm



Art.-Nr. 1040
1 Stück Seitengitter abklappbar mit
Halterung, verchromt, komplett aus Stahlrohr
ohne brechende Kunststoffteile,
Länge 700 mm



Art.-Nr. 1005
1 Stück Seitengitter für Normschiene
mit Befestigungskloben, verchromt,
komplett aus Stahlrohr Länge 800 mm

Anbau-Elemente



Art.-Nr. 1410
1 Stück Normschiene
350 mm lang

Art.-Nr. 1420
1 Stück Normschiene
1.300 mm lang



Art.-Nr. 1430
1 Befestigungskloben für
Normschiene, Aufnahme
passend für Rohr-Ø 18 mm



Art.-Nr. 1440
1 Armauflage für
Normschiene, ohne
Befestigungskloben



Art.-Nr. 1450
1 Infusionsstange für
Normschiene, ohne
Befestigungskloben

Serie DFH

3-teilige Liege mit fester Höhe aus Vierkantröhr

Kopfteillänge: 550 mm

Modell 31-00 weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 31-03 weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 31-04 graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

NEU



Beide Abb.:
Modell 31-00
mit Ausstattungsoption:
Kopfteil verstellbar durch
Gasdruckfeder (1655)

Grundausrüstung:

- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich bei Bodenunebenheiten
- Längsverstrebung zur zusätzlichen Stabilisierung
- Kopf- und Fußteil positiv verstellbar
- Ansteckmöglichkeit für Papierrollenhalter an Kopf- und Fußseite
- Dewert-Hygiene-Ausstattung



Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 3-teilig:

- Kopfteil bis 30° positiv verstellbar durch 2 Sicherheits-Zahnrasten
- Kopfteillänge: 550 mm
- Mittelteil fest
- Mittelteillänge: 450 mm
- Fußteil stufenlos durch Gasdruckfeder von 0° bis +32° verstellbar
- Fußteillänge: 950 mm
- Polsterteilstärke: 60 mm



Technische Daten:

- Länge der Liegefläche: 1.950 mm
- Breite der Liegefläche: 650 mm, optional 800 mm
- Höhe: 680 mm
- Belastbarkeit: 250 kg



Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandora Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 1120-10
Fahrbar auf 4 Rollen
einzeln feststellbar,
Ø 100 mm



Art.-Nr. 1140-11
Fahrbar auf 4 Rollen
einzeln feststellbar,
Ø 125 mm



Art.-Nr. 1180N
Fahrbar auf 4 Doppelrollen
zentral feststellbar, Ø 100
mm



Art.-Nr. 1185
Fahrbar auf 4 Comfort-Doppel-
rollen zentral feststellbar,
Ø 125 mm

Kopfteiloptionen



Art.-Nr. 1655-20
Komfortable Kopfteilverstellung stufenlos
durch Gasdruckfeder von 0° bis +55°



Art.-Nr. 1610
Nasenschlitz

Art.-Nr. 1620
Füllpolster

Seitengitter



Art.-Nr. 1088
Seitengitter seitlich versenkbar,
RAL 9006 pulverbeschichtet,
Länge 820 mm



Art.-Nr. 1040
1 Stück Seitengitter abklappbar mit
Halterung, verchromt, komplett aus Stahlrohr
ohne brechende Kunststoffteile,
Länge 700 mm



Art.-Nr. 1005
1 Stück Seitengitter für Normschiene
mit Befestigungskloben, verchromt,
komplett aus Stahlrohr, Länge 800 mm

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 1210 / 1220
Papierrollenhalter,
für Liegenbreite
650 mm / 800 mm

Polsteroptionen

Art.-Nr. 31-800: Polsterbreite 800 mm

Art.-Nr. 1770 / 1780
Softpolster für hohen Liegekomfort aus
Kaltschaum, für Liegenbreite 650 mm /
800 mm, Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. 1772 / 1782
Polster mittelweich durch Kaltschaum-
auflage, für Liegenbreite 650 mm /
800 mm, Polsterstärke 70 mm



Art.-Nr. 1850
Ablagekorb mit Halterung,
Abmessungen:
L. 530 x B. 370 x H. 80 mm

Anbau-Elemente



Art.-Nr. 1410
1 Stück Normschiene,
Länge: 350 mm

Art.-Nr. 1420
1 Stück Normschiene,
Länge: 1.300 mm



Art.-Nr. 1430
1 Befestigungskloben für
Normschiene, Aufnahme
passend für Rohr-Ø 18 mm



Art.-Nr. 1440
1 Armauflage für
Normschiene, ohne
Befestigungskloben



Art.-Nr. 1450
1 Infusionsstange für
Normschiene, ohne
Befestigungskloben

Serie DFH

3-teilige Liege mit fester Höhe aus Vierkantrrohr Kopfteillänge: 750 mm

Modell 30-00 weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 30-03 weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 30-04 graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

NEU



Beide Abb.:
Modell 30-00
in Grundausstattung

Grundausstattung:

- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich bei Bodenunebenheiten
- Längsverstrebung zur zusätzlichen Stabilisierung
- Kopf- und Fußteil stufenlos positiv verstellbar
- Ansteckmöglichkeit für Papierrollenhalter an Kopf- und Fußseite
- Dewert-Hygiene-Ausstattung

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 3-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von 0° bis +80° verstellbar (Sitzposition)
- Kopfteillänge: 750 mm
- Mittelteil fest
- Mittelteillänge: 300 mm
- Fußteil stufenlos durch Gasdruckfeder von 0° bis +30° verstellbar
- Fußteillänge: 900 mm
- Polsterteilstärke: 60 mm



Technische Daten:

- Länge der Liegefläche: 1.950 mm
- Breite der Liegefläche: 650 mm, optional 800 mm
- Höhe: 680 mm
- Belastbarkeit: 250 kg

Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)



Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 1120-10
Fahrbar auf 4 Rollen
einzeln feststellbar,
Ø 100 mm



Art.-Nr. 1140-11
Fahrbar auf 4 Rollen
einzeln feststellbar,
Ø 125 mm



Art.-Nr. 1180N
Fahrbar auf 4 Doppelrollen
zentral feststellbar, Ø 100
mm



Art.-Nr. 1185
Fahrbar auf 4 Comfort-Doppel-
rollen zentral feststellbar,
Ø 125 mm

Kopfteiloptionen



Art.-Nr. 1610
Nasenschlitz

Art.-Nr. 1620
Füllpolster

Seitengitter



Art.-Nr. 1088
Seitengitter seitlich versenkbar,
RAL 9006 pulverbeschichtet,
Länge 820 mm



Art.-Nr. 1040
1 Stück Seitengitter abklappbar mit
Halterung, verchromt, komplett aus Stahlrohr
ohne brechende Kunststoffteile,
Länge 700 mm



Art.-Nr. 1005
1 Stück Seitengitter für Normschiene
mit Befestigungskloben, verchromt,
komplett aus Stahlrohr, Länge 800 mm

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 1210 / 1220
Papierrollenhalter,
für Liegenbreite
650 mm / 800 mm

Polsteroptionen

Art.-Nr. 30-800: Polsterbreite 800 mm

Art.-Nr. 1770 / 1780
Softpolster für hohen Liegekomfort aus
Kaltschaum, für Liegenbreite 650 mm /
800 mm, Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. 1772 / 1782
Polster mittelweich durch Kaltschaum-
auflage, für Liegenbreite 650 mm /
800 mm, Polsterstärke 70 mm



Art.-Nr. 1850
Ablagekorb mit Halterung,
Abmessungen:
L. 530 x B. 370 x H. 80 mm

Anbau-Elemente



Art.-Nr. 1410
1 Stück Normschiene,
Länge: 350 mm

Art.-Nr. 1420
1 Stück Normschiene,
Länge: 1.300 mm



Art.-Nr. 1430
1 Befestigungskloben für
Normschiene, Aufnahme
passend für Rohr-Ø 18 mm



Art.-Nr. 1440
1 Armauflage für
Normschiene, ohne
Befestigungskloben



Art.-Nr. 1450
1 Infusionsstange für
Normschiene, ohne
Befestigungskloben

Serie DFH

2-teilige Liege mit fester Höhe aus Rundrohr

Kopfteillänge: 550 mm

Modell 106-01 und 107-01 verchromt

Modell 106-00 und 107-00 weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 106-03 und 107-03 weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 106-04 und 107-04 graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)



Beide Abb.:
Modell 106-01 mit
Ausstattungsoption:
Papierrollenhalter (1210)



Grundausrüstung:

- Untergestell aus Rundrohr
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich bei Bodenunebenheiten
- Kopfteil positiv verstellbar
- Ansteckmöglichkeit für Papierrollenhalter an Kopf- und Fußseite
- Dewert-Hygiene-Ausstattung



Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil bis 30° positiv verstellbar durch 2 Sicherheits-Zahnraster
- Kopfteillänge: 550 mm
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 1.400 mm
- Polsterteilstärke: 80 mm



Modell 107-01 mit
Ausstattungsoption:
Papierrollenhalter (1220)



Technische Daten:

- Länge der Liegefläche: 1.950 mm
- Breite der Liegefläche: Modell 106-...: 650 mm | Modell 107-...: 800 mm
- Höhe: 650 mm
- Belastbarkeit: 250 kg 



Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandora Plus mit samtig-glatter Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)



Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 1120-10
Fahrbar auf 4 Rollen einzeln
feststellbar, Ø 100 mm



Art.-Nr. 1140-11
Fahrbar auf 4 Rollen
einzeln feststellbar,
Ø 125 mm

Längsverstrebung



Art.-Nr. 1310
Längsverstrebung zur zusätzlichen
Stabilisierung (**erforderlich bei
Fahrbarkeit**), pulverbeschichtet /
verchromt

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 1210 / 1220
Papierrollenhalter, für Liegenbreite
650 mm / 800 mm

Polsteroptionen

Art.-Nr. 1770 / 1780
Softpolster für hohen Liegekomfort aus
Kaltschaum, für Liegenbreite 650 mm /
800 mm, Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. 1772 / 1782
Polster mittelweich durch Kaltschaum-
auflage, für Liegenbreite 650 mm /
800 mm, Polsterstärke 70 mm

Kopfteiloptionen



Art.-Nr. 1655
Komfortable Kopfteilverstellung
stufenlos durch Gasdruckfeder



Art.-Nr. 1662
Zusätzliches gleichgroßes Kopfteil,
verstellbar durch 2 Zahnrad



Art.-Nr. 1610
Nasenschlitz

Art.-Nr. 1620
Füllpolster

Serie DFH

3-teilige Liege mit fester Höhe

Kopfteillänge: 550 mm

Modell 120-00 weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 120-01 verchromt

Modell 120-03 weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 120-04 graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)



Beide Abb.:
Modell 120-00
mit Ausstattungsoption:
Papierrollenhalter (1210)

Grundausrüstung:

- Untergestell aus Rundrohr
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich bei Bodenunebenheiten
- Längsverstrebung zur zusätzlichen Stabilisierung
- Kopf- und Fußteil positiv verstellbar
- Ansteckmöglichkeit für Papierrollenhalter an Kopf- und Fußseite
- Dewert-Hygiene-Ausstattung



Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 3-teilig:

- Kopfteil bis 30° positiv durch 2 Sicherheits-Zahnreiter verstellbar
- Kopfteillänge: 550 mm
- Mittelteil fest
- Mittelteillänge: 450 mm
- Fußteil stufenlos durch Gasdruckfeder von 0° bis +28° verstellbar
- Fußteillänge: 950 mm
- Polsterteilstärke: 60 mm



Technische Daten:

- Länge der Liegefläche: 1.950 mm
- Breite der Liegefläche: 650 mm
- Höhe: 650 mm
- Belastbarkeit: 250 kg 

Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatter Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 1120-10
Fahrbar auf 4 Rollen einzeln
feststellbar, Ø 100 mm



Art.-Nr. 1140-11
Fahrbar auf 4 Rollen
einzeln feststellbar,
Ø 125 mm

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 1210
Papierrollenhalter, für
Liegenbreite 650 mm

Polsteroptionen

Art.-Nr. 1770
Softpolster für hohen Liegekomfort aus
Kaltschaum, für Liegenbreite 650 mm,
Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. 1772
Polster mittelweich durch Kaltschaum-
auflage, für Liegenbreite 650 mm,
Polsterstärke 70 mm

Kopfteiloptionen



Art.-Nr. 1655
Komfortable Kopfteilverstellung
stufenlos durch Gasdruckfeder



Art.-Nr. 1610
Nasenschlitz

Art.-Nr. 1620
Füllpolster

Serie DFH

3-teilige Liege mit fester Höhe

Kopfteillänge: 550 mm

Modell 119-01 verchromt

Modell 119-00 weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 119-03 weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 119-04 graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)



Modell 119-01
mit Ausstattungsoption:
Papierrollenhalter (1210)

Grundausrüstung:

- Untergestell aus Rundrohr
- Kopfteil positiv und negativ verstellbar
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich bei Bodenunebenheiten
- Längsverstrebung zur zusätzlichen Stabilisierung
- Dewert-Hygiene-Ausstattung 

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 3-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -25° bis $+45^\circ$ verstellbar
- Kopfteillänge: 550 mm
- Mittelteil fest
- Mittelteillänge: 450 mm
- Fußteil stufenlos durch Gasdruckfeder von 0° bis $+28^\circ$ verstellbar
- Fußteillänge: 950 mm
- Polsterteilstärke: 80 mm



Technische Daten:

- Länge der Liegefläche: 1.950 mm
- Breite der Liegefläche: 650 mm
- Höhe: 650 mm
- Belastbarkeit: 250 kg 

Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatter Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 1120-10
Fahrbar auf 4 Rollen
einzeln feststellbar,
Ø 100 mm



Art.-Nr. 1140-11
Fahrbar auf 4 Rollen
einzeln feststellbar,
Ø 125 mm

Kopfteiloptionen



Art.-Nr. 1610
Nasenschlitz

Art.-Nr. 1620
Füllpolster

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 1210
Papierrollenhalter,
für Liegenbreite
650 mm

Polsteroptionen

Art.-Nr. 1770
Softpolster für hohen Liegekomfort aus
Kaltschaum, für Liegenbreite 650 mm,
Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. 1772
Polster mittelweich durch Kaltschaum-
auflage, für Liegenbreite 650 mm,
Polsterstärke 70 mm

Serie DFH

Universelle Kurzliegen zur Untersuchung und Behandlung 1-teilige Liege mit fester Höhe

Modell 16-00 und 17-00 weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 16-03 und 17-03 weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 16-04 und 17-04 graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)



Beide Abb.:
Modell 16-00
mit Ausstattungsoption:
Papierrollenhalter (1210)



Grundausrüstung:

- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich bei Bodenunebenheiten
- Ansteckmöglichkeit für Papierrollenhalter an beiden Querseiten
- Dewert-Hygiene-Ausstattung



Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 1-teilig:

- Länge: 1.450 mm (andere Abmessungen auf Anfrage möglich)
- Polsterteilstärke: 60 mm



Technische Daten:

- Länge der Liegefläche: 1.450 mm
- Breite der Liegefläche: Modell 16-...: 650 mm | Modell 17-...: 800 mm
- Höhe: 650 mm
- Belastbarkeit: 250 kg 



Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandora Plus mit samtig-glatter Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)



Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 1120-10
Fahrbar auf 4 Rollen einzeln
feststellbar, Ø 100 mm



Art.-Nr. 1140-11
Fahrbar auf 4 Rollen
einzeln feststellbar,
Ø 125 mm



Art.-Nr. 1180N
Fahrbar auf 4 Doppelrollen
zentral feststellbar,
Ø 100 mm



Art.-Nr. 1185
Fahrbar auf 4 Comfort-Doppel-
rollen zentral feststellbar,
Ø 125 mm

Längsverstrebung



Art.-Nr. 1310
Längsverstrebung zur zusätzlichen
Stabilisierung (**erforderlich bei
Fahrbarkeit**), pulverbeschichtet /
verchromt

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 1210 / 1220
Papierrollenhalter, für Liegenbreite
650 mm / 800 mm

Polsteroptionen

Art.-Nr. 1770 / 1780
Softpolster für hohen Liegekomfort aus
Kaltschaum, für Liegenbreite 650 mm /
800 mm, Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. 1772 / 1782
Polster mittelweich durch Kaltschaum-
auflage, für Liegenbreite 650 mm /
800 mm, Polsterstärke 70 mm

Serie DFH

Universelle Kurzliegen zur Untersuchung und Behandlung 3-teilige Liege mit fester Höhe (Vierkantrrohr)

Modell 113-00 und 114-00 weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 113-01 und 114-01 verchromt

Modell 113-03 und 114-03 weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 113-04 und 114-04 graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)



Alle Abb.:
Modell 113-01 mit
Ausstattungsoption:
Papierrollenhalter (1210)



Grundausrüstung:

- Fußteil senkrecht abklappbar
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich bei Bodenunebenheiten
- Dewert-Hygiene-Ausstattung



Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 3-teilig:

- Kopfteil bis 30° positiv durch 2 Sicherheits-Zahnraster verstellbar
- Kopfteillänge: 550 mm
- Mittelteil fest
- Mittelteillänge: 920 mm
- Fußteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -90° bis +10° verstellbar (senkrecht abklappbar)
- Fußteillänge: 480 mm
- Polsterteilstärke: 80 mm



Technische Daten:

- Länge der Liegefläche: 1.950 mm
- Breite der Liegefläche: Modell 113-...: 650 mm | Modell 114-...: 800 mm
- Höhe: 800 mm
- Belastbarkeit: 250 kg



Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 1120-10
Fahrbar auf 4 Rollen einzeln
feststellbar, Ø 100 mm

Längsverstrebung



Art.-Nr. 1310
Längsverstrebung zur zusätzlichen
Stabilisierung (**erforderlich bei
Fahrbarkeit**), pulverbeschichtet /
verchromt

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 1210 / 1220
Papierrollenhalter, für Liegenbreite
650 mm / 800 mm

Polsteroptionen

Art.-Nr. 1770 / 1780
Softpolster für hohen Liegekomfort aus
Kaltschaum, für Liegenbreite 650 mm /
800 mm, Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. 1772 / 1782
Polster mittelweich durch Kaltschaum-
auflage, für Liegenbreite 650 mm /
800 mm, Polsterstärke 70 mm

Kopfteiloptionen



Art.-Nr. 1655-20
Komfortable Kopfteilverstellung
stufenlos durch Gasdruckfeder
von 0° bis +55°



Art.-Nr. 1610
Nasenschlitz

Art.-Nr. 1620
Füllpolster

Seitengitter



Art.-Nr. 1088
Seitengitter seitlich versenkbar,
RAL 9006 pulverbeschichtet,
Länge 820 mm



Art.-Nr. 1040
1 Stück Seitengitter abklappbar mit
Halterung, verchromt, komplett aus Stahlrohr
ohne brechende Kunststoffteile,
Länge 700 mm



Art.-Nr. 1005
1 Stück Seitengitter für Normschiene
mit Befestigungskloben, verchromt,
komplett aus Stahlrohr, Länge 800 mm

Anbau-Elemente



Art.-Nr. 1410
1 Stück Normschiene,
Länge: 350 mm

Art.-Nr. 1420
1 Stück Normschiene,
Länge: 1.300 mm



Art.-Nr. 1430
1 Befestigungskloben für
Normschiene, Aufnahme
passend für Rohr-Ø 18 mm



Art.-Nr. 1440
1 Armauflage für
Normschiene, ohne
Befestigungskloben



Art.-Nr. 1450
1 Infusionsstange für
Normschiene, ohne
Befestigungskloben

Serie DFH

Universelle Kurzliegen zur Untersuchung und Behandlung 3-teilige Liege mit fester Höhe (Rundrohr)

Modell 121-01 verchromt

Modell 121-00 weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 121-03 weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 121-04 graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)



Alle Abb.:
Modell 121-01
mit Ausstattungsoption:
Papierrollenhalter (1210)



Grundausrüstung:

- Untergestell aus Rundrohr, mit Längsverstrebung zur zusätzlichen Stabilisierung
- Fußteil senkrecht abklappbar
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich bei Bodenunebenheiten
- Dewert-Hygiene-Ausstattung 



Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 3-teilig:

- Kopfteil bis 30° positiv durch 2 Sicherheits-Zahnreiter verstellbar
- Kopfteillänge: 550 mm
- Mittelteil fest
- Mittelteillänge: 900 mm
- Fußteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -90° bis +20° verstellbar (senkrecht abklappbar)
- Fußteillänge: 500 mm
- Polsterteilstärke: 80 mm



Technische Daten:

- Länge der Liegefläche: min. 1.550 mm, max. 1.970 mm
- Breite der Liegefläche: 650 mm
- Höhe: 800 mm
- Belastbarkeit: 250 kg (bei senkrecht abgeklapptem Fußteil)



Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatter Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 1120-10
Fahrbar auf 4 Rollen
einzeln feststellbar,
Ø 100 mm

Kopfteiloptionen



Art.-Nr. 1655
Komfortable Kopfteilverstellung
stufenlos durch Gasdruckfeder



Art.-Nr. 1610
Nasenschlitz

Art.-Nr. 1620
Füllpolster

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 1210
Papierrollenhalter,
für Liegenbreite
650 mm

Polsteroptionen

Art.-Nr. 1770
Softpolster für hohen Liegekomfort aus
Kaltschaum, für Liegenbreite 650 mm,
Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. 1772
Polster mittelweich durch Kaltschaum-
auflage, für Liegenbreite 650 mm,
Polsterstärke 70 mm

Serie DFH

Universelle Kurzliegen zur Untersuchung und Behandlung 3-teilige Liege mit fester Höhe (Rundrohr)

Modell 122-00 weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 122-01 verchromt

Modell 122-03 weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 122-04 graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)



Alle Abb.:
Modell 122-00
mit Ausstattungsoptionen:
Fahrbar auf einzeln fest-
stellbaren Rollen (1120-10),
Papierrollenhalter (1265K)



Grundausrüstung:

- Untergestell aus Rundrohr, mit Längsverstrebung zur zusätzlichen Stabilisierung
- Kopf- und Fußteil senkrecht abklappbar
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich bei Bodenunebenheiten
- Längsverstrebung zur zusätzlichen Stabilisierung
- Dewert-Hygiene-Ausstattung



Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 3-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -90° bis +25° verstellbar (senkrecht abklappbar)
- Kopfteillänge: 450 mm
- Mittelteil fest
- Mittelteillänge: 1120 mm
- Fußteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -90° bis +25° verstellbar (senkrecht abklappbar)
- Fußteillänge: 450 mm
- Polsterteilstärke: 80 mm

Technische Daten:

- Länge der Liegefläche: min. 1.300 mm, max. 2.020 mm
- Breite der Liegefläche: 650 mm
- Höhe: 800 mm
- Belastbarkeit: 250 kg (bei senkrecht abgeklapptem Kopf- und Fußteil)

kg

Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 1120-10
Fahrbar auf 4 Rollen einzeln
feststellbar, Ø 100 mm

Kopfteiloptionen



Art.-Nr. 1620
Füllpolster für
Nasenschlitz

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 1265K
Papierrollenhalter, für Liegenbreite
650 mm

Polsteroptionen

Art.-Nr. 1770
Softpolster für hohen Liegekomfort aus
Kaltschaum, für Liegenbreite 650 mm,
Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. 1772
Polster mittelweich durch Kaltschaumauflage, für
Liegenbreite 650 mm, Polsterstärke 70 mm

Wandklappliege

2-teilige Wandklappliege, längsseitig klappbar

Kopfteillänge: 550 mm

Kopfteil links: Modell 125-00/L weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 125-01/L verchromt

Modell 125-03/L weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 125-04/L graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

Kopfteil rechts: Modell 125-00/R weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 125-01/R verchromt

Modell 125-03/R weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 125-04/R graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)




Alle Abb.:
Modell 125-01/L

Funktion:

- Liege lässt sich **längsseitig** nach oben an die Wand oder nach unten an den Wandanschlag klappen
- **Einfache Handhabung** durch gasdruckfederunterstütztes Herausklappen und Sichern der Füße
- **Hohe Stabilität bei geringer Wandbelastung:**
Die Liege steht in funktionsbereitem Zustand auf ihren Füßen

Bitte beachten:

- Die Montage der Wandklappliege ist standardmäßig für eine stabile Steinwand ausgelegt
- Für andere Wandkonstruktionen sind Sonderhalter notwendig (Art.-Nr. 125-1380), die sich zusätzlich auf dem Boden abstützen (Voraussetzung: Es darf keine Sockelleiste im Aufstellbereich vorhanden sein.)

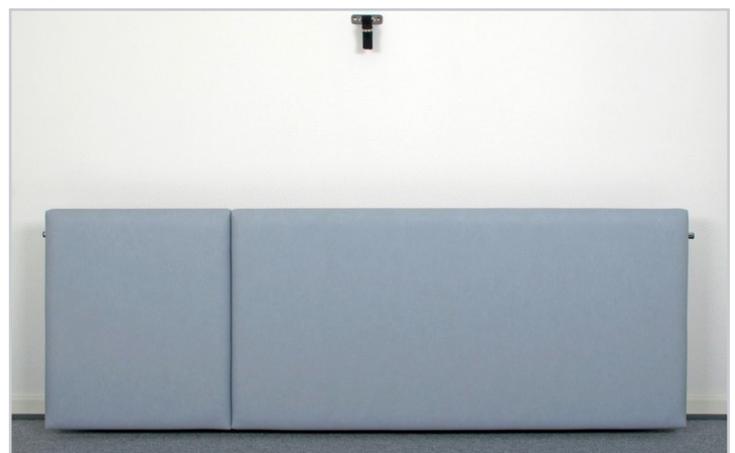

Technik:

- Liegengestell aus Vierkant-Rohr, 30 x 30 x 2 mm
- 2 verzinkte Stahlscharniere als Verbindungselemente zwischen Kopf- und Fußteil
- 2 stabile, parallel angebrachte Sicherheits-Raster zur positiven Kopfteilverstellung



Grundausrüstung:

- Kopfteil positiv verstellbar
- Dewert-Hygiene-Ausstattung



Im Lieferumfang zusätzlich enthalten:

- 2 Wandhalter zur Liegenbefestigung
- 1 Sicherungshalter mit Gurt zur Fixierung der Liege in hochgeklappter Stellung
- 1 Abstandhalter als Wandanschlag bei senkrecht nach unten geklappter Liege

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil bis 30° positiv verstellbar durch 2 Sicherheits-Zahnrester
- Kopfteillänge: 550 mm
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 1.400 mm
- Polsterteilstärke: 80 mm



Technische Daten:

- Länge der Liegefläche: 1.950 mm
- Gesamtlänge mit Wandhaltern: 2.040 mm
- Breite der Liegefläche: 650 mm
- Höhe: 700 mm
- Gewicht: 35 kg
- Belastbarkeit bei stabiler Steinwand: 200 kg



Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Mögliches Zubehör:



Art.-Nr. 125-1380
Sonderwandhalter



Wandklappliege

2-teilige Wandklappliege, querseitig klappbar
Kopfteillänge: 550 mm

Modell 126-00 weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 126-01 verchromt

Modell 126-03 weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 126-04 graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)



Alle Abb.:
Modell 126-01

Funktion:

- Liege lässt sich **querseitig** über das Kopfteilende nach oben an die Wand klappen
- **Einfache Handhabung:**
Zum Herabklappen wird das vordere Fußpaar vorgeschwenkt und mit einer Verstellerschraube am Rahmen fixiert
- **Hohe Stabilität bei geringer Wandbelastung:**
In hoch geklapptem Zustand steht die komplette Liege auf dem hinteren Fußgestell. Dieses ist wandseitig fixiert und stützt sich auf dem Fußboden ab.

Bitte beachten:

- Die Montage der Wandklappliege ist standardmäßig für eine stabile Steinwand ausgelegt
- **Notwendige Raumhöhe:** 2.420 mm

Technik:

- Liegengestell aus Vierkant-Rohr, 30 x 30 x 2 mm
- 2 verzinkte Stahlscharniere als Verbindungselemente zwischen Kopf- und Fußteil
- 2 stabile, parallel angebrachte Sicherheits-Raster zur positiven Kopfteilverstellung





Grundausrüstung:

- Kopfteil positiv verstellbar
- Dewert-Hygiene-Ausrüstung



Im Lieferumfang zusätzlich enthalten:

- 2 Wandhalter mit je 1 Sicherungsgurt zur Fixierung der nach oben geklappten Liege

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil bis 30° positiv verstellbar durch 2 Sicherheits-Zahnrester
- Kopfteillänge: 550 mm
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 1.400 mm
- Polsterteilstärke: 80 mm



Technische Daten:

- Länge der Liegefläche: 1.950 mm
- Gesamtlänge mit Wandhaltern: 2.040 mm
- Breite der Liegefläche: 650 mm
- Höhe: 700 mm
- Gewicht: 34 kg
- Belastbarkeit bei stabiler Steinwand: 200 kg 
- **Notwendige Raumhöhe:** 2.420 mm
- Abstand Kopfteilpolster – Wand: 90 mm
- Seitlicher Überstand der Wandhalterung zur Liegenbreite: je 90 mm
- Lage der Sicherungsglaschen: Höhe: 1.430 mm



Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie





K.H. Dewert GmbH
Vollmestraße 7
33649 Bielefeld
Germany

Postfach 14 40 28
33634 Bielefeld
Germany

Telefon + 49 (0) 5 21 / 4 00 27-0
Fax + 49 (0) 5 21 / 4 00 27-27

Internet: www.khdewert.de
E-Mail: info@khdewert.de
YouTube: K.H. Dewert

Die gesamte Dewert-Produktpalette mit zusätzlichen Zubehörartikeln finden Sie auf unserer Internetseite und in den weiteren Katalogen. Wir freuen uns auf Sie!



SERIE DFH - UNIVERSALLIEGEN MIT FESTER HÖHE

