

memmert

trust the best



Sterilisator

SN | SF

Präzise.  
Verlässlich.  
Sicher.

[www.memmert.com](http://www.memmert.com)

# Sterilisator S

IDEAL FÜR DAS STERILISIEREN VON GEFÄSSEN UND INSTRUMENTEN IN LABOREN, KRANKENHÄUSERN, ARZTPRAXEN SOWIE IN DER PHARMA- UND LEBENSMITTELINDUSTRIE



Optimale Prozessvalidierung nach Richtlinie der DGKH.



Einfache und präzise Einstellmöglichkeiten.



Absolut homogene Verteilung der Temperatur im Arbeitsraum.



Hygienisch und leicht zu reinigender Edelstahl.

Modellgrößen: 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750


Modellvarianten: SingleDISPLAY oder TwinDISPLAY mit natürlicher Konvektion (SN) oder forcierter Luftumwälzung (SF)

Einstellbereiche Temperatur: +20 °C bis +250 °C

## Auf Nummer sicher gehen

Dank des intuitiven Bedienkonzeptes lässt sich der Memmert Sterilisator einfach steuern. Die Funktion SetpointWAIT stellt sicher, dass die Programmfortsetzung erst nach Erreichen der Solltemperatur stattfindet. Die Sterilisation beginnt sobald die eingestellte Temperatur in der Raummitte des Schrankes gemessen wird.

Eine Prozessvalidierung, die sich an den Richtlinien der DGKH (Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene) sowie an den Vorgaben der ISO 20857:2010 orientiert, ist mit Hilfe der Funktion Setpoint-WAIT problemlos möglich.

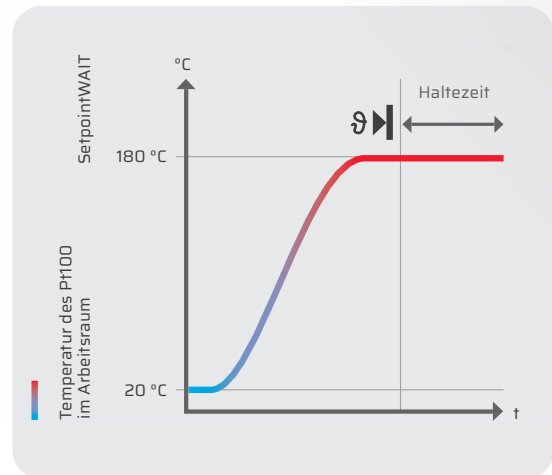

## Heißluftsterilisator S ist Medizinprodukt

Der Memmert Sterilisator ist als Medizinprodukt der Klasse IIb nach Verordnung (EU) 2017/745 - Artikel 120 (2) klassifiziert und dient zur Sterilisation von medizinischen Materialien bei Verwendung trockener Hitze bei atmosphärischem Druck.

## Maximale Hygiene dank hochwertigem Edelstahl

In den innovativen Produkten vereint Memmert Ästhetik mit Funktionalität. Deshalb besteht das Außengehäuse der Memmert-Geräte seit mehr als dreißig Jahren aus dem unverwechselbaren, strukturierten Edelstahl. Kratzfest und darüber hinaus ein optisches Highlight für Menschen, die sich gerne mit ästhetischem und modernem Design umgeben. Dass auch die Innenräume aus korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt und leicht zu reinigen sind, versteht sich von selbst.

