


Tourniquet Systeme



Elektrische Tourniquets / Manuelles Tourniquet / Tourniquet Manschetten
Tourniquet Verbrauchsmaterial / Druckinfusion

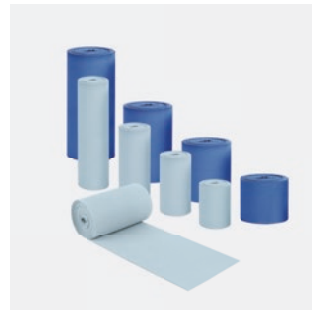

Für die komplette Produktpalette besuchen Sie bitte unsere Website **www.vbm-medical.de**

Hier finden Sie unsere Mediathek mit zusätzlichen Informationen wie Anwendungsvideos, Prospekte, Flyer, etc.

Die Medizinprodukte in diesem Katalog sind hergestellt ohne die Verwendung von Naturkautschuklatex, wenn nicht anders gekennzeichnet.
Die Medizinprodukte in diesem Katalog enthalten keine kennzeichnungspflichtigen Phthalate gemäß CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

	Elektrische Tourniquets
Tourniquet Touch® TT20	Seite 4 – 6
Tourniquet Touch® TT15	
	Manuelles Tourniquet
Manuelles Tourniquet	Seite 7
	Tourniquet Manschetten
Tourniquet Dispo Cuff	Seite 8 – 10
Tourniquet Wipe Cuff	
Tourniquet Silicone Cuff	
	Tourniquet Verbrauchsmaterial
Maßband	Seite 11 – 12
Tourniquet Sleeve	
Tourniquet Drape	
Cuff Cover	
Esmarch Bandagen	
Rollmanschette	
	Druckinfusion
Classic Infusor	Seite 13 – 16
Clear Infusor	
Dispo Infusor	

Tourniquet Touch® TT20 / TT15

Zur sicheren Regulierung der Unterbrechung des Blutflusses während Operationen an den Extremitäten

Das Tourniquet Touch® ist ein elektrisch betriebenes Blutsperregerät. Es reguliert den Druck einer Blutsperremanschette, welche vorübergehend den Blutfluss der oberen oder unteren Extremität eines Patienten verschließt, um ein blutleeres Feld zu erhalten. Nutzerfreundliche Innovationen wie die Schnellwahlkosten oder das spezielle Alarmsystem vereinfachen die Gerätenutzung und sorgen für Patientensicherheit. Die Systemoberfläche ist zuverlässig und intuitiv und erlaubt eine einfache Wartung für den Servicetechniker (Kalibrierung, Selbsttest, Dichtigkeitstest).

Tourniquet Touch® TT20 mit zwei Manschettenkanälen

Für die Anwendung mit Einfachmanschette, zwei Einfachmanschetten oder Doppelmanschette.

Tourniquet Touch® TT15 mit Manschettenkanal und Spülkanal

Für die Anwendung mit Einfachmanschette und Druckinfusionsmanschette.



Tourniquet Touch® TT20

Tourniquet Touch® TT15

Spezifikationen

Display

- 8 Zoll (800x480 pixel)
- Hoher Blickwinkel (170°)
- Reflexionsarm, matt und entspiegelt

Batterie

- Lithium-Ionen (14.4 V – 93.6 Wh)
- Ca. 8 h Backup Laufzeit

USB-Anschluss

- Software Updates
- Logdatei-Speicherung zur Geräteanalyse

Touchscreen

- 100% Premium Glas
- Einfache Reinigung und Desinfektion
- Bedienbar mit OP-Handschuhen

Manschettenkanal

- Druckbereich: 80 – 500 mmHg
- Alarmzeit: 15 – 120 Minuten

Gehäuse

- Mit integriertem Haltegriff
- Sehr robustes Material
- Leichte Reinigung und Desinfektion

Einstellungen

- Personalisierte Zeit- und Druckeinstellungen in den Voreinstellungen
- Einfache Wartung (Kalibrierung, Selbsttest, Dichtigkeitstest)

Spülkanal (TT15)

- Druckbereich: 50 – 300 mmHg



Eigenschaften

Schnellwahltaasten

- Ermöglichen Druck- und Zeitänderung mit nur zwei Berührungen der voreingestellten Werte
- Kein Drücken von Pfeilen und Bestätigungstasten notwendig
- Ermöglichen sofortige Druckänderungen während chirurgischen Eingriffen

Timer Alarm

- Präzise Zeitüberwachung während der Anwendung
- Anwender wird beim Erreichen der eingestellten Alarmzeit gewarnt
- Verlängerung der Alarmzeit um 10, 20 oder 30 Minuten

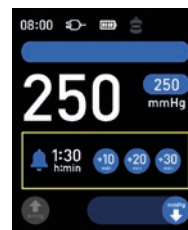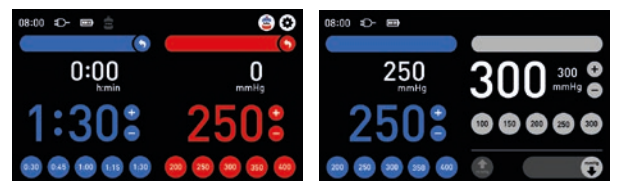

TT20

Intravenöse Regionalanästhesie (IVRA)

- Sicherheitssperre, um das Risiko einer versehentlichen Entlüftung zu vermindern und einen plötzlichen IVRA-Verlust vorzubeugen



TT15

Anschluss Spülkanal

- Spülkanalanschluss mit dafür vorgesehenem Konnektor für Druckinfusionsmanschetten, um eine fehlerhafte Konnektion von Tourniquet Manschetten zu verhindern
- Ständige Überwachung und automatische Anpassung des Drucks, um den Druckverlust auszugleichen, welcher durch die Entleerung der Spülflüssigkeit entsteht



Bestellinformation

Tourniquet Touch® TT20 / Mit 3.0m Spiral-Verbindungsschlauch (blau und rot), 100 – 240 VAC, Höhe 186 mm, Breite 263 mm, Tiefe 226 mm, 4,5 kg

REF	Stk./Box
01-20-000	1

Tourniquet Touch® TT15 / Mit 3.0m Spiral-Verbindungsschlauch (blau und schwarz), 100 – 240 VAC, Höhe 186 mm, Breite 263 mm, Tiefe 226 mm, 4,5 kg

REF	Stk./Box
01-15-000	1

Zusatzinformation



Anwendungsvideo



Flyer Tourniquet Systeme

Zubehör für Tourniquet Touch®

Eigenschaften

**Haltegriff**

- Für einfaches Manövrieren

Kabelaufhängung

- Zur Platzierung des Kabels während des Transports

Schlauchhalterung

- Zur Platzierung der Verbindungsschläuche während des Transports

Korb

- Großer Stauraum
- Möglichkeit der Anbringung eines zweiten Korbs

Kabelkanal

- Im Inneren des Holms, zur Zugentlastung und korrekten Kabelführung

Bestell-
information

Stativ mit Korb / 4 Rollen mit Feststeller (2 davon elektrisch leitfähig), Höhe 939 mm, Breite 400 mm, Tiefe 400 mm, 8.2 kg

REF	Stk. / Box
01-00-100	1

Korb / Korb mit 2 kg Tragfähigkeit, Höhe 185 mm, Breite 377 mm, Tiefe 196 mm, 0.73 kg

REF	Stk. / Box
01-00-110	1

Ersatzteile für Tourniquet Touch®

**Spiral-Verbindungsschlauch /**

Farbe	Gerät	Gestreckte Länge 3.0 m	Gestreckte Länge 6.0 m	Stk. / Box
Rot	TT20	REF 20-20-742	REF 01-00-520	1
Blau	TT20 / TT15	REF 20-20-744	REF 01-00-510	1
Schwarz	TT15	REF 20-20-740	REF 01-00-530	1

**Glatter Verbindungsschlauch /**

Farbe	Gerät	Länge 4.5 m	Stk. / Box
Rot	TT20	REF 20-20-942	1
Blau	TT20 / TT15	REF 20-20-944	1

Bestell-
informationBestell-
information

Klaue / Mit Halteplatte für horizontale Normschiene

REF	Stk. / Box
01-00-200	1



Klaue / Mit Halteplatte für vertikale Rundprofile

REF	Stk. / Box
01-00-300	1



/ Manuelles Tourniquet

Handgebläse mit Manometer zum autonomen Einsatz ohne Strom- und Druckluftanschluss

Das manuelle Tourniquet reguliert den Druck einer Tourniquet Manschette, welche vorübergehend den Blutfluss der oberen oder unteren Extremität verschließt, um ein blutleeres Feld zu erzeugen.



Bestell-
information

Manuelles Tourniquet / Handgebläse mit Manometer, Druckbereich bis 600 mmHg

Mit blauem Spiral-Verbindungsschlauch und Schnellverschlusskupplung	Mit rotem Spiral-Verbindungsschlauch und Schnellverschlusskupplung	Stk. / Box
REF 20-18-601	REF 20-18-602	1

Zusatz-
information



Flyer Tourniquet Systeme

Tourniquet Dispo Cuff

Blutsperremanschette, zum Einmalgebrauch



Eigenschaften

Tourniquet Dispo Cuff ist eine sterile Blutsperremanschette zum Einmalgebrauch, die sich besonders für kontaminierte Anwendungen eignet und Schutz vor nosokomialer Infektion bietet. Die Manschette ist erhältlich in gerader Form (für kleine oder mittlere obere Extremitäten) und in konischer Form (hauptsächlich für konische, untere Extremitäten) und wird in verschiedenen Größen angeboten, die zur optimalen Manschettenauswahl farbkodiert sind.

Cuff-Design

- Flaches Profil und leichtes Gewicht
- Großer Klettverschluss zur sicheren Fixierung der Manschette
- Farbkodiert für einfache Größen- und Manschettenauswahl
- Schlauch aus knickfestem Silikonmaterial
- Konische und gerade Form
- PVC-frei

Verpackung

- In Spenderbox verpackt (3)
- Einfache Lagerung durch flache Verpackung

Gerade Form

- Zylindrisches Design
- Kein Unterschied im Durchmesser zwischen proximalem und distalen Manschettenrand

Konische Form

- Konisches Design mit kleinerem distalen als proximalem Durchmesser bei der Verwendung
- Blockt den Blutfluss bei niedrigerem Druck durch die verbesserte Anpassung an die Extremität
- Integrierte Kunststoffeinlage, um das Verrutschen der Manschette zu verhindern

Anschluss

- Einfach- und Doppelmanschette mit einem Anschluss (1+2)

Doppelmanschette für intravenöse Regionalanästhesie (IVRA)

- Doppelmanschette mit zwei individuell belüftbaren Blasen (2)

Bestellinformation

Tourniquet Dispo Cuff / Einfachmanschette, zum Einmalgebrauch, steril

Länge	Breite	Farbe	REF	Stk. / Box
20 cm	5 cm	-	20-34-700SLZ-1	10
30 cm	6 cm	■	20-34-710SLZ-1	10
35 cm	8 cm	■	20-34-711SLZ-1	10
46 cm	10 cm	■	20-34-712SLZ-1	10
46 cm	12 cm	■	20-34-715SLZ-1*	10
61 cm	12 cm	■	20-34-722SLZ-1*	10
76 cm	12 cm	■	20-34-727SLZ-1*	10
86 cm	12 cm	■	20-34-728SLZ-1*	10
107 cm	12 cm	■	20-34-729SLZ-1*	10

Tourniquet Dispo Cuff / Doppelmanschette, zum Einmalgebrauch, steril

Länge	Breite	Farbe	REF	Stk. / Box
30 cm	12 cm	■	20-30-710SLZ-1	10
46 cm	15 cm	■	20-30-712SLZ-1	10
61 cm	15 cm	■	20-30-722SLZ-1	10

*Konische Form

Verlängerungsschlauch / Zum Einmalgebrauch, steril

Länge	REF	Stk. / Box
100 cm	20-39-100-1	5

Zusatzinformation



Anwendung am Arm



Anwendung am Bein



Prospekt



Flyer Tourniquet Systeme

Tourniquet Wipe Cuff

Blutsperremanschette, wiederverwendbar durch manuelle Wischdesinfektion



Eigenschaften

Tourniquet Wipe Cuff ist eine wiederverwendbare Blutsperremanschette aus strapazierfähigem Material und ist geeignet zur wiederholten Anwendung nach Wischdesinfektion. Die Manschette ist erhältlich in gerader Form (für kleine oder mittlere obere Extremitäten) und in konischer Form (hauptsächlich für konische, untere Extremitäten) und wird in verschiedenen Größen angeboten, die zur optimalen Manschettenauswahl farbkodiert sind.

Cuff-Design

- Flaches Profil und leichtes Gewicht
- Großer Klettverschluss zur sicheren Fixierung der Manschette
- Farbkodiert für einfache Größen- und Manschettenauswahl
- Schlauch aus knickfestem Silikonmaterial
- Konische und gerade Form
- PVC-frei

Besondere Eigenschaften

- Spezielles Innenmaterial trocknet nach einer Wischdesinfektion schnell und ermöglicht eine zeitnahe Wiederverwendung des Produktes
- UDI-Code für die Rückverfolgbarkeit des Produktes
- Seriennummer für die Nachverfolgung der Anwendungen
- Bis zu 100-mal aufbereitbar (Wischdesinfektion)

Gerade Form

- Zylindrisches Design
- Kein Unterschied im Durchmesser zwischen proximalem und distalem Manschettenrand

Konische Form

- Konisches Design mit kleinerem distalem als proximalem Durchmesser bei der Verwendung
- Blockt den Blutfluss bei niedrigerem Druck durch die verbesserte Anpassung an die Extremität
- Integrierte Kunststoffeinlage, um das Verrutschen der Manschette zu verhindern

Doppelmanschette für intravenöse Regionalanästhesie (IVRA)

- Doppelmanschette mit 2 individuell belüftbaren Blasen

Bestellinformation

Tourniquet Wipe Cuff / Einfachmanschette, wiederverwendbar

Länge	Breite	Farbe	REF	Stk. / Box
20 cm	7 cm	□	20-75-700	1
30 cm	8 cm	■	20-75-710	1
35 cm	8 cm	■	20-75-711	1
46 cm	10 cm	■	20-75-712	1
46 cm	12 cm	■	20-75-715*	1
61 cm	12 cm	■	20-75-722*	1
76 cm	12 cm	■	20-75-727*	1
86 cm	12 cm	■	20-75-728*	1
107 cm	12 cm	■	20-75-729*	1

Tourniquet Wipe Cuff / Doppelmanschette, wiederverwendbar

Länge	Breite	Farbe	REF	Stk. / Box
30 cm	12 cm	■	20-77-710	1
46 cm	15 cm	■	20-77-712	1
61 cm	15 cm	■	20-77-722	1

*Konische Form

Zusatzinformation



Anwendung am Arm



Anwendung am Bein




Prospekt



Flyer Tourniquet Systeme

Tourniquet Silicone Cuff

Blutsperremanschette, wiederverwendbar durch maschinelle Aufbereitung

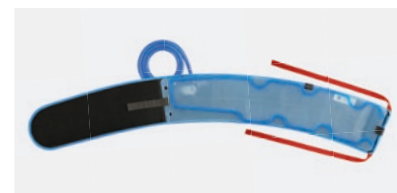

Eigenschaften

Tourniquet Silicone Cuff ist eine wiederverwendbare Blutsperremanschette aus langlebigem, strapazierfähigem Material und für die wiederholte Anwendung nach Sterilisation im Dampfautoklaven bei einer Temperatur von 134°C für 5 Minuten geeignet. Die Manschette ist erhältlich in gerader Form (für kleine oder mittlere obere Extremitäten) und in konischer Form (hauptsächlich für konische, untere Extremitäten) und wird in verschiedenen Größen angeboten, die zur optimalen Manschettenauswahl farbkodiert sind.

Cuff-Design

- Großer Klettverschluss zur sicheren Fixierung der Manschette
- Farbkodiert für einfache Größen- und Manschettenauswahl
- Schlauch aus knickfestem Silikonmaterial
- Schnellverschlusskupplung aus Metall inkl. Verschlusskappe
- Konische und gerade Form
- PVC-frei

Besondere Eigenschaften

- Silikonblase, leicht abwischbar - leicht zu trocknen
- UDI-Code für die Rückverfolgbarkeit des Produktes
- Seriennummer für die Nachverfolgung der Anwendungen
- Bis zu 50-mal aufbereitbar (Dampfsterilisation)

Gerade Form

- Zylindrisches Design
- Kein Unterschied im Durchmesser zwischen proximalem und distalen Manschettenrand

Konische Form

- Konisches Design mit kleinerem distalen als proximalem Durchmesser bei der Verwendung
- Blockt den Blutfluss bei niedrigerem Druck durch die verbesserte Anpassung an die Extremität
- Spezifisches Blasendesign (Wellenmuster), um das Verrutschen der Manschette zu verhindern

Doppelmanschette für intravenöse Regionalanästhesie (IVRA)

- Doppelmanschette mit 2 individuell belüftbaren Blasen

Bestellinformation

Tourniquet Silicone Cuff / Einfachmanschette, wiederverwendbar, autoklavierbar

Länge	Breite	Farbe	REF	Stk. / Box
20 cm	2.5 cm	-	20-64-700	1
30 cm	4.5 cm	■	20-64-710	1
35 cm	7 cm	■	20-64-611	1
46 cm	8.5 cm	■	20-64-612	1
46 cm	11 cm	■	20-64-512*	1
61 cm	11 cm	■	20-64-522*	1
76 cm	11 cm	■	20-64-527*	1
86 cm	11 cm	■	20-64-528*	1

Tourniquet Silicone Cuff / Doppelmanschette, wiederverwendbar, autoklavierbar

Länge	Breite	Farbe	REF	Stk. / Box
30 cm	8 cm	■	20-60-710	1
46 cm	12.5 cm	■	20-60-712	1
61 cm	12.5 cm	■	20-60-722	1

*Konische Form

Verschlusskappe / Für Tourniquet Silicone Cuff, wiederverwendbar

REF	Stk. / Box
22-60-111	5

Zusatzinformation



Anwendung am Arm



Anwendung am Bein



Prospekt



Flyer Tourniquet Systeme

Maßband


Zur Auswahl von VBM Tourniquet Manschetten

- Farbkodierung zur einfachen Bestimmung der Manschettengröße

Bestell-
information

Maßband / Zum Einmalgebrauch

REF	Stk. / Box
20-95-222	50

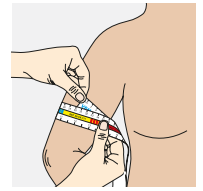

Tourniquet Sleeve


Zum Patientenschutz

- Schützt das weiche Gewebe unter der Manschette
- Reduziert Faltenbildung, Einklemmen und Scherkräfte auf das weiche Gewebe

Bestell-
information

Tourniquet Sleeve / Zum Einmalgebrauch

Extremität	Farbe	Rein verpackt	Steril verpackt	Stk. / Box
13-18 cm	<input type="checkbox"/>	REF 23-00-700	REF 23-00-700-1	10
18-27 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	REF 23-00-710	REF 23-00-710-1	10
25-32 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	REF 23-00-711	REF 23-00-711-1	10
32-43 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	REF 23-00-712	REF 23-00-712-1	10
43-57 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	REF 23-00-722	REF 23-00-722-1	10
57-69 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	REF 23-00-727	REF 23-00-727-1	10
69-79 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	REF 23-00-728	REF 23-00-728-1	10
79-100 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	REF 23-00-729	REF 23-00-729-1	10

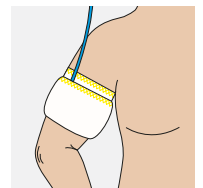

Tourniquet Drape


Zum Patientenschutz

- Isoliert die Manschette vom sterilen Feld
- Schutz gegen Ansammlung von Flüssigkeiten unter der Manschette, um den Patienten vor Verbrennungen in Verbindung mit Antiseptikum zu schützen

Bestell-
information

Tourniquet Drape / Zum Einmalgebrauch

Extremität	Rein verpackt	Stk. / Box	Steril verpackt	Stk. / Box
18-45 cm	REF 24-00-100	40	REF 24-00-100-1	10
40-80 cm	REF 24-00-200	40	REF 24-00-200-1	10

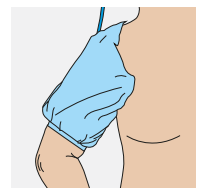

Cuff Cover

Zum Manschettenschutz

- Schützt die Manschette vor Verschmutzung

Bestell-
information

Cuff Cover / Zum Einmalgebrauch


Extremität	Größe	Rein verpackt	Steril verpackt	Stk. / Box
18-43 cm	Klein	REF 20-11-111	REF 20-11-111-1	50
40-61 cm	Mittel	REF 20-11-333	REF 20-11-333-1	50
58-81 cm	Groß	REF 20-11-222	REF 20-11-222-1	50



Esmarch Bandagen

Zur Blutentleerung

- In 4 Größen erhältlich
- Aus synthetischem Gummi und talkumfrei, um mögliche allergische Reaktionen zu verhindern
- Strukturierte Oberfläche für einen guten Halt
- Elastische Eigenschaften für ein einfaches Auswickeln
- Robust und reißfest

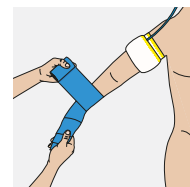Bestell-
information**Esmarch Bandage** / Zum Einmalgebrauch, steril
verpackt, Farbe: hellblau

Breite	Länge	REF	Stk. / Box
6 cm	365 cm	20-21-060-1	10
8 cm	365 cm	20-21-080-1	10
10 cm	365 cm	20-21-100-1	10
15 cm	365 cm	20-21-150-1	10

Esmarch Bandage / Wiederverwendbar,
autoklavierbar, Farbe: dunkelblau

Breite	Länge	REF	Stk. / Box
6 cm	500 cm	20-20-060	5
8 cm	500 cm	20-20-080	5
10 cm	500 cm	20-20-100	5
15 cm	500 cm	20-20-150	5








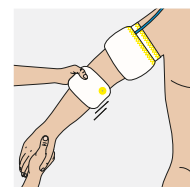
Rollmanschette

Zur Blutentleerung

- Ermöglicht eine einfache und schnelle Blutentleerung innerhalb weniger Sekunden
- Belüftbares Blutentleerungssystem
- 100% medizinisch eingestuftes Silikon
- Schnelle und effiziente Vorgehensweise
- Komplette Palette an verfügbaren Größen

Bestell-
information**Rollmanschette** / Wiederverwendbar

Größe	Extremität	Farbe	REF	Stk. / Box
2	26 - 33 cm		21-95-712	1
3	31 - 40 cm		21-95-719	1
4	38 - 49 cm		21-95-722	1
5	47 - 60 cm		21-95-727	1
6	58 - 70 cm		21-95-729	1



Zubehör für Rollmanschette

Bestell-
information**Handgebläse für Rollmanschette** / Manometer
200 mmHg, Verbindungsschlauch 100 cm mit
Schnellverschlusskupplung und Hohnadel

REF	Stk. / Box
21-95-300	1

**Maßband für Rollmanschette** / Mit Farb-
kodierung zur einfachen Bestimmung der
Rollmanschettengröße

REF	Stk. / Box
21-95-111	10

**Verbindungsschlauch für Handgebläse für Roll-
manschette** / Mit Schnellverschlusskupplung
und Hohnadel, 100 cm

REF	Stk. / Box
21-95-302	1

**Bremskeil für Rollmanschette** / Wiederver-
wendbar

Größe	REF	Stk. / Box
Klein	21-95-200	1
Groß	21-95-201	1

Classic Infusor

Druckinfusionsmanschette, wiederverwendbar



500 ml und 1000 ml Version

Doppelhaken zur Fixierung unterschiedlicher Passformen von Flüssigkeitsbeutel.

- Schnelle Verabreichung einer Infusionslösung zum Ausgleich von Flüssigkeits-/Volumenmangel
- Drucküberwachung und Spülung des Schlauchsystems bei invasiver, arterieller Blutdruckmessung
- Transfusion

3000 / 5000 ml Version

Reißverschluss zum Einlegen unterschiedlicher Passformen von Flüssigkeitsbeutel.

- Verabreichung großer Flüssigkeitsmengen zur Spülung des Operationsfeldes

Das Polyamidmaterial des Classic Infusors ermöglicht eine einfache Reinigung und Desinfektion. Transparentes Netzmaterial bietet eine klare Sicht auf Flüssigkeitsbeutel und Flüssigkeitsstand. Mit UDI-Code für die Rückverfolgbarkeit des Produktes.



Eigenschaften




Handgebläse mit Dreiwegehahn

- Ergonomisches Handgebläse zum Belüften
- Dreiwegehahn zum schnellen Entlüften bei Wechsel des Flüssigkeitsbeutels



Manometer

- Druckbereich von 0 – 300 mmHg in 10 mmHg Skalierung
- Robust und langlebig zur präzisen Drucküberwachung

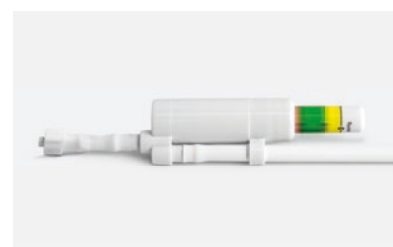

Farbkodierte Druckanzeige

- 360° Druckanzeige erleichtert die Drucküberwachung
- Überdruckventil zur Vermeidung von zu hoher Belüftung

Bestellinformation

Classic Infusor / Wiederverwendbar

Ausführung	500 ml	1000 ml	3000 / 5000 ml	Stk. / Box
Mit Handgebläse, Dreiwegehahn und farbkodierter Druckanzeige	REF 58-02-050	REF 58-02-100	-	1
Mit Handgebläse, Dreiwegehahn und Manometer	REF 58-08-050	REF 58-08-100	REF 58-08-300	1
Mit Luer Lock Anschluss	-	-	REF 58-01-300	1

Zusatzinformation



Anwendungsvideo



Prospekt



Flyer Tourniquet Systeme

/ Clear Infusor

Druckinfusionsmanschette, wiederverwendbar

500 ml und 1000 ml Version

- Schnelle Verabreichung einer Infusionslösung zum Ausgleich von Flüssigkeits-/Volumenmangel
- Drucküberwachung und Spülung des Schlauchsystems bei invasiver, arterieller Blutdruckmessung
- Transfusion

3000 ml Version

- Verabreichung großer Flüssigkeitsmengen zur Spülung des Operationsfeldes

Das Umschlage-Design ermöglicht die Fixierung gängiger Flüssigkeitsbeutel und eine gleichmäßige Druckverteilung. Durch die glatte Oberfläche des PU-Materials kann der Clear Infusor einfach gereinigt und desinfiziert werden. Transparentes Material bietet eine klare 360° Sicht auf Flüssigkeitsbeutel und Flüssigkeitsstand. Mit UDI-Code für die Rückverfolgbarkeit des Produktes.



Eigenschaften



Handgebläse mit Dreiwegehahn

- Ergonomisches Handgebläse zum Belüften
- Dreiwegehahn zum schnellen Entlüften bei Wechsel des Flüssigkeitsbeutels



Manometer

- Druckbereich von 0 - 300 mmHg in 10 mmHg Skalierung
- Robust und langlebig zur präzisen Drucküberwachung



Farbkodierte Druckanzeige

- 360° Druckanzeige erleichtert die Drucküberwachung
- Überdruckventil zur Vermeidung von zu hoher Belüftung

Bestellinformation

Clear Infusor / Wiederverwendbar

Ausführung	500 ml	1000 ml	3000 ml	Stk. / Box
Mit Handgebläse, Dreiwegehahn und farbkodierter Druckanzeige	REF 57-02-050	REF 57-02-100	-	1
Mit Handgebläse, Dreiwegehahn und Manometer	REF 57-08-050	REF 57-08-100	REF 57-08-300	1
Mit Luer Lock Anschluss	-	-	REF 57-01-300	1

Zusatzinformation



Anwendungsvideo



Prospekt



Flyer Tourniquet Systeme

/ Dispo Infusor

Druckinfusionsmanschette, zum Einpatientengebrauch



500 ml und 1000 ml Version

Mit Hakenband, zur einstellbaren Fixierung unterschiedlicher Passformen von Flüssigkeitsbeutel.

- Schnelle Verabreichung einer Infusionslösung zum Ausgleich von Flüssigkeits-/Volumenmangel
- Drucküberwachung und Spülung des Schlauchsystems bei invasiver, arterieller Blutdruckmessung
- Transfusion

3000 ml Version

Mit Haken, zur einfachen Fixierung gängiger Flüssigkeitsbeutel.

- Verabreichung großer Flüssigkeitsmengen zur Spülung des Operationsfeldes

Transparentes Netzmaterial bietet eine klare Sicht auf Flüssigkeitsbeutel und Flüssigkeitsstand.



Eigenschaften



Handgebläse mit Dreiwegehahn

- Ergonomisches Handgebläse zum Belüften
- Dreiwegehahn zum schnellen Entlüften bei Wechsel des Flüssigkeitsbeutels



Farbkodierte Druckanzeige

- 360° Druckanzeige erleichtert die Drucküberwachung
- Überdruckventil zur Vermeidung von zu hoher Belüftung

Bestellinformation

Dispo Infusor / Zum Einpatientengebrauch

Ausführung	500 ml	1000 ml	3000 ml	Stk. / Box
Mit Handgebläse, Dreiwegehahn und farbkodierter Druckanzeige	REF 56-02-050	REF 56-02-100	REF 56-02-300	5
Mit Luer Lock Anschluss	-	-	REF 56-01-300	5

Zusatzinformation



Anwendungsvideo



Prospekt



Flyer Tourniquet Systeme

/ Zubehör für Druckinfusionsmanschetten

Bestell-
information**Handgebläse / Wiederverwendbar**

Mit Dreivegehahn und farbkodierter Druckanzeige	Mit Dreivegehahn	Stk. / Box
REF 51-02-666	REF 51-03-666	1

**Manometer 300 mmHg / Druckgeprüft, zur Fixation an der Druckinfusionsmanschette, wiederverwendbar**

REF	Stk. / Box
20-17-301	1



B		V	
Blutsperremanschetten	8 - 10	Verbindungsschläuche für Tourniquet Touch®	6
Bremskeil für Rollmanschette	12	Verbindungsschlauch für Handgebläse für Rollmanschette	12
C		Verlängerungsschlauch für Tourniquet Dispo Cuff	8
Classic Infusor	13	Verschlusskappe für Tourniquet Silicone Cuff	10
Clear Infusor	14	Z	
Cuff Cover	11	Zubehör für Druckinfusionsmanschetten	16
D		Zubehör für Rollmanschette	12
Dispo Infusor	15	Zubehör für Tourniquet Touch®	6
Druckinfusion	13 - 16		
Druckinfusionsmanschetten	13 - 15		
E			
Elektrische Tourniquets	4 - 6		
Ersatzteile für Tourniquet Touch®	6		
Esmarch Bandagen	12		
G			
Glatte Verbindungsschlauch für Tourniquet Touch®	6		
H			
Handgebläse für Druckinfusionsmanschetten	16		
Handgebläse für Rollmanschette	12		
K			
Klaue für Tourniquet Touch®	6		
Korb für Tourniquet Touch®	6		
M			
Manometer 300 mmHg für Druckinfusionsmanschetten	16		
Manuelles Tourniquet	7		
Maßband für Rollmanschette	12		
Maßband für VBM Tourniquet Manschetten	11		
R			
Rollmanschette	12		
S			
Spiral-Verbindungsschlauch für Tourniquet Touch®	6		
Stativ mit Korb für Tourniquet Touch®	6		
T			
Tourniquet Dispo Cuff	8		
Tourniquet Drape	11		
Tourniquet Manschetten	8 - 10		
Tourniquet Silicone Cuff	10		
Tourniquet Sleeve	11		
Tourniquet Touch® TT15	5		
Tourniquet Touch® TT20	5		
Tourniquet Verbrauchsmaterial für Tourniquet Manschetten	11 - 12		
Tourniquet Wipe Cuff	9		

Als Komplettanbieter rund um das Thema
Tourniquet, bietet VBM die komplette Bandbreite
an Zubehör für alle Indikationen an



One Stop Shopping

